




VISIBLE PATIENT

Visible Patient Planning

Version : 1.0.11

août 2017

Manuel utilisateur

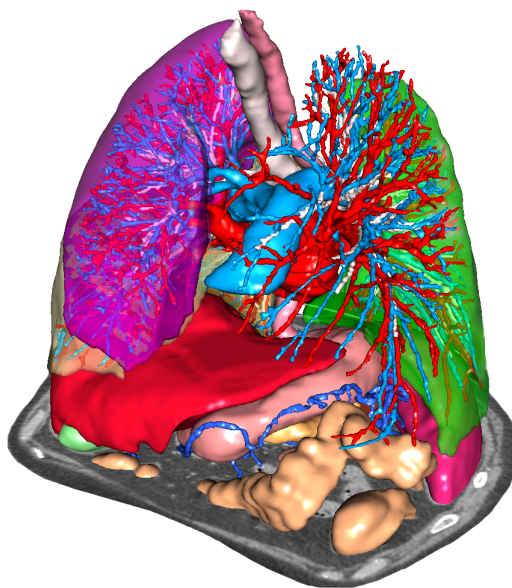

Numéro d'identification unique (UDI)

+B373VPS10110/\$\$71.0.11A



Le manuel utilisateur (en anglais et dans les autres langues disponibles) peut être téléchargé à l'adresse : <https://www.visiblepatient.com/go/planning-user-manual>.

Le manuel utilisateur en anglais est disponible dans le menu “”Help”” du logiciel. Une copie papier du manuel utilisateur peut être demandée sans coût additionnel et livrée sous 7 jours ouvrés.



Utilisation sur prescription médicale uniquement.

Utilisation sur prescription médicale uniquement.

Indications d'utilisation

La Suite Visible Patient est un ensemble de logiciels d'imagerie médicale destinés à offrir des outils d'aide à la lecture, l'interprétation, le suivi et la planification du traitement aux professionnels de santé qualifiés. La Suite Visible Patient accepte les images médicales compatibles DICOM acquises depuis une variété de dispositifs d'imagerie, y compris TDM et IRM.

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé avec ou pour l'interprétation diagnostique primaire d'images de mammographie.

Les logiciels offrent plusieurs catégories d'outils. Ils incluent des outils d'imagerie pour des images générales, y compris la visualisation 2D, le rendu volumique et la visualisation volumique 3D, les reconstructions multiplanaires orthogonales (MPR), la fusion d'images, le rendu surfacique, les mesures, les rapports, le stockage, des outils généraux de gestion d'image et d'administration, etc.

Sont également compris un système de traitement d'images et une interface utilisateur personnalisée pour la segmentation des structures anatomiques qui sont visibles sur les images (os, organes, structures vasculaires/respiratoires, etc.), incluant des outils de segmentation interactifs, des filtres d'image, etc.

De plus, des outils de détection et d'étiquetage des segments d'organes sont également présents (foie, poumons et reins), incluant la définition du parcours à travers les territoires vasculaires/respiratoires, l'approximation des territoires vasculaires/respiratoires à partir de structures tubulaires et l'étiquetage interactif.

Les logiciels sont conçus pour une utilisation par des professionnels qualifiés (y compris les médecins, chirurgiens et techniciens) et sont destinés à aider le clinicien qui est seul responsable de la prise de décision finale concernant la gestion des patients.

Autorisations



Ce dispositif médical est marqué CE et homologué par la FDA. Il peut donc être utilisé dans le cadre clinique et/ou pour la prise en charge des patients uniquement dans les pays de l'Union Européenne où la législation l'autorise et les Etats-Unis. (La liste complète des pays est disponible à cette adresse : <https://www.visiblepatient.com/go/planning-user-manual>)

L'utilisation de ce dispositif médical n'est pas autorisée dans les pays ne figurant pas dans la liste ci-dessus.

Dans ces pays, ce dispositif est considéré comme un prototype de recherche et *son utilisation est limitée à des fins de démonstration, recherche ou éducatives.*



Visible Patient SAS
RCS Strasbourg TI 794 458 125
1 place de l'hôpital
67000 Strasbourg, FRANCE
Capital social : 66.650 €

Contact

Email : support@visiblepatient.com
Tel. +33 (0)3 90 22 42 00
Site web : www.visiblepatient.com

US Agent

STRATEGY Inc.
805 Bennington Drive
suite 200
Raleigh, North Carolina 27615
UNITED STATES
Phone : +1 919 900 0718
Fax : +1 919 977 0808
Email : nancy.patterson@strategyinc.net

Table des matières

1	Indications d'utilisation	9
2	Contre-indication	11
3	Avertissements	13
3.1	Avertissement général	13
3.2	Environnement informatique sécurisé	13
3.3	Transfert de données avec Visible Patient	13
3.4	Avertissement concernant la visualisation en transparence des modèles 3D	13
3.5	Avertissement concernant le rendu volumique	14
3.6	Avertissement concernant les volumes des structures anatomiques	14
3.7	Avertissement concernant la visualisation de segments d'organes	14
3.8	Avertissement concernant la mesure de distances	14
4	Caractéristiques technologiques	15
4.1	Configuration système et caractéristiques	15
4.1.1	PC - Configuration système minimale	15
4.1.2	PC - Configuration système recommandée	15
4.1.3	Mac - Configuration système minimale	16
4.1.4	Mac - Configuration système recommandée	16
4.2	Aperçu du logiciel	16
4.2.1	Visible Patient Planning	16
4.3	Modules du logiciel	16
4.3.1	Lecteur d'images DICOM (IRM/TDM)	16
4.3.2	Analyseur DICOM manuel (IRM/TDM)	17
4.3.3	Lecture/Export de données Visible Patient	17
4.3.4	Représentation multiplanaire d'images 2D (MPR)	17
4.3.5	Rendu volumique de l'image	17
4.3.6	Atlas anatomique	17
4.3.7	Visualisation du modèle 3D	18
4.3.8	Visualisation du modèle 3D et de l'image	18
4.3.9	Visualisation des segments	18
5	Instructions d'installation	19
5.1	Installez le logiciel Visible Patient Planning	19

5.1.1	Comment installer Visible Patient Planning sous Windows	19
5.1.2	Comment installer Visible Patient Planning sous Mac	26
6	Mode d'emploi	29
6.1	Comment charger des données	29
6.2	Comment visualiser une image	32
6.2.1	Conditions préalables	33
6.2.2	Visualiser l'anatomie du patient	33
6.2.3	Exemples d'autres structures anatomiques	36
6.2.4	Informations complémentaires	37
6.3	Comment visualiser un modèle 3D	42
6.3.1	Conditions préalables	42
6.3.2	Visualiser l'anatomie du patient	42
6.3.3	Exemples d'autres structures anatomiques	47
6.3.4	Informations complémentaires	48
6.4	Comment visualiser une image avec un modèle 3D	51
6.4.1	Conditions préalables	51
6.4.2	Visualiser l'anatomie du patient	51
6.4.3	Exemples d'autres structures anatomiques	54
6.4.4	Informations complémentaires	55
6.5	Comment visualiser un rendu volumique	59
6.5.1	Conditions préalables	59
6.5.2	Visualiser l'anatomie du patient	59
6.5.3	Exemples d'autres structures anatomiques	63
6.5.4	Informations complémentaires	64
6.6	Comment utiliser l'activité Atlas Anatomique	65
6.6.1	Conditions préalables	65
6.6.2	Visualiser l'anatomie du patient	66
6.6.3	Exemples d'autres structures anatomiques	68
6.6.4	Informations complémentaires	68
6.7	Comment visualiser les segments	69
6.7.1	Conditions préalables	69
6.7.2	Poser des clips sur le réseau d'un organe	70
6.7.3	Exemples d'autres structures anatomiques	72
6.7.4	Informations complémentaires	72
6.8	How to load troublesome DICOM data	73
6.8.1	Conditions préalables	73
6.8.2	Load troublesome DICOM data	73
6.8.3	Informations complémentaires	79
6.9	How to use the modeling activity	82
6.9.1	Conditions préalables	82
6.9.2	Activity overview	82
6.9.3	How to model an anatomical structure : skin	83
6.9.4	How to model an anatomical structure : the right lung	90
6.9.5	How to export an Anatomical Atlas activity	95
6.9.6	How to export a 3D Model	97
6.9.7	How to use modeling interactive tools : bronchus	101
6.9.8	How to compute vascular and airway territories approximations	106
6.9.9	Informations complémentaires	116
6.10	Comment anonymiser une image	120
6.10.1	Conditions préalables	120
6.10.2	Anonymiser une série DICOM	120

7.1	Planning	123
7.2	Mise à jour de la licence	123
8	Résolution de problèmes	125
8.1	Problèmes généraux	125
8.1.1	Je ne peux pas ouvrir mon fichier DICOM	125
8.2	Problèmes de visualisation de segments	126
8.2.1	Aucun volume ne s'affiche	126
8.2.2	Je vois un avertissement concernant les territoires vasculaires simulés dans l'activité de pose de clip.	127

Indications d'utilisation

La Suite Visible Patient est un ensemble de logiciels d'imagerie médicale destinés à offrir des outils d'aide à la lecture, l'interprétation, le suivi et la planification du traitement aux professionnels de santé qualifiés. La Suite Visible Patient accepte les images médicales compatibles DICOM acquises depuis une variété de dispositifs d'imagerie, y compris TDM et IRM.

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé avec ou pour l'interprétation diagnostique primaire d'images de mammographie.

Les logiciels offrent plusieurs catégories d'outils. Ils incluent des outils d'imagerie pour des images générales, y compris la visualisation 2D, le rendu volumique et la visualisation volumique 3D, les reconstructions multiplanaires orthogonales (MPR), la fusion d'images, le rendu surfacique, les mesures, les rapports, le stockage, des outils généraux de gestion d'image et d'administration, etc.

Sont également compris un système de traitement d'images et une interface utilisateur personnalisée pour la segmentation des structures anatomiques qui sont visibles sur les images (os, organes, structures vasculaires/respiratoires, etc.), incluant des outils de segmentation interactifs, des filtres d'image, etc.

De plus, des outils de détection et d'étiquetage des segments d'organes sont également présents (foie, poumons et reins), incluant la définition du parcours à travers les territoires vasculaires/respiratoires, l'approximation des territoires vasculaires/respiratoires à partir de structures tubulaires et l'étiquetage interactif.

Les logiciels sont conçus pour une utilisation par des professionnels qualifiés (y compris les médecins, chirurgiens et techniciens) et sont destinés à aider le clinicien qui est seul responsable de la prise de décision finale concernant la gestion des patients.

CHAPITRE 2

Contre-indication

Aucune connue.

3.1 Avertissement général

Ce logiciel est conçu pour une utilisation par des professionnels de santé qualifiés et est destiné à l'assistance du clinicien, seul responsable de la prise de décision finale.

3.2 Environnement informatique sécurisé

Visible Patient exige que le logiciel soit installé sur un poste de travail sécurisé, conforme aux recommandations de la FDA sur la cybersécurité. Toutes les images ou modèles 3D doivent être transférés via un système sécurisé de transfert de fichiers installé chez l'utilisateur.

3.3 Transfert de données avec Visible Patient

Visible Patient exige que toutes les images transférées soient anonymisées et fournies depuis et vers le système sécurisé de transfert de fichier de la société. Visible Patient n'acceptera pas d'images dans tout autre format ou transférées de toute autre manière.

3.4 Avertissement concernant la visualisation en transparence des modèles 3D

Plusieurs activités permettent de visualiser le modèle en 3D avec la possibilité d'utiliser la transparence. La qualité du rendu dépend du matériel informatique (en particulier la carte graphique). Si l'ordinateur n'est pas conforme aux exigences relatives au matériel informatique, il peut y avoir des approximations de visualisation lorsque la transparence du modèle 3D est activée.

Les activités suivantes sont concernées :

- Visualisation du modèle 3D
- Visualisation MPR 3D
- Activité de pose de clip
- Activité de rendu volumique

3.5 Avertissement concernant le rendu volumique

La qualité et la fiabilité du rendu dépendent du matériel informatique (en particulier la carte graphique). Si l'ordinateur n'est pas conforme aux exigences relatives au matériel informatique, il peut y avoir des approximations de visualisation lors de la fusion du rendu volumique et du rendu du modèle 3D avec transparence.

3.6 Avertissement concernant les volumes des structures anatomiques

Dans la suite Visible Patient, les volumes des structures anatomiques sont disponibles à travers le gestionnaire d'organes et l'activité de pose de clip. Ces volumes sont calculés à partir des images. Par conséquent, la précision de ces volumes dépend de la qualité de l'image native (taille des voxels de l'image).

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à *Estimation des territoires vasculaires et respiratoires*.

3.7 Avertissement concernant la visualisation de segments d'organes

L'activité de visualisation de segments d'organes (activité de pose de clip) repose sur la reconstruction de territoires, et les segments sont déduits d'une image. Par conséquent, les segments d'organes sont une approximation de la réalité.

3.8 Avertissement concernant la mesure de distances

La manipulation de l'outil de mesure requiert une précision extrême. Lors de la mesure d'une distance sur une image 3D, à la fois le contraste et le niveau de zoom doivent être précisément réglés, sinon les mesures pourraient être inexactes. Lors de la mesure d'une distance sur un modèle 3D, le niveau de zoom doit être réglé avec précision.

Caractéristiques technologiques

4.1 Configuration système et caractéristiques

La Suite Visible Patient est conçue pour fonctionner sur une plate-forme autonome standard, à travers le système d'exploitation installé (Windows ou Mac). Le matériel de cette plate-forme se compose d'un ordinateur PC standard du commerce. En outre, tous les logiciels inclus dans la suite (expliqués en détail ci-dessous) peuvent être installés sur des ordinateurs différents et ils ne sont pas tenus d'être interconnectés via un réseau.

4.1.1 PC - Configuration système minimale

- **Système d'exploitation** : Windows 7 x64
- **Processeur** : Intel Core i3
- **Vidéo** : carte graphique dédiée (depuis 2012)
- **Mémoire** : 4 GB RAM
- **Stockage** : 10 GB espace disque
- **Internet** : connexion Internet haut débit
- **Média** : non requis
- **Résolution** : 1024x768 ou plus

4.1.2 PC - Configuration système recommandée

- **Système d'exploitation** : Windows 7 x64
- **Processeur** : Intel Core i7 – 2.5 GHz
- **Vidéo** : Nvidia GeForce GTX 760 ou meilleur
- **Mémoire** : 16 GB RAM
- **Stockage** : 300 GB espace disque
- **Internet** : connexion Internet haut débit
- **Média** : non requis
- **Résolution** : 1920x1080 résolution minimale d'affichage

4.1.3 Mac - Configuration système minimale

- **** Système d'exploitation**** : Mac OS 10.9 (Maverick). Tout ordinateur Apple commercialisé depuis 2010
- **Vidéo** : carte graphique dédiée

4.1.4 Mac - Configuration système recommandée

- **** Système d'exploitation**** : Mac OS 10.9 (Maverick). Tout ordinateur Apple commercialisé depuis fin 2013
- **Vidéo** : carte graphique dédiée

4.2 Aperçu du logiciel

4.2.1 Visible Patient Planning

Visible Patient Planning comprend des modules dédiés à la gestion de données et à l'analyse de données. Il contient un sous-ensemble des modules du logiciel Visible Patient Lab. Ce logiciel offre une solution de visualisation flexible pour aider les professionnels de santé qualifiés (généralement des cliniciens) dans l'évaluation de l'anatomie et de la pathologie des patients afin de planifier la thérapie ou la chirurgie. Ce logiciel fournit un outil pour charger les images et modèles 3D créés avec Visible Patient Lab. Ces images et modules peuvent être affichés selon les préférences des médecins grâce à des options de visualisation configurables ou des protocoles standard. Visible Patient Planning offre aux cliniciens un large éventail d'outils de visualisation et d'analyse des images et des modèles.

4.3 Modules du logiciel

Les modules de la Suite Visible Patient peuvent être regroupés par catégorie :

Catégorie	Fonctionnalité	Visible Patient Planning
Gestion de données	Lecteur d'images DICOM (IRM/TDM)	X
Gestion de données	Lecture/Export de données Visible Patient	X
Analyse d'images et de surfaces	Représentation multiplanaire d'images 2D (MPR)	X
Analyse d'images et de surfaces	Rendu volumique de l'image	X
Analyse d'images et de surfaces	Atlas anatomique	X
Analyse d'images et de surfaces	Visualisation du modèle 3D	X
Analyse d'images et de surfaces	Visualisation du modèle 3D et de l'image	X
Analyse d'images et de surfaces	Visualisation des segments	X

Le tableau ci-dessus regroupe chaque module du logiciel en : gestion de données, analyse d'images et de surfaces, et traitement de surface. De plus, chaque module individuel du logiciel est décrit plus en détail ci-dessous.

4.3.1 Lecteur d'images DICOM (IRM/TDM)

Ce module permet au logiciel de lire les fichiers DICOM et supporte les modalités IRM et TDM. L'interprétation du volume des données 3D (fusion de coupes DICOM 2D) est automatique dans ce module.

Une série DICOM contient de nombreuses coupes DICOM 2D et ces séries de coupes peuvent représenter des volumes de données différents. Pour construire chaque volume de données 3D, les coupes doivent être filtrées, séparées et réorganisées. Le lecteur DICOM utilise la position / orientation 3D de chaque coupe ainsi que le temps d'acquisition des coupes pour séparer et réorganiser les coupes et pour fournir une reconstruction volumique automatique des données 3D.

Le lecteur DICOM est utilisé pour lire un dossier DICOM, importer des coupes DICOM 2D et interpréter des données automatiquement afin de reconstruire tous les volumes des données 3D (image 3D).

4.3.2 Analyseur DICOM manuel (IRM/TDM)

Ce module plus avancé permet aux professionnels de santé qualifiés de filtrer manuellement les fichiers DICOM pour construire le volume de données 3D lorsque le lecteur par défaut est défaillant.

Une série DICOM contient de nombreuses coupes DICOM 2D qui peuvent représenter des volumes de données différents. A nouveau, pour construire chaque volume de données 3D, les coupes doivent être filtrées, séparées et réorganisées. Cet analyseur DICOM propose différents filtres configurables qui fonctionnent sur des étiquettes DICOM. Les professionnels de santé qualifiés combinent ces filtres pour créer des volumes de données 3D à partir d'images DICOM.

4.3.3 Lecture/Export de données Visible Patient

Ce module permet aux utilisateurs de sauvegarder et de charger des données produites par Visible Patient Lab. Ces données contiennent des images, le modèle 3D du patient, etc. Ce module gère également la rétro-compatibilité des données. Les données sont sauvegardées dans un format propriétaire sur le système de fichiers afin de vérifier (1) l'intégrité des fichiers pour sécuriser le transfert vers un autre ordinateur, et (2) la version des fichiers pour gérer l'évolution et la compatibilité des logiciels.

Le lecteur de données Visible Patient est utilisé pour lire un fichier de la Suite Visible Patient. Toutes les données générées par Visible Patient Lab sont stockées dans ce fichier : les images 3D, les modèles 3D, les atlas anatomiques et les segmentations.

4.3.4 Représentation multiplanare d'images 2D (MPR)

MPR correspond à la technique de visualisation la plus standard développée et utilisée sur les postes de travail d'imagerie médicale professionnels. L'activité de visualisation MPR 2D permet de visualiser une image sous différentes orientations (axiale, frontale et sagittale). Elle inclut également le fenêtrage de l'image, le changement de coupe dans l'image active, la translation, le zoom avant/zoom arrière, des informations sur les voxels (coordonnées et densité), le focus sur une partie de l'image, la mesure de distance, la capture d'écran, etc. Les bords de l'image sont représentés par un carré de couleur (rouge, bleu ou vert) en fonction de l'axe sélectionné.

4.3.5 Rendu volumique de l'image

Le module de rendu volumique de l'image correspond à des techniques de visualisation avancées développées et utilisées sur les postes de travail d'imagerie médicale professionnels : une représentation 3D du volume des données. Ce module permet cette visualisation et inclut un éditeur de fonction de transfert et plusieurs fonctions de transfert automatisées pré-calculées pour proposer différents rendus 3D.

4.3.6 Atlas anatomique

Ce module permet aux utilisateurs de fusionner deux représentations d'images planaires avec de la transparence, et de visualiser le résultat coupe par coupe. La première image correspond aux données IRM/TDM, la deuxième à l'atlas anatomique du patient (une image couleur où chaque organe est représenté). Cette activité permet de vérifier la modélisation et offre aux utilisateurs une meilleure compréhension de l'anatomie du patient.

4.3.7 Visualisation du modèle 3D

Ce modèle permet de revoir le modèle 3D du patient et son volume avec les interactions 3D classiques, telles que la rotation, la translation, le zoom avant/zoom arrière. La visibilité/transparence des organes peut être gérée afin d'améliorer la visualisation.

4.3.8 Visualisation du modèle 3D et de l'image

Ce module permet à l'utilisateur de combiner un MPR d'image 3D et un modèle 3D dans une même vue. Toutes les caractéristiques décrites dans "MPR d'image 2D" et "Visualisation du modèle 3D" sont également disponibles ici.

4.3.9 Visualisation des segments

Ce module permet de visualiser les segments et leurs volumes en comparaison avec le volume des organes. Comme précisé dans les indications d'utilisation, ce module est uniquement disponible pour les modélisations avancées des poumons/foie/reins. L'interaction repose sur les structures tubulaires pour sélectionner les segmentations vasculaires/respiratoires.

Instructions d'installation


5.1 Installez le logiciel Visible Patient Planning

L'installation de Visible Patient Planning peut être démarrée à partir d'un fichier exécutable.

5.1.1 Comment installer Visible Patient Planning sous Windows

Démarrez l'installation


Double-cliquez sur le fichier d'installation fourni par Visible Patient : la boîte de dialogue de bienvenue suivante sera affichée.

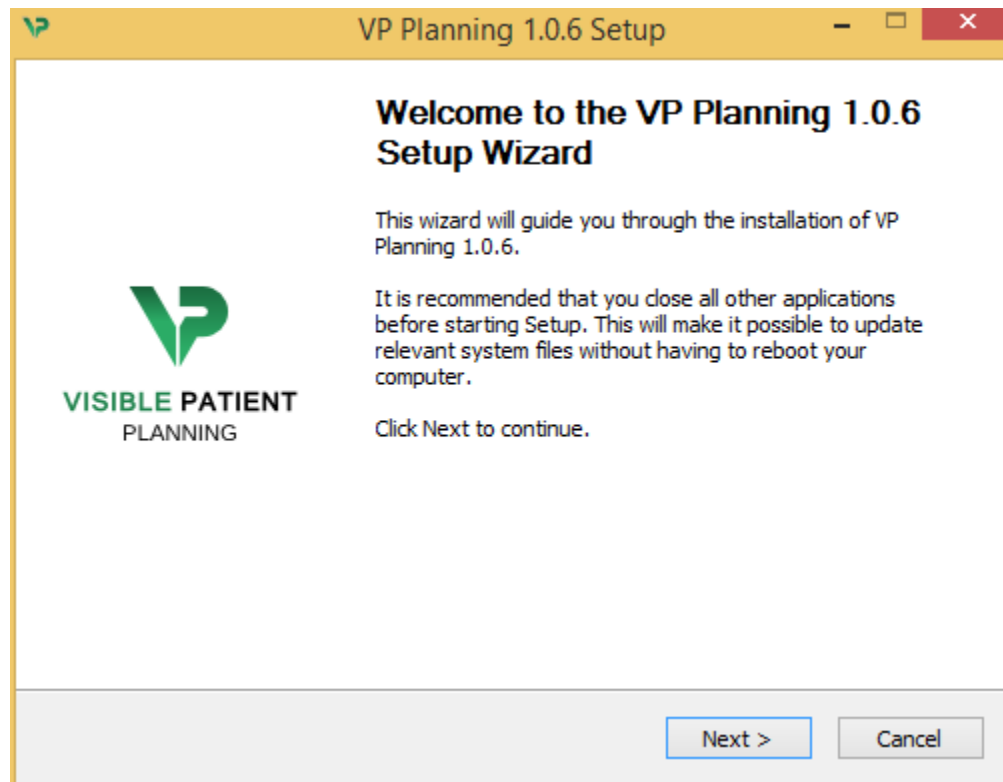

Cliquez sur “Suivant” (“Next”).

Acceptez la licence


L'accord de licence s'affiche.

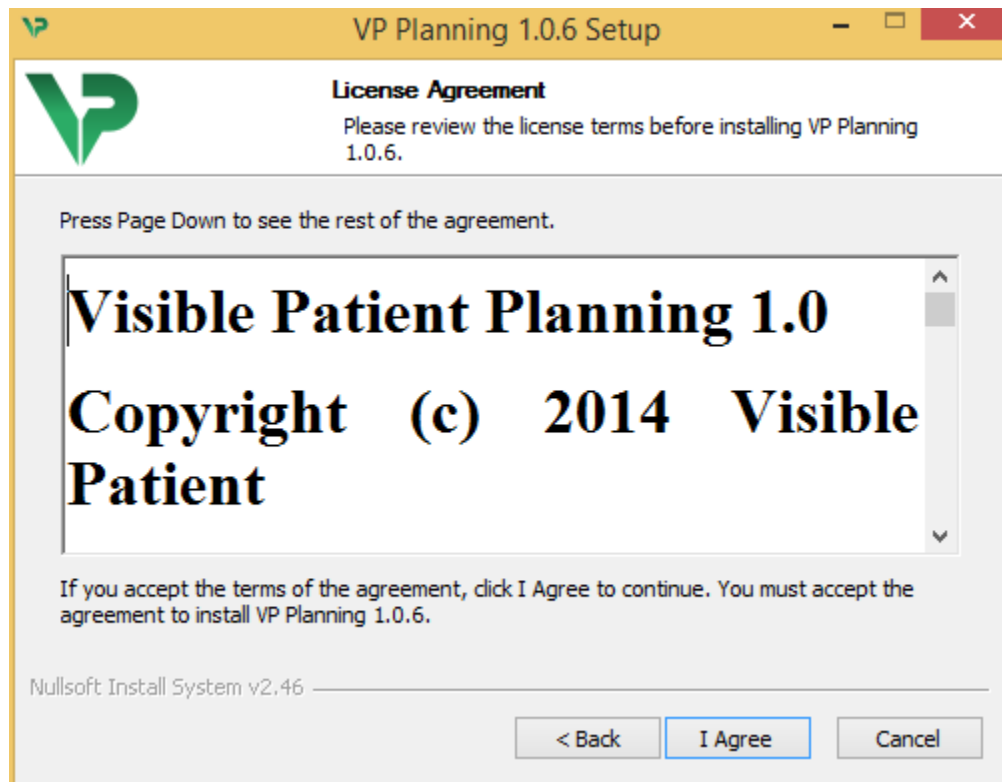


Lisez le contrat de licence et cliquez sur “Je suis d’accord” (“I agree”) pour continuer l’installation. (Si vous n’êtes pas d’accord, cliquez sur “Annuler” (“Cancel”) pour annuler l’installation.)

Sélectionnez le dossier de destination

Le dossier de destination où le logiciel sera installé s’affiche.

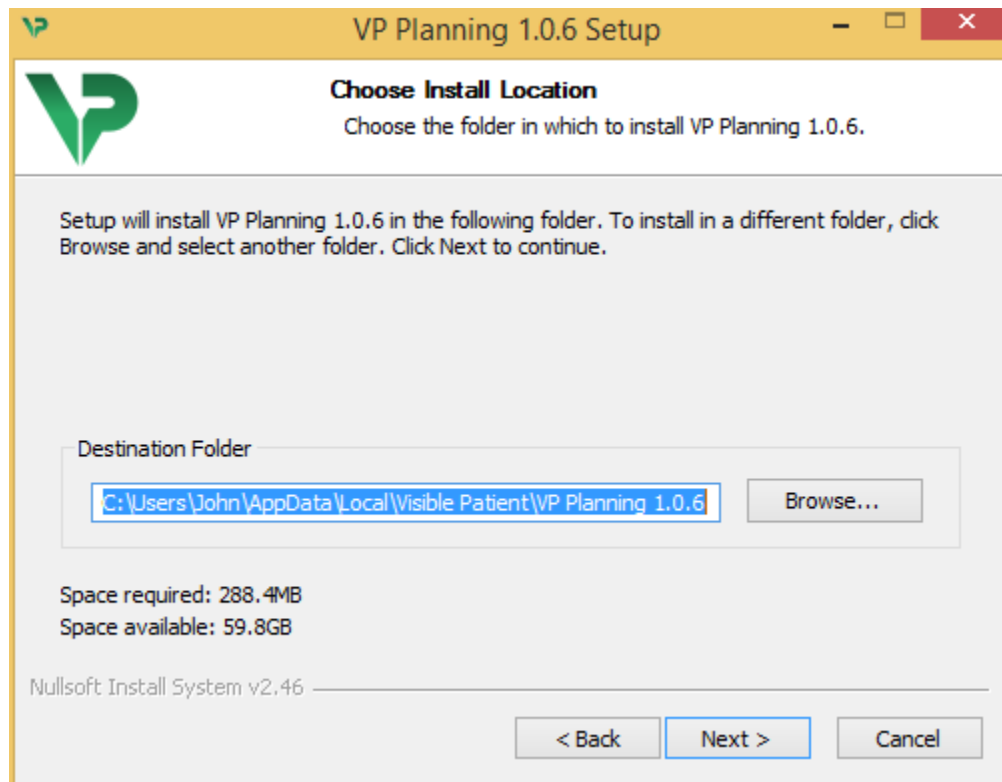

Vous pouvez changer ce dossier de destination en cliquant sur "Parcourir" ("Browse") et en sélectionnant un nouveau dossier de destination. Vous pouvez également en créer un nouveau en cliquant sur "Créer un nouveau dossier" ("Make New Folder").

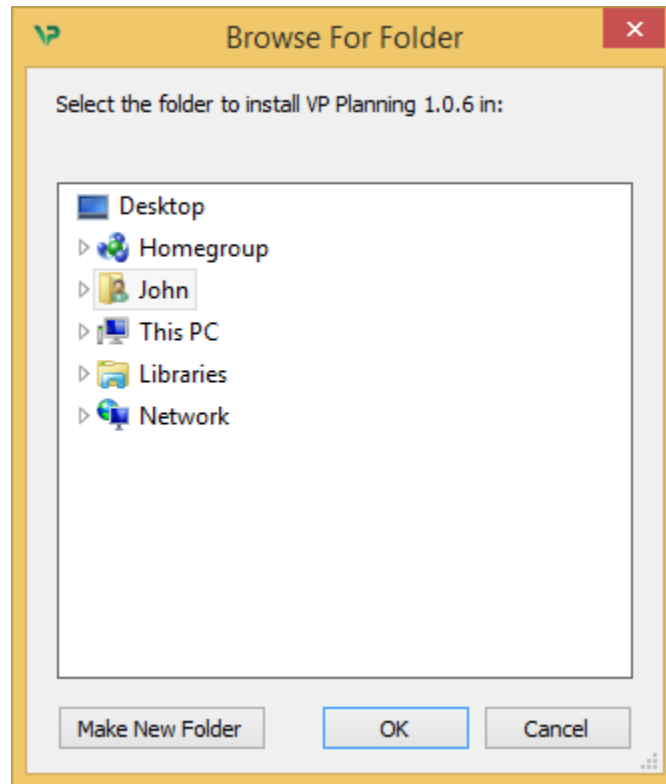


Sélectionnez votre dossier de destination et cliquez sur “Ok”.

Pour continuer l’installation, cliquez sur “Suivant” (“Next”).

Créez un raccourci


Vous pouvez alors décider de créer un raccourci pour un accès plus facile au logiciel. Par défaut, un raccourci sera créé sur le bureau de votre ordinateur, mais vous pouvez choisir un autre emplacement. Vous pouvez également saisir un nom pour créer un nouveau dossier du menu de démarrage ou décider de ne pas créer un raccourci.

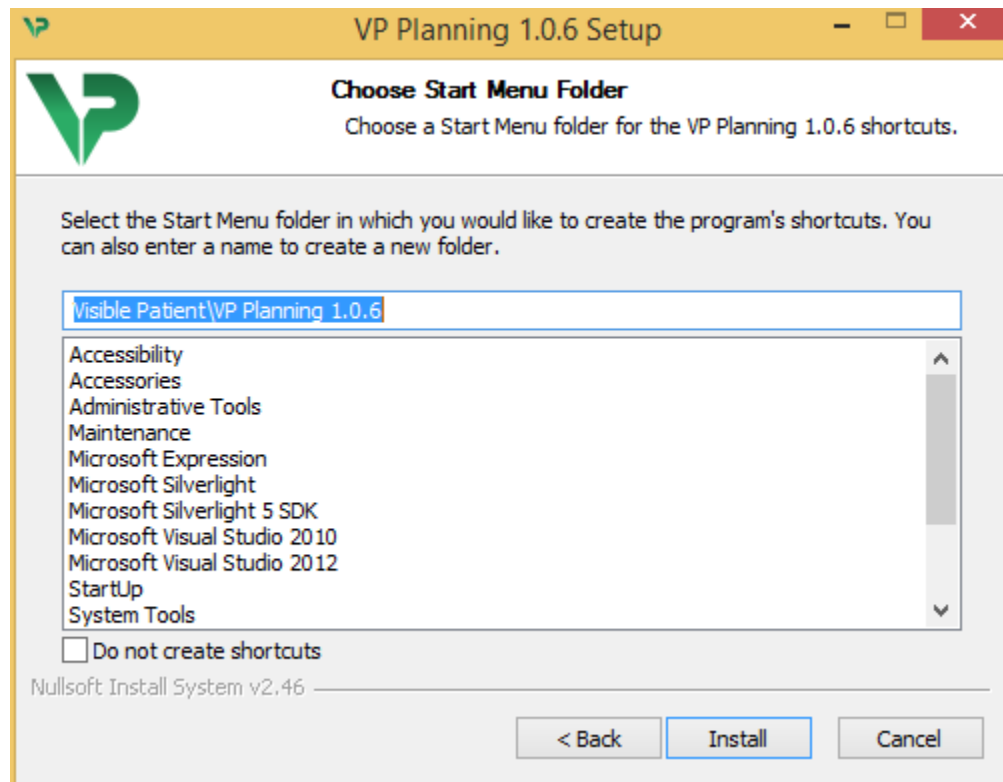


Terminez l'installation

Pour continuer l'installation, cliquez sur "Installer" ("Install").

Le processus d'installation commence.

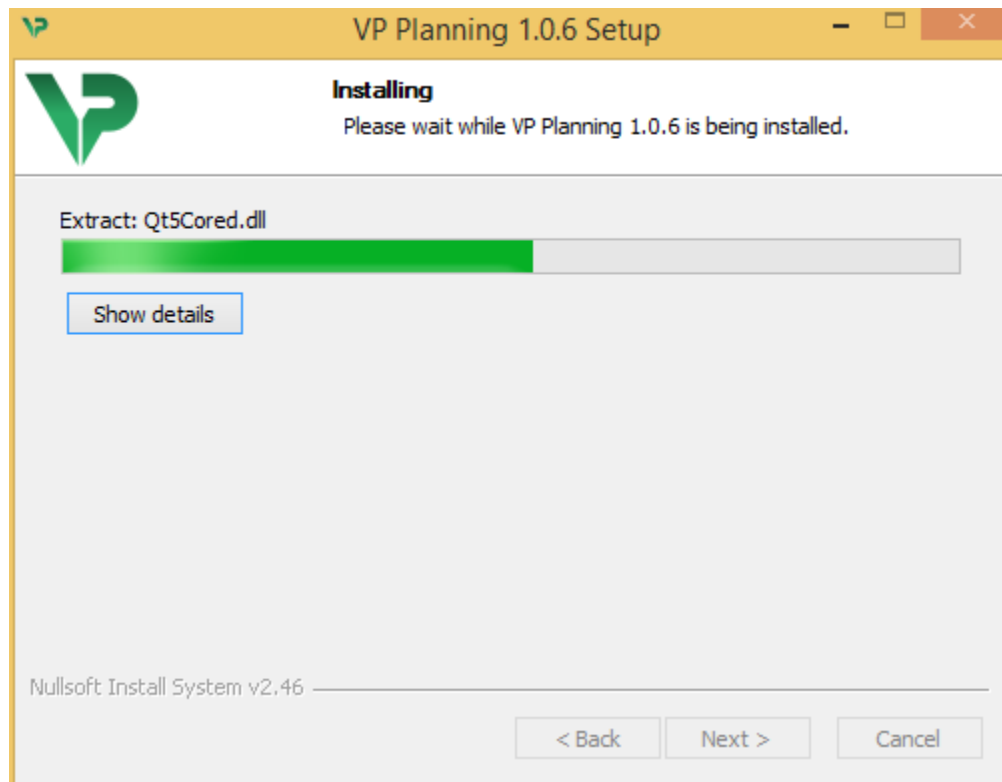

L'installation prend quelques secondes. Lorsque c'est fait, un message indique que l'installation est terminée. Cliquez sur "Terminer" ("Finish") pour fermer la fenêtre de configuration.

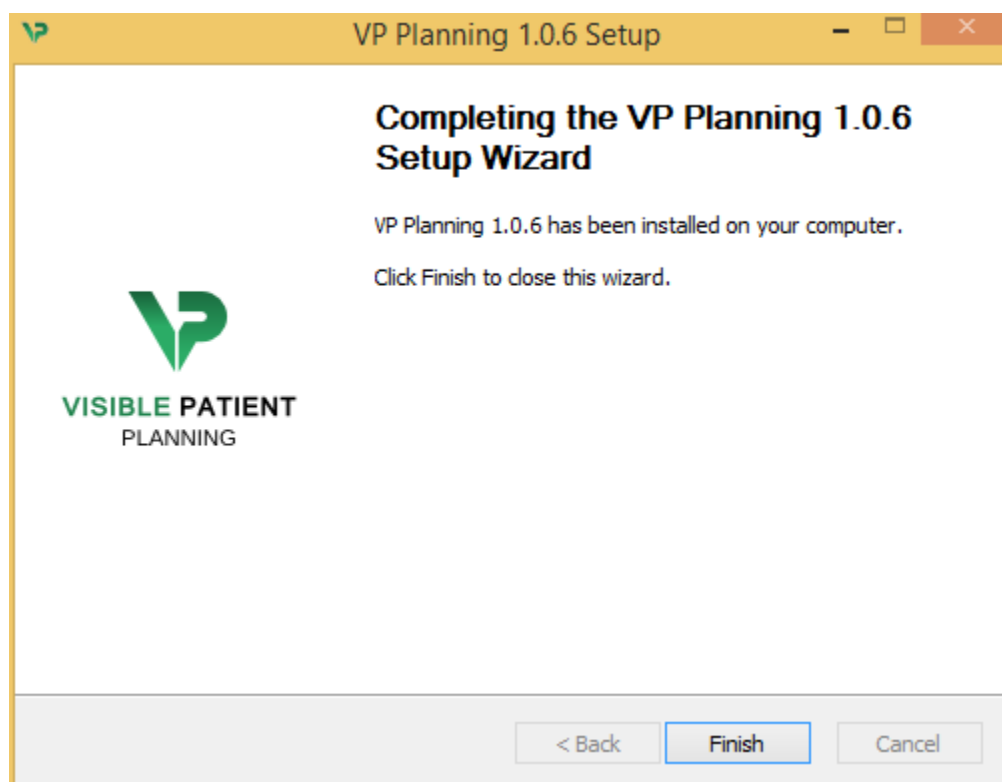

Visible Patient Planning est à présent installé sur votre ordinateur dans le dossier de destination choisi.

Lancez le logiciel

Vous pouvez démarrer Visible Patient Planning en cliquant sur le raccourci créé pendant l'installation (par défaut sur le bureau de votre ordinateur).


Si vous rencontrez un problème lors de l'installation du logiciel, veuillez contacter Visible Patient : support@visiblepatient.com.

5.1.2 Comment installer Visible Patient Planning sous Mac

Démarrez l'installation


Double-cliquez sur le fichier d'installation fourni par Visible Patient.

Une fenêtre d'accord de licence apparaît. Cliquez sur "Accepter" ("Agree") pour continuer l'installation.

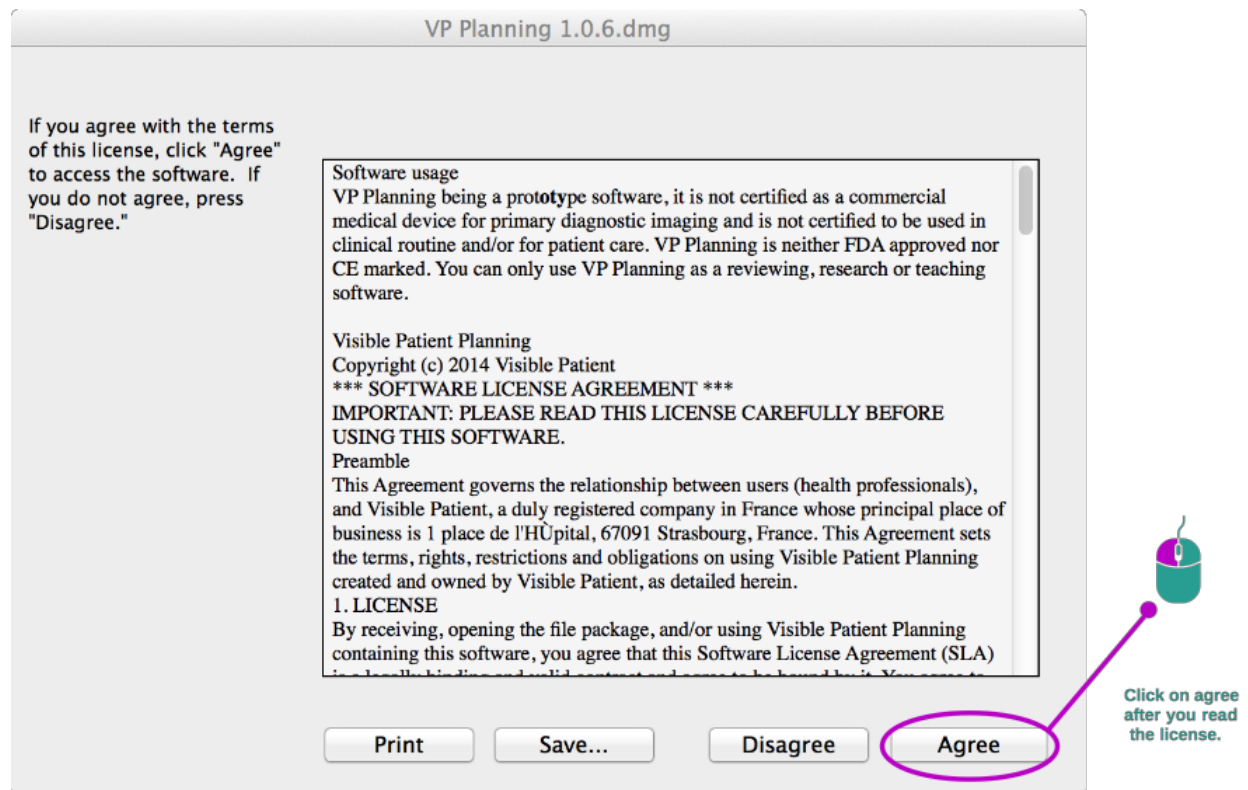

Installez l'application

Sélectionnez et glissez l'application Visible Patient Planning dans le raccourci de l'application.

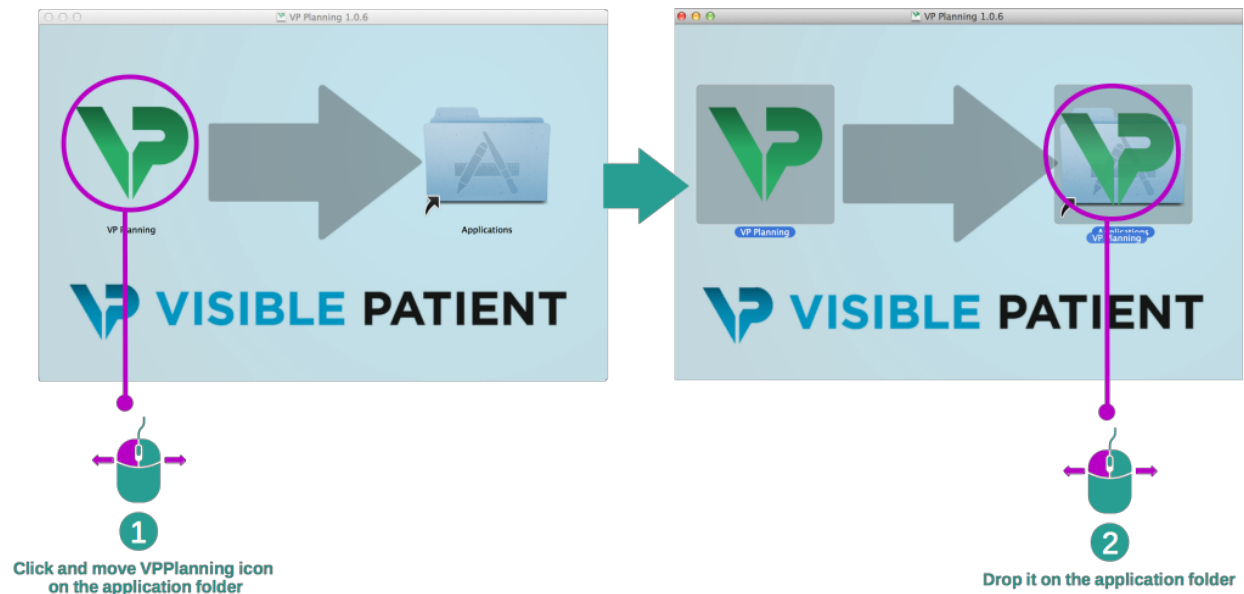

Visible Patient Planning est à présent installé.

Lancez le logiciel

Visible Patient Planning peut être démarré à partir du dossier de l'application en double-cliquant sur l'icône Visible Patient Planning.


Si vous rencontrez un problème lors de l'installation du logiciel, veuillez contacter Visible Patient : support@visiblepatient.com.

6.1 Comment charger des données

Chaque fonction du logiciel est appelée “activité”. Chaque activité est affichée dans un onglet dédié de la fenêtre principale de l’application. L’activité Séries est l’activité principale et est toujours disponible. A partir de cette activité, d’autres activités peuvent être démarrées.

Il y a 2 types de données supportées par la Visible Patient Suite :

- Le VPZ produit par Visible Patient
- Les données DICOM contenant du TDM ou de l’IRM

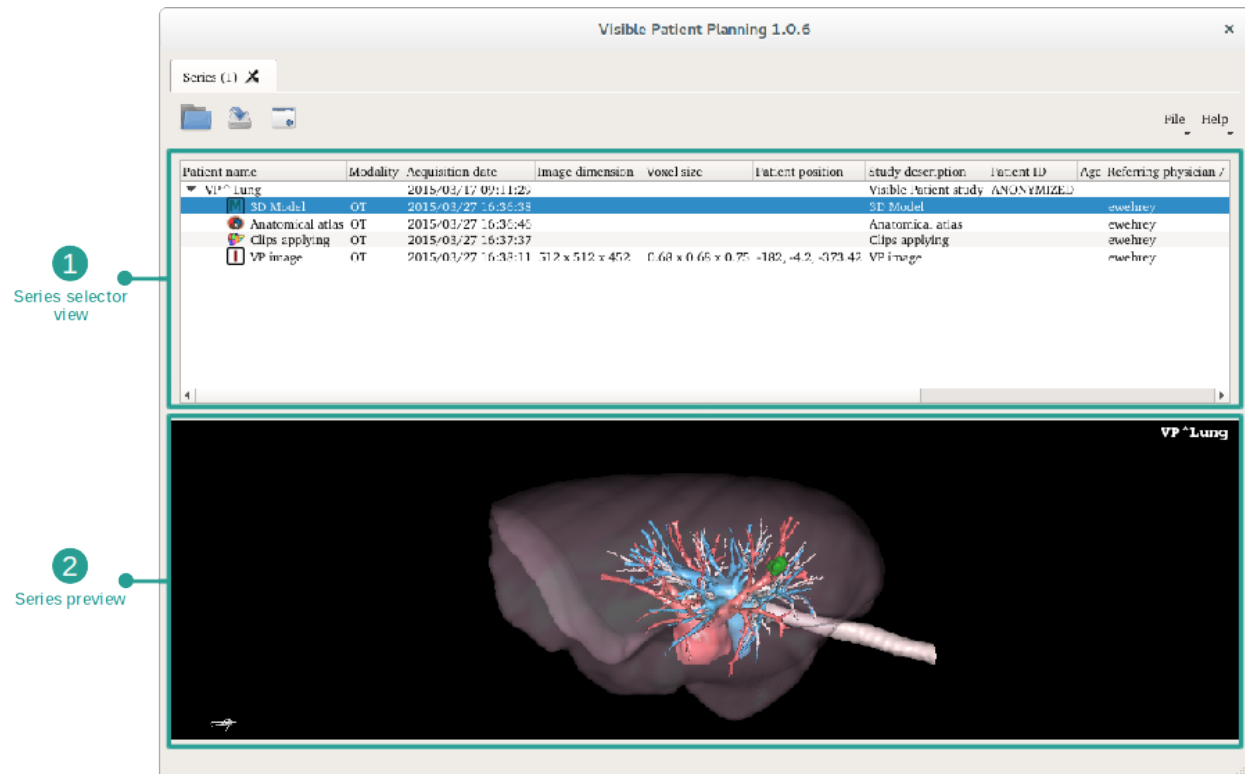

Les données sont divisées en séries qui peuvent être visualisées en utilisant les diverses activités disponibles.


Four types of series are available :

-  “Image series” : série d’images (images médicales)
-  “Model series” : série de modèles (un ensemble de reconstructions 3D)
-  “Anatomical Atlas series” : série d’atlas anatomique
-  “Clip Applying series” : série de pose de clip


Ces séries peuvent ensuite être ouvertes dans les activités suivantes :

- Activité MPR 2D, ouverte avec une Série d’images
- Activité MPR 3D, ouverte avec une Série d’images et une Série de Modèles
- Activité de rendu volumique, ouverte avec une Série d’images et une Série de modèles optionnelle
- Activité de Modèle 3D, ouverte avec une Série d’images
- Activité atlas anatomique, ouverte avec une Série atlas anatomique
- Activité de lecteur DICOM, pas de données d’entrée nécessaires
- Activité Sender, pas de données d’entrée nécessaires

Pour charger un fichier VPZ, cliquez sur “Open” et sélectionnez “VPZ File”. Dans le sélecteur de fichier, sélectionnez un fichier VPZ sur votre ordinateur et cliquez sur “Open”.

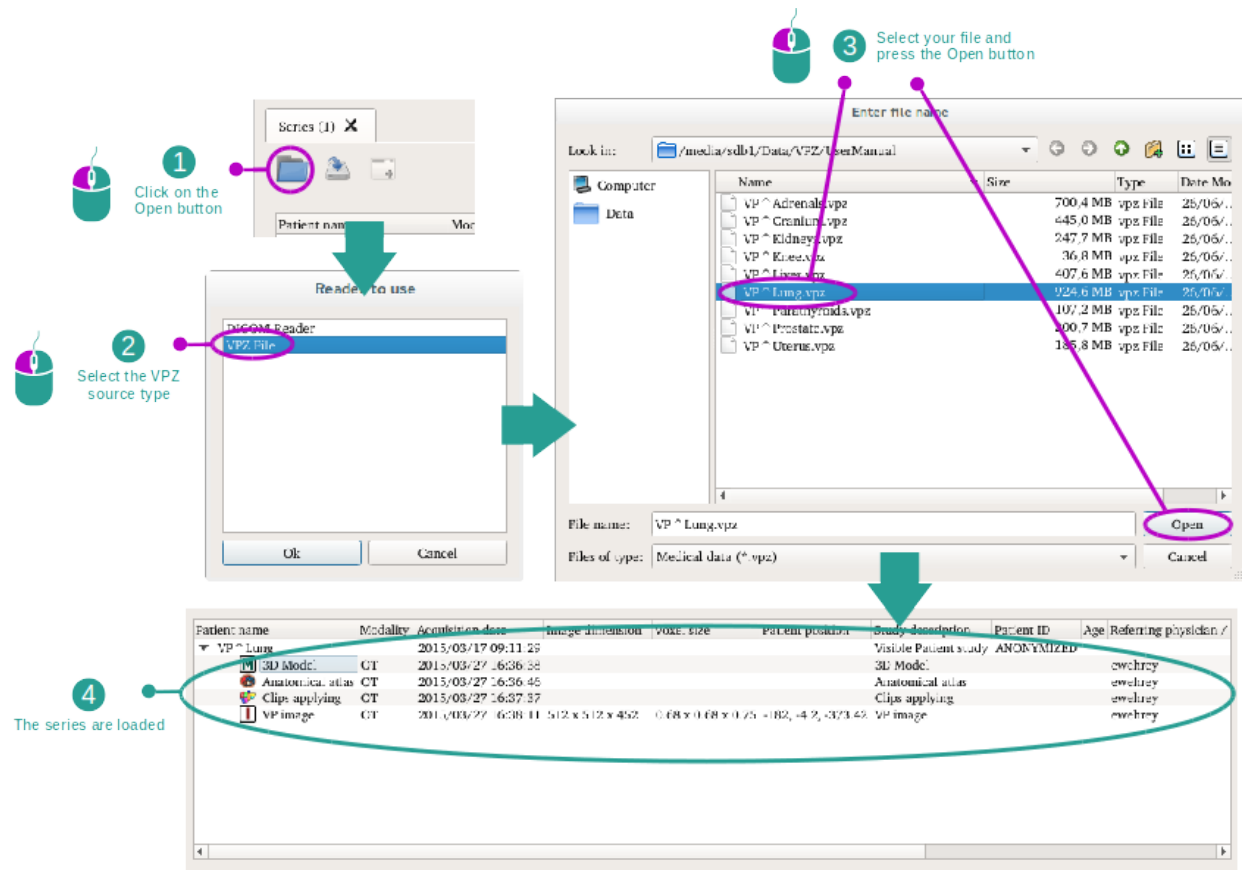

Le principe est le même pour charger des données DICOM.

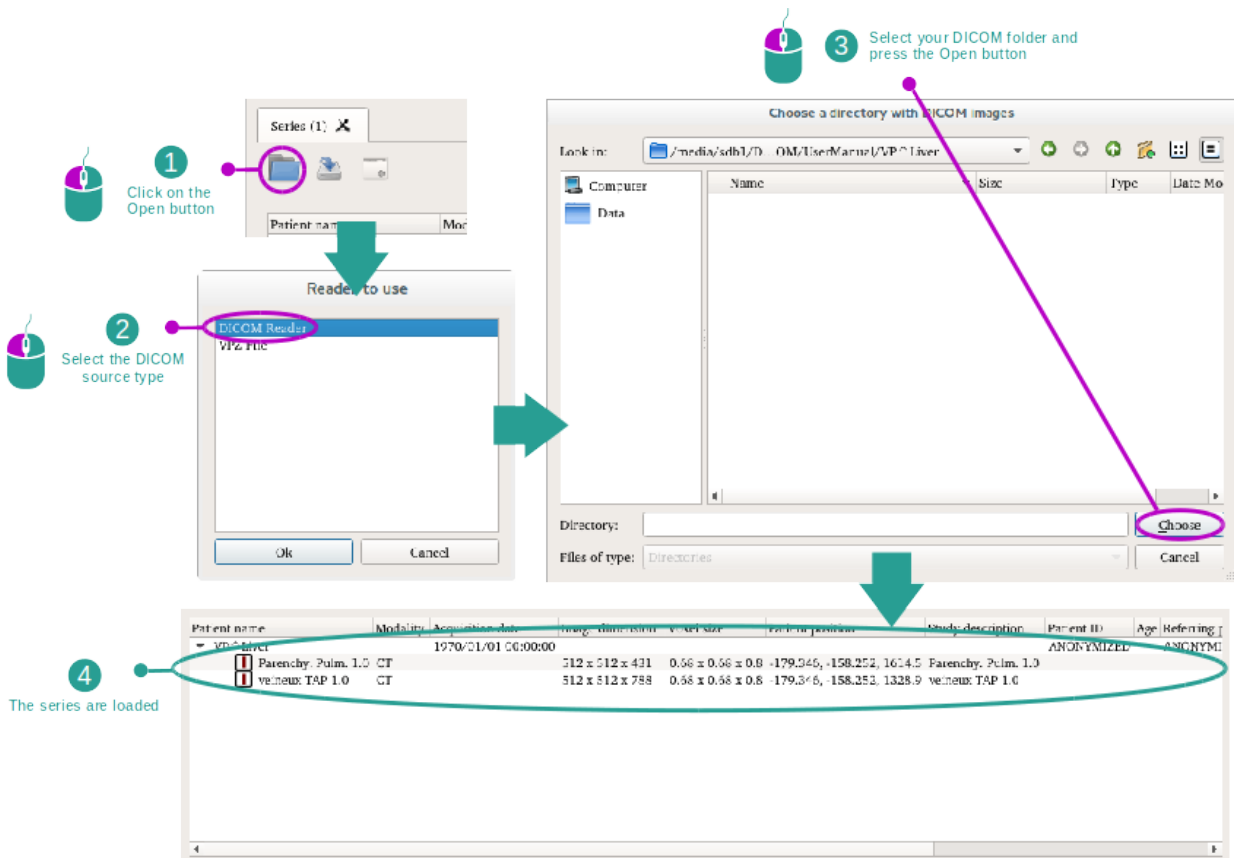


Cliquez sur “Open” et sélectionnez “DICOM Reader”. Dans le sélectionneur de fichier, sélectionnez un dossier contenant des fichiers DICOM et cliquez sur “Choose”.

6.2 Comment visualiser une image

L'activité MPR 2D est dédiée à la visualisation d'images médicales, particulièrement les structures anatomiques. Cela peut se faire en quatre étapes simples. Cette activité sera présentée via la visualisation d'une tumeur hépatique.

Elle inclut des fonctionnalités telles que la mesure de structures anatomiques et la capture d'écran de la vue.


6.2.1 Conditions préalables

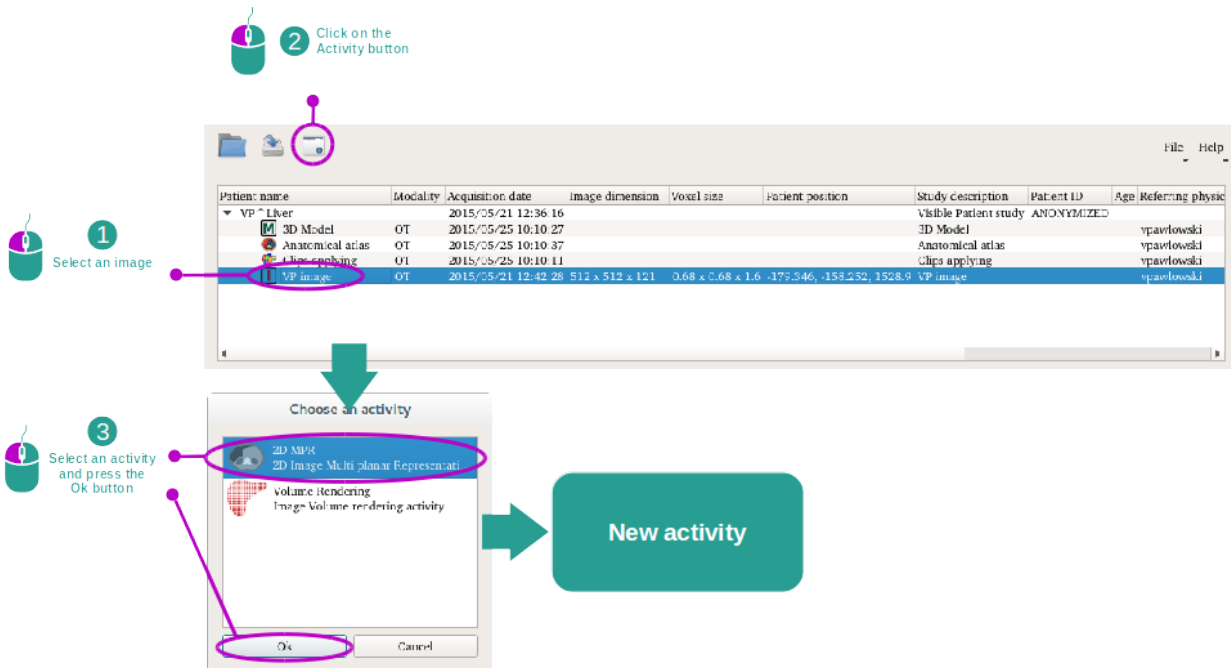

Afin de démarrer l'activité MPR 2D, sélectionnez une série d'images dans l'activité *Séries (Comment charger des données)* et cliquez sur "Launch activity". Sélectionnez "2D MPR" et cliquez sur "OK".

6.2.2 Visualiser l'anatomie du patient


Commençons par une courte description de la structure de l'activité.

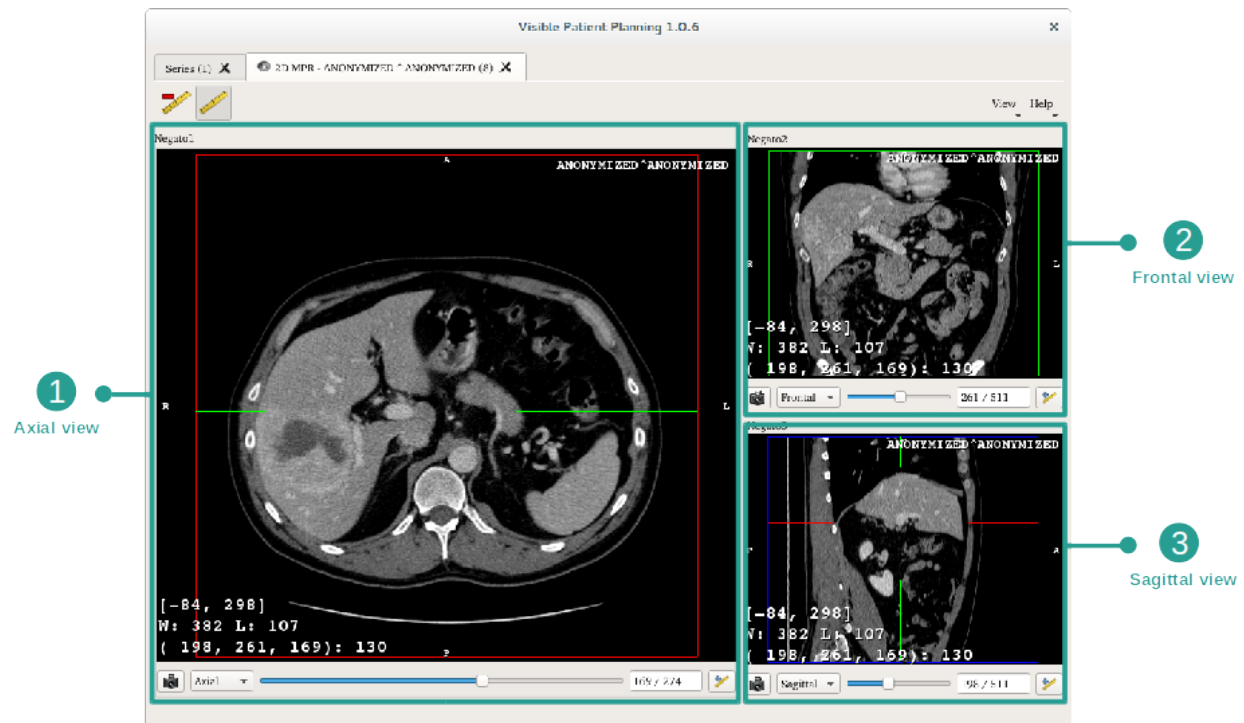

Cette activité se compose de trois vues : une vue principale (vue gauche) représentant une vue axiale de l'image et deux vues secondaires représentant les vues sagittale et frontale.


A titre d'exemple, les étapes suivantes reposeront sur l'analyse de la tumeur hépatique d'un patient.

Etape 1 : naviguer à travers les coupes pour localiser une partie de l'anatomie

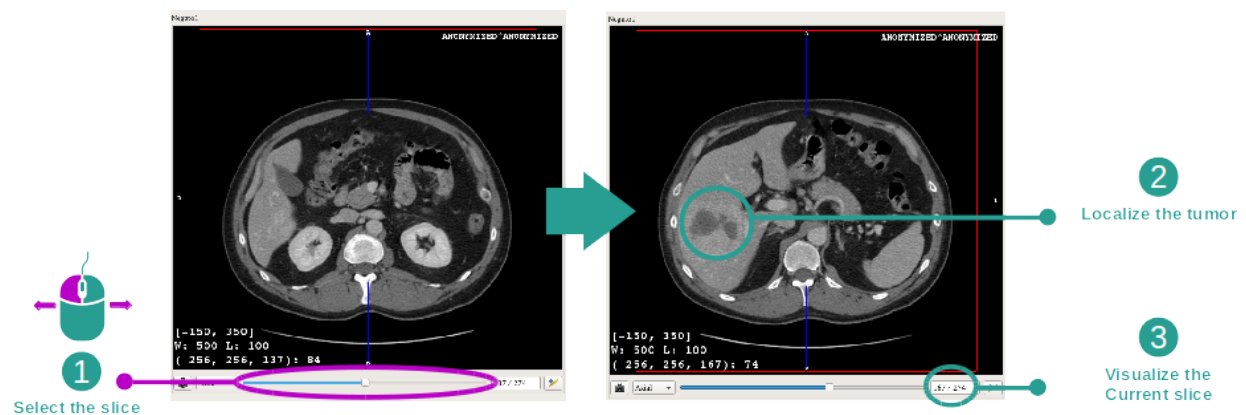


Sous la vue axiale, déplacez la barre coulissante pour naviguer à travers les coupes des images et localisez la tumeur dans le foie. Pour utiliser la barre coulissante, cliquez dessus et déplacez la souris.

Etape 2 : ajuster le fenêtrage

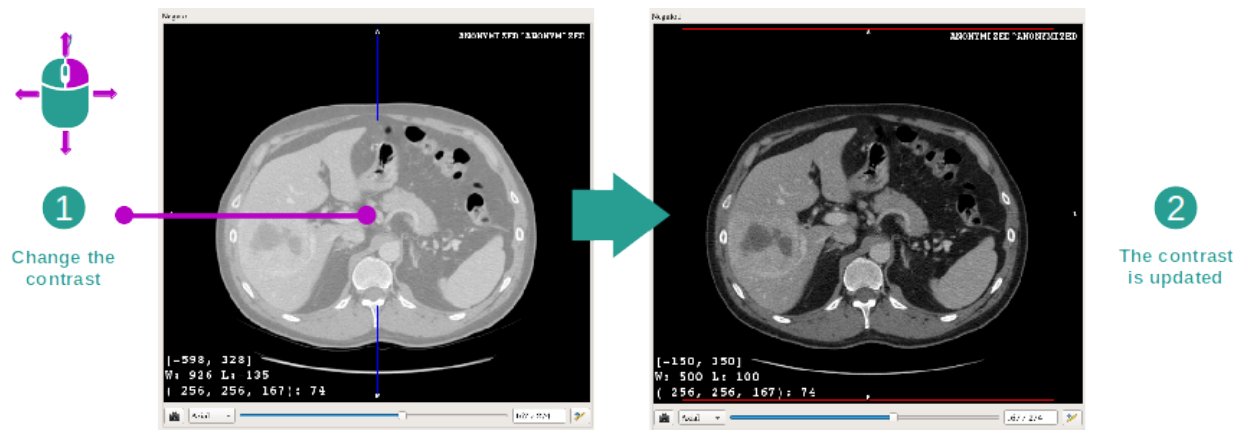


Une fois la tumeur localisée, le fenêtrage peut être modifié en maintenant le bouton droit de la souris enfoncé et en déplaçant le curseur sur l'image.

Etape 3 : cibler une partie anatomique

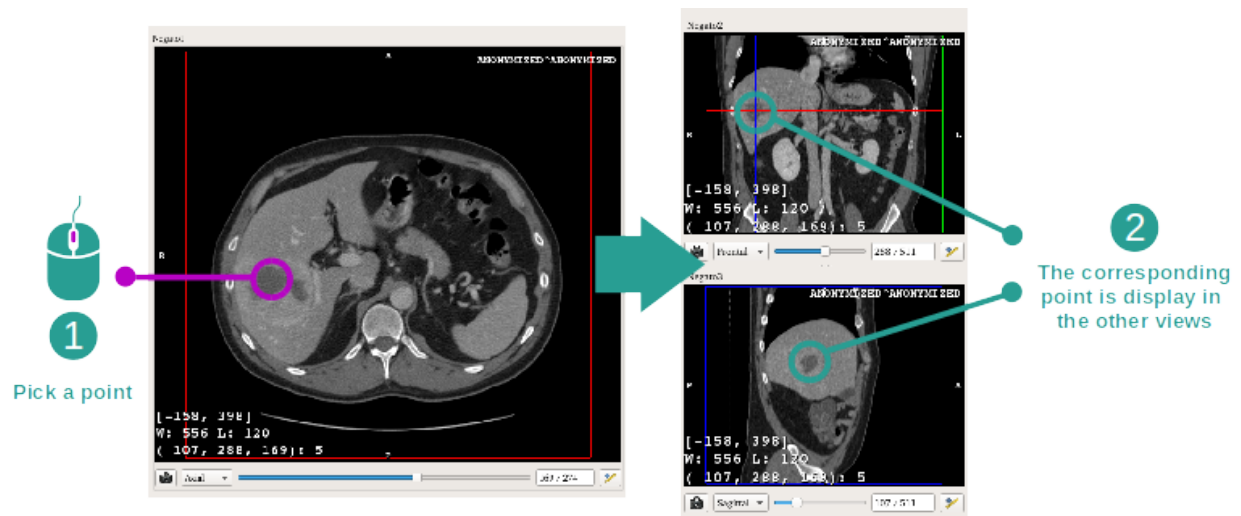

Utilisez le bouton du milieu de la souris pour vous concentrer sur la tumeur hépatique, les trois fenêtres se concentrent sur le point cliqué.


Etape 4 : détailler la région anatomique

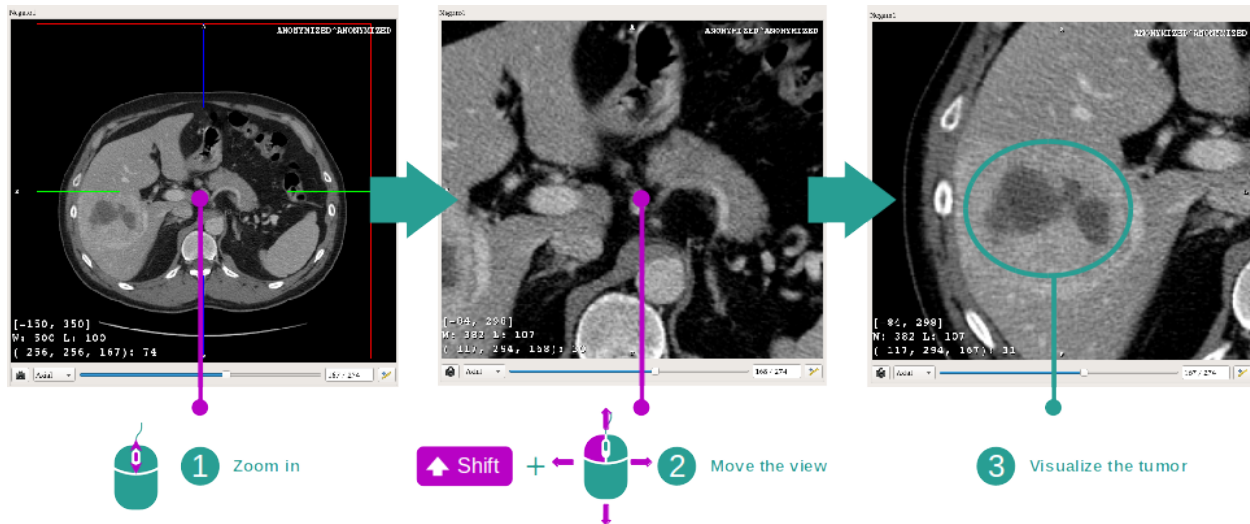


Enfin, vous pouvez améliorer la visualisation de la tumeur en actionnant la molette de la souris pour faire un zoom avant ou arrière et en utilisant la combinaison touche "Majuscule" + clic gauche de souris pour déplacer l'image.

6.2.3 Exemples d'autres structures anatomiques


Le scénario détaillé précédemment peut être appliqué à d'autres structures anatomiques utilisant l'activité MPR 2D. Ci-dessous, plusieurs exemples de structures qui peuvent être visualisées. Cette liste n'est pas exhaustive.

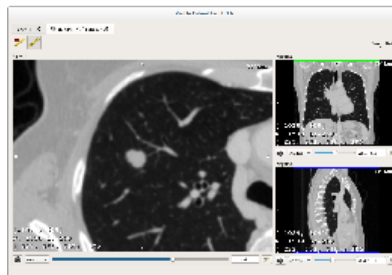


Lung tumor

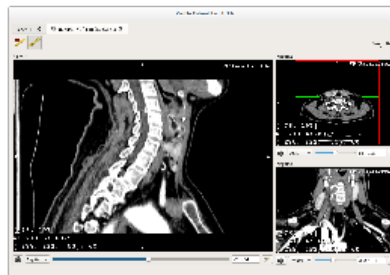


Parathyroids

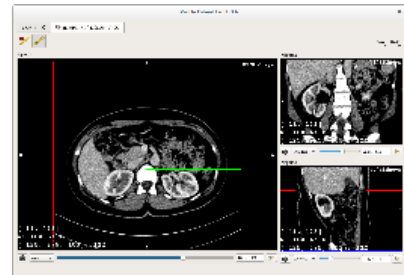


Kidneys

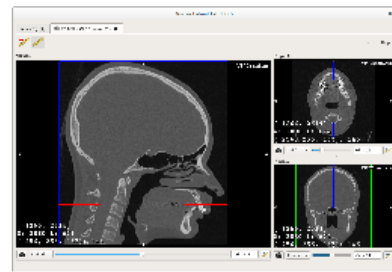


Prognathism

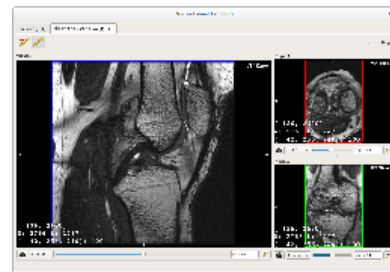


Knee

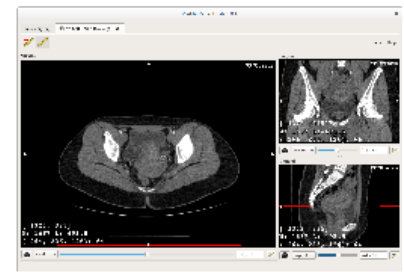


Uterus

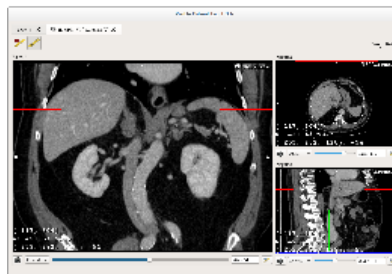

Adrenals

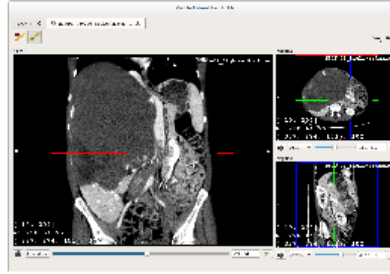

Liver angioma

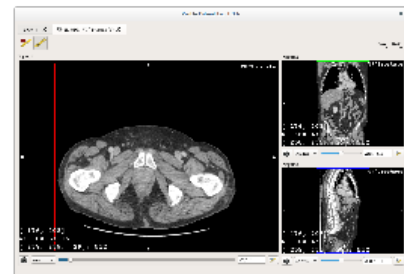


Prostate

6.2.4 Informations complémentaires

Informations complémentaires sur les images

Sur la vue MPR en 2D on trouve de nombreuses informations complémentaires concernant l'image.

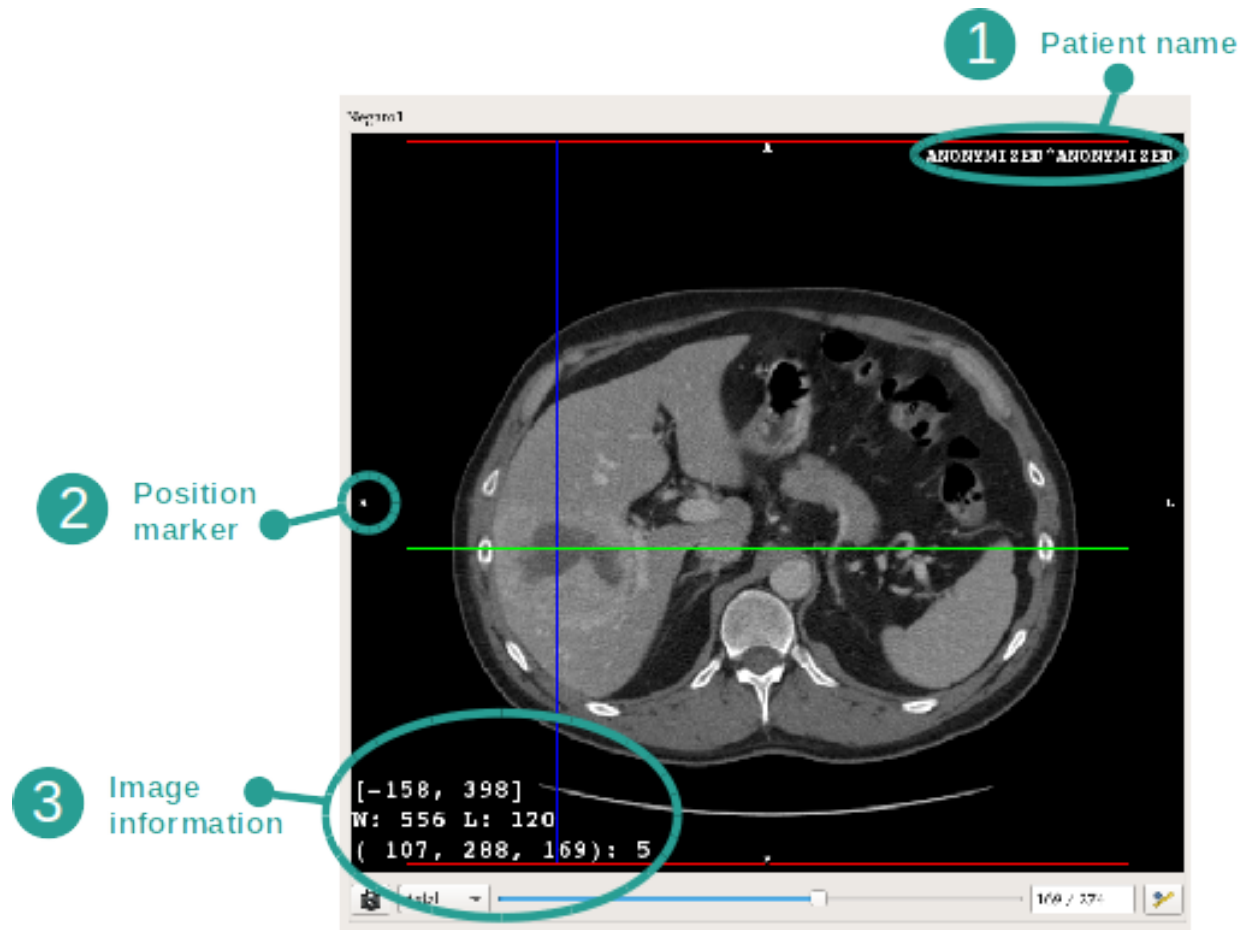

1. Nom du patient


2. **Marqueur de position** (cette information est également affichée sur les bords supérieur, droit, inférieur et gauche de la vue)

- S : Supérieur / I : Inférieur
- A : Antérieur / P : Postérieur
- R : Droite ("Right") / L : Gauche ("Left")

3. **Informations sur l'image** (informations avancées, connaissances en analyse d'images médicales requises)


- Sur la première ligne, amplitude des bords de l'image actuelle
- Puis, la largeur de la fenêtre de l'image actuelle
- La troisième ligne montre les coordonnées et valeurs du dernier pixel sélectionné (en utilisant le clic central de la souris sur l'image).

Prendre une mesure

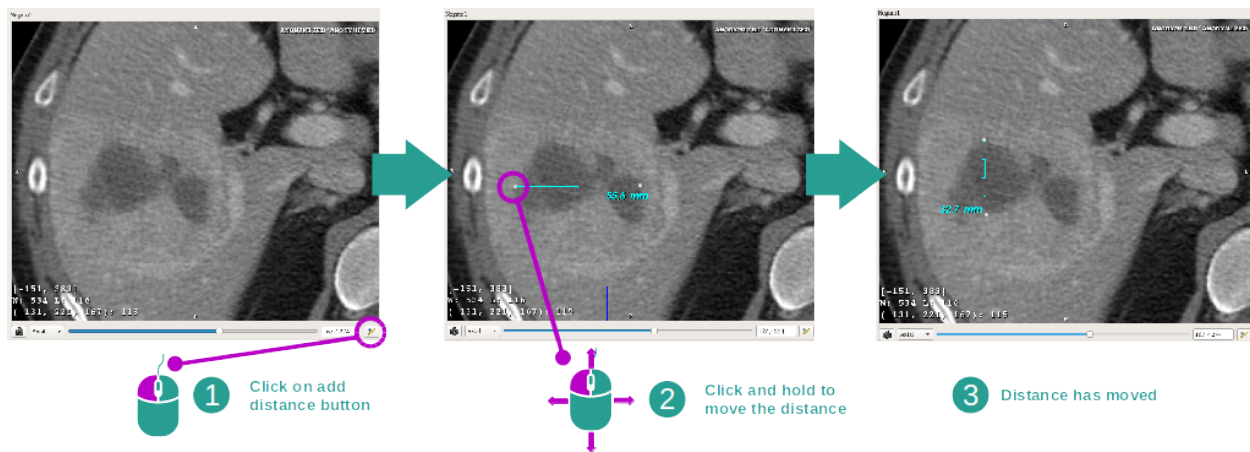


Les structures anatomiques peuvent être mesurées en utilisant les outils de distance. Pour ce faire, cliquez en premier sur “Add distance”, puis déplacez la distance avec les repères délimitant les extrémités de la mesure.


Vous pouvez cacher la distance affichée :

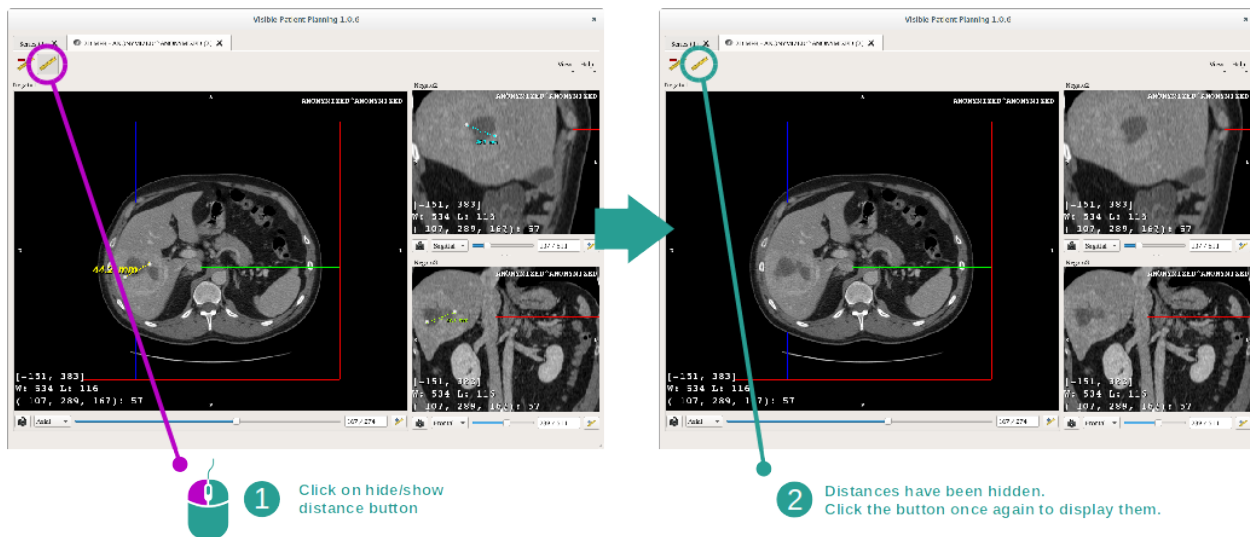

Et également supprimer une distance :

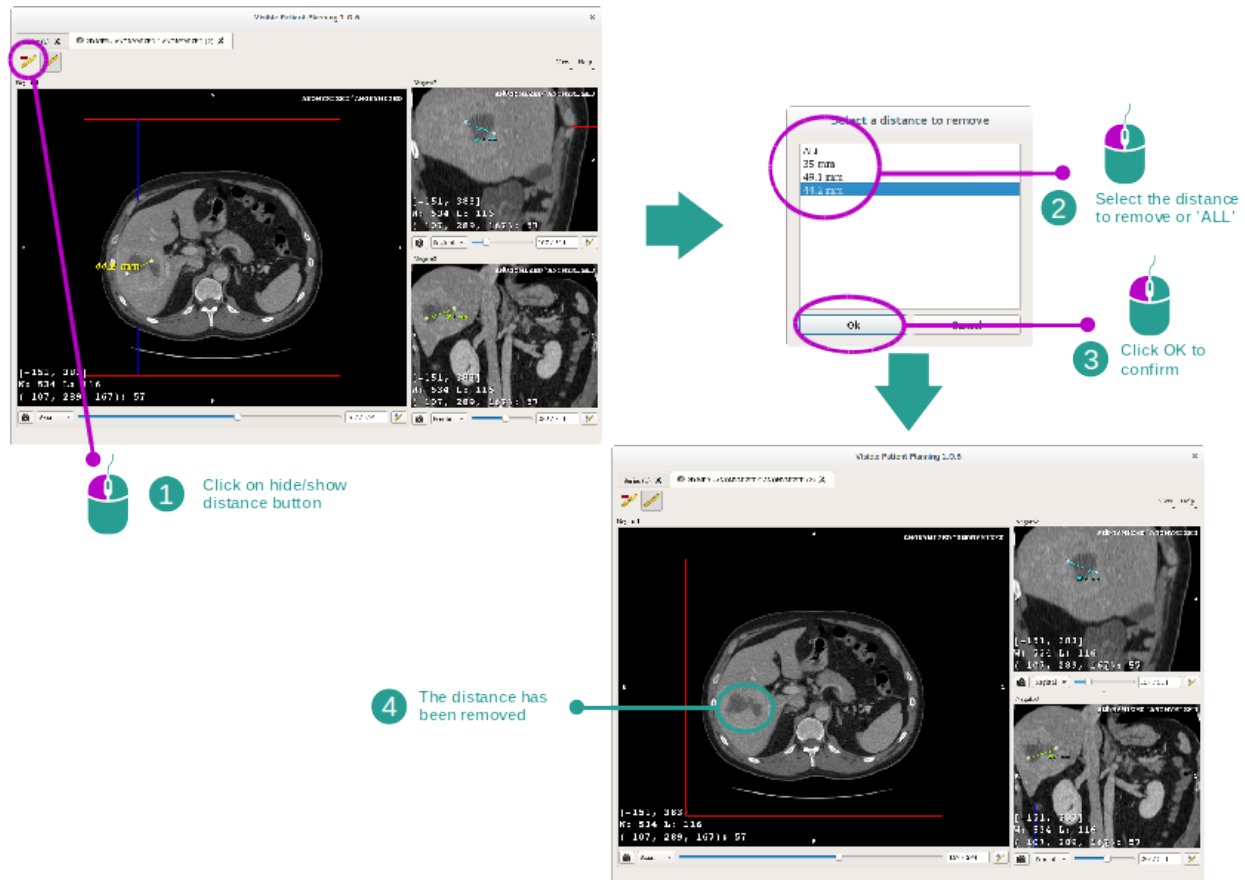


Changer l'orientation de l'image dans la vue centrale

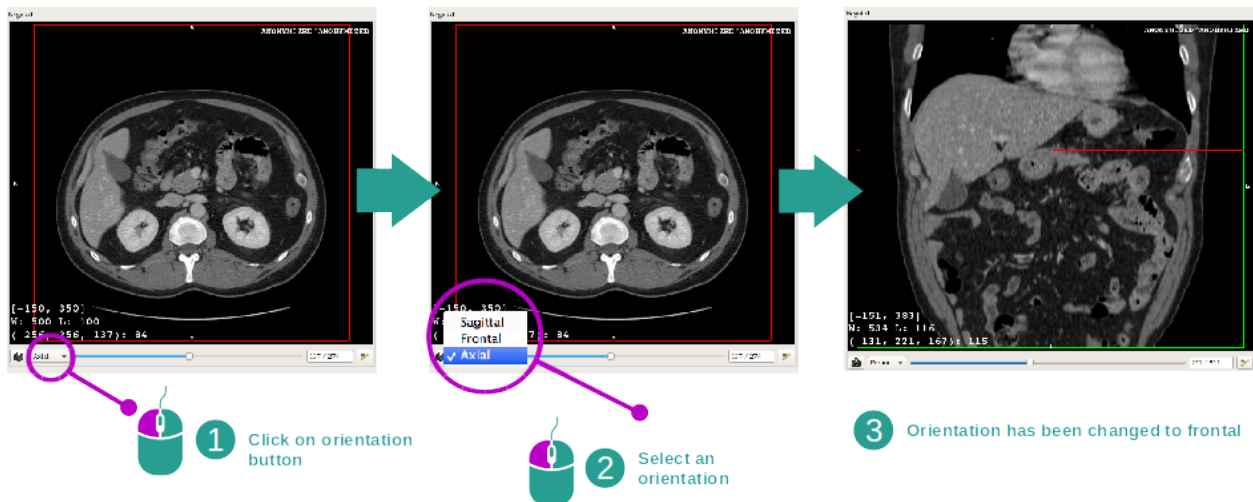


L'orientation de la vue centrale peut être changée en sélectionnant l'orientation souhaitée dans le menu dédié. Une fois l'orientation de la vue principale modifiée, les autres vues adaptent leur orientation afin d'afficher tous les axes en même temps.

Sauvegarder une capture d'écran

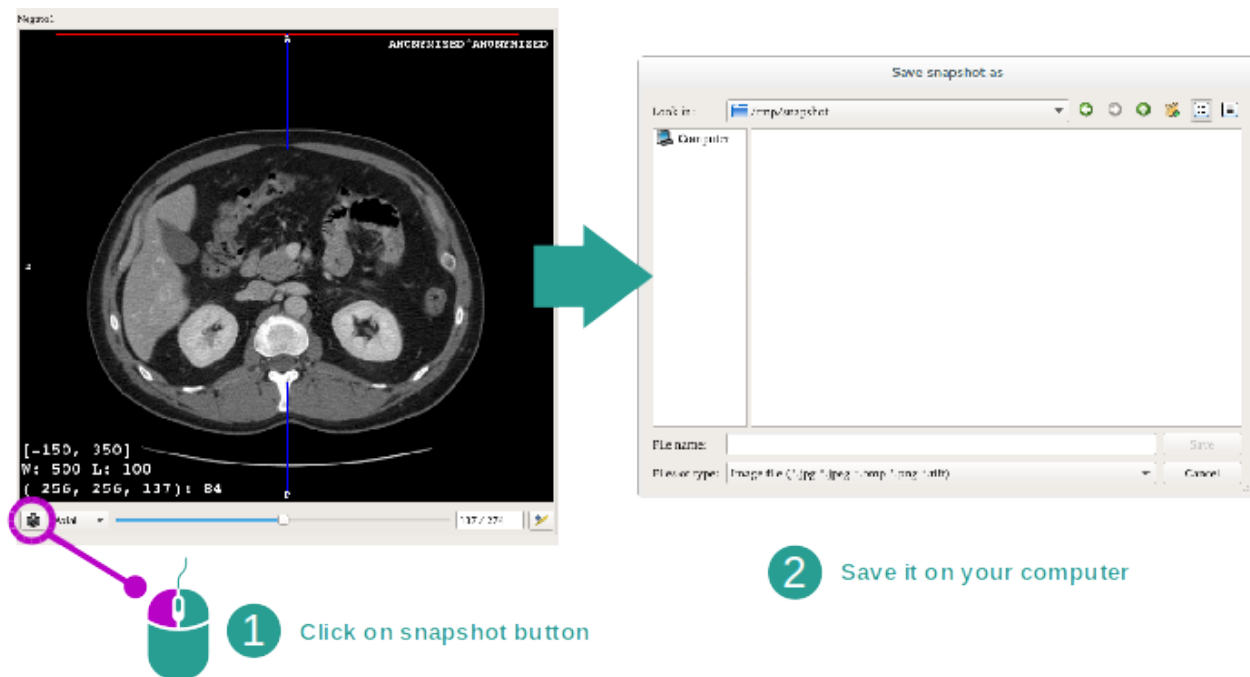

Pour sauvegarder la vue actuelle en tant qu'image, utilisez le bouton de capture d'écran.

Obtenir la valeur physique d'un voxel

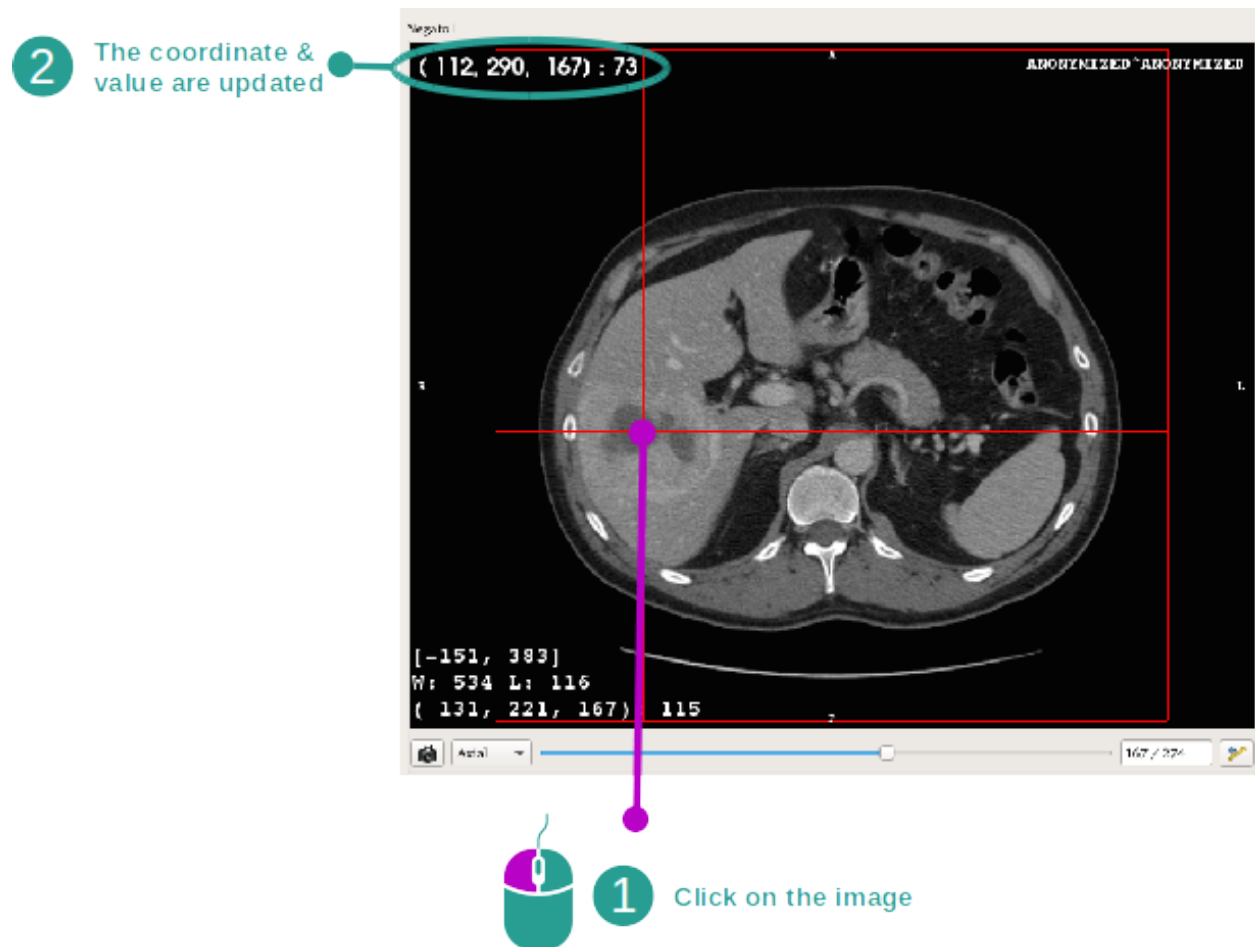

Un clic gauche de souris sur l'image affiche les coordonnées et la valeur du voxel situé sous le curseur de la souris. L'unité de cette valeur dépend du type d'image.

6.3 Comment visualiser un modèle 3D


L'objectif principal de l'activité modèle 3D est de visualiser et d'interagir avec votre modèle 3D.

6.3.1 Conditions préalables


Pour démarrer une activité modèle 3D, une série de modèles est nécessaire. Sélectionnez la dans l'activité Séries (*Comment charger des données*) et cliquez sur "Launch activity" pour lancer l'activité, ou double-cliquez sur la série.

6.3.2 Visualiser l'anatomie du patient

Familiarisons-nous avec la structure de l'activité. Il y a une vue principale dans l'activité modèle 3D.

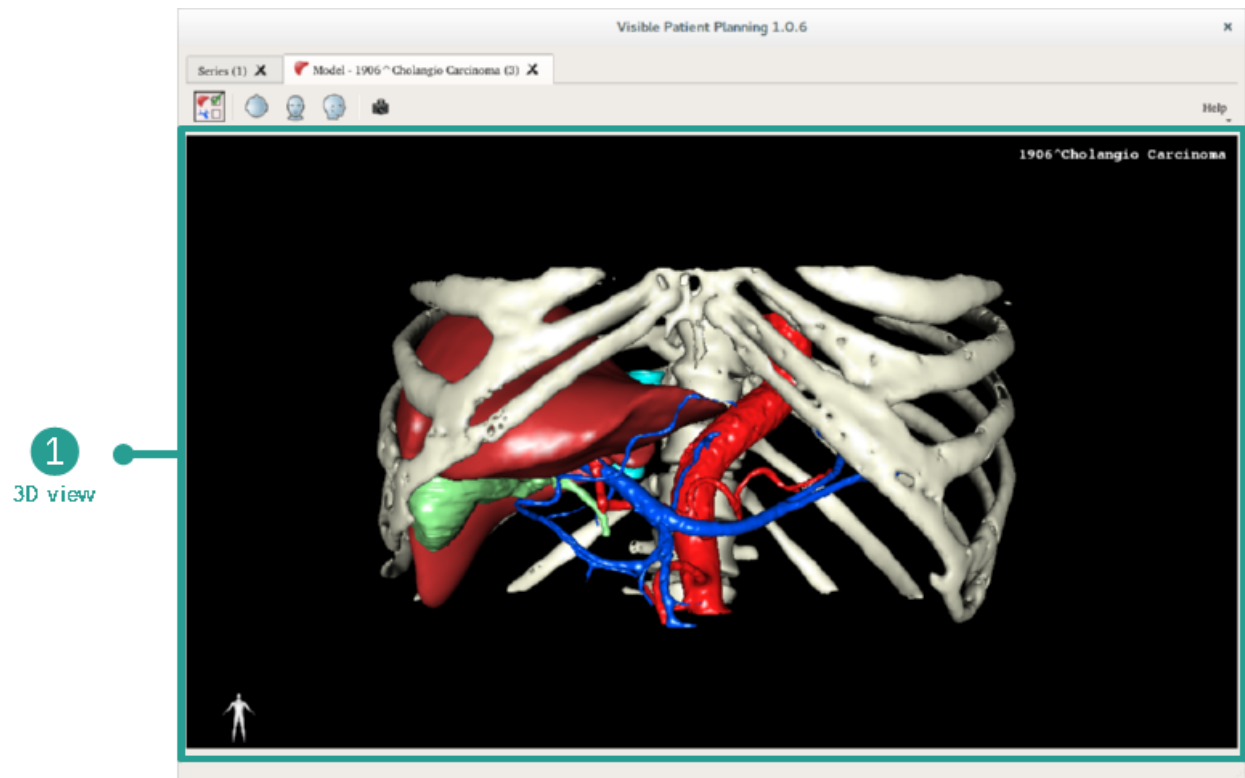


Dans cette vue 3D, et grâce au gestionnaire d'organes, vous pouvez effectuer plusieurs interactions avec votre modèle.

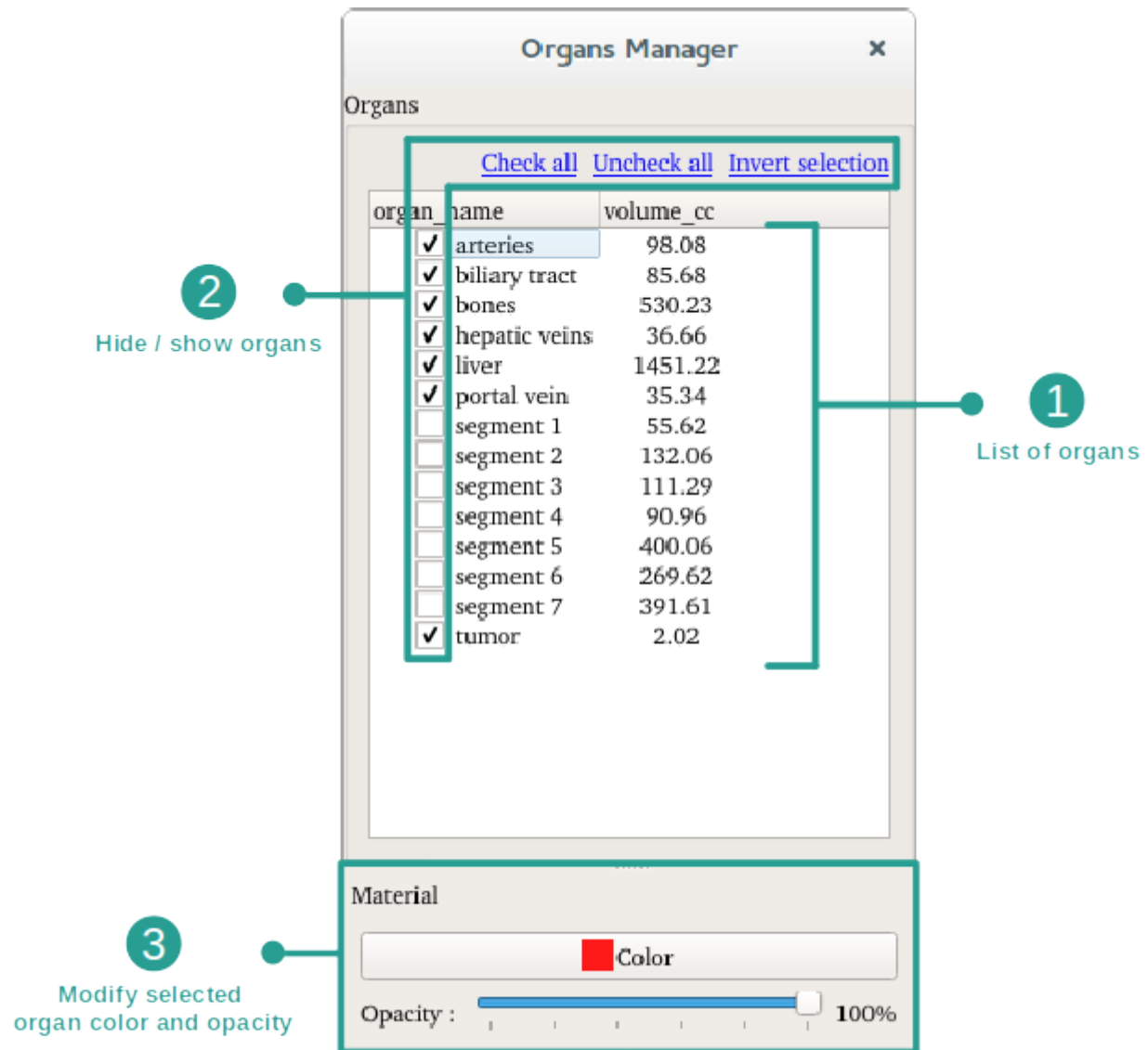

Le gestionnaire d'organes dresse la liste de tous les organes présents dans le modèle 3D. Il permet de cacher/afficher les organes du modèle et de changer leur apparence en modifiant leur couleur et leur opacité. Le gestionnaire d'organes donne également des informations sur le volume des organes.


A titre d'exemple, les étapes suivantes reposeront sur l'analyse de la tumeur hépatique d'un patient.

Etape 1 : cacher des organes pour visualiser une zone anatomique

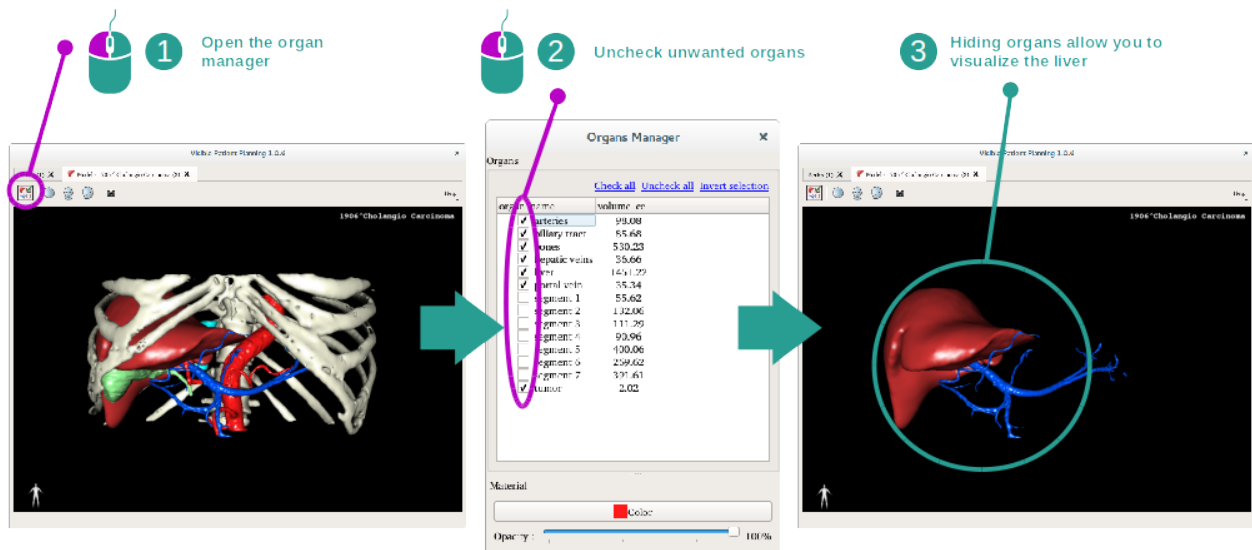

Certains organes peuvent obstruer la visualisation de parties anatomiques. Par le gestionnaire d'organes, ces organes peuvent être cachés. Pour ce faire, ouvrez le gestionnaire d'organes et décochez l'organe que vous souhaitez cacher. Vous pouvez ensuite l'afficher à nouveau en cochant la case de l'organe.

Etape 2 : modifier l'opacité d'un organe

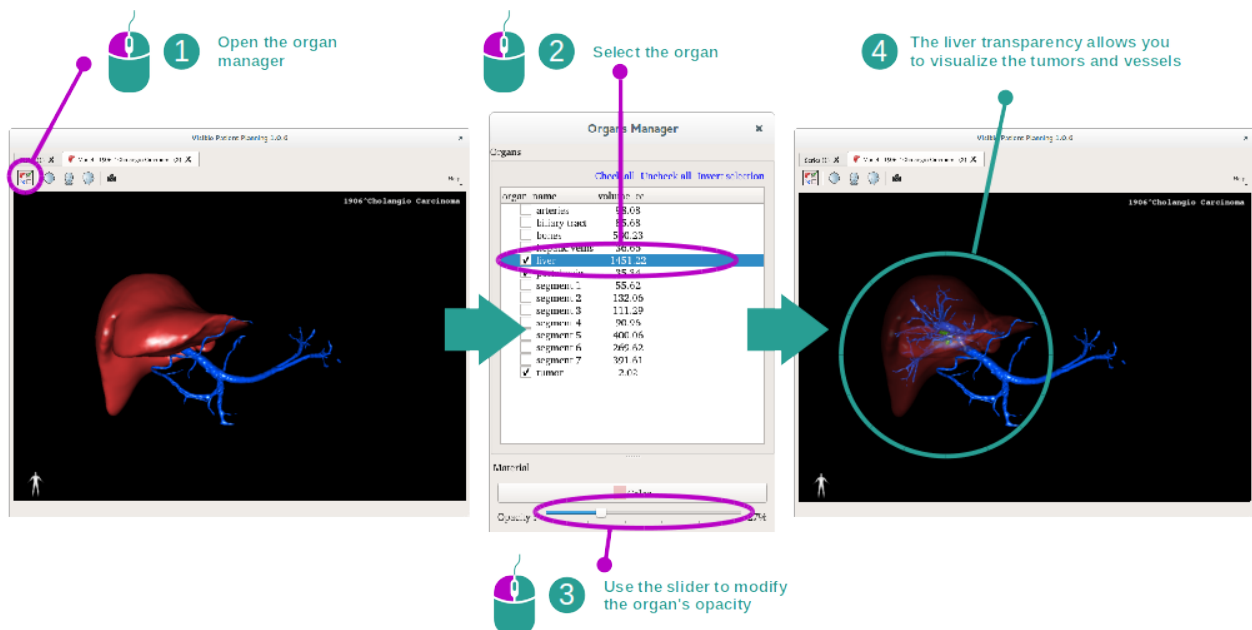


Vous souhaitez certainement visualiser également la partie interne de l'organe. Le gestionnaire d'organes permet de modifier l'opacité d'un organe.

Pour ce faire, ouvrez le gestionnaire d'organes, sélectionnez l'organe désiré et modifiez l'opacité avec la barre coulissante sous le gestionnaire d'organes.


Etape 3 : détailler la zone anatomique

L'activité modèle 3D vous permet d'interagir avec votre modèle.


Vous pouvez faire tourner votre modèle en cliquant et en maintenant le clic gauche de souris enfoncé tout en déplaçant le curseur.

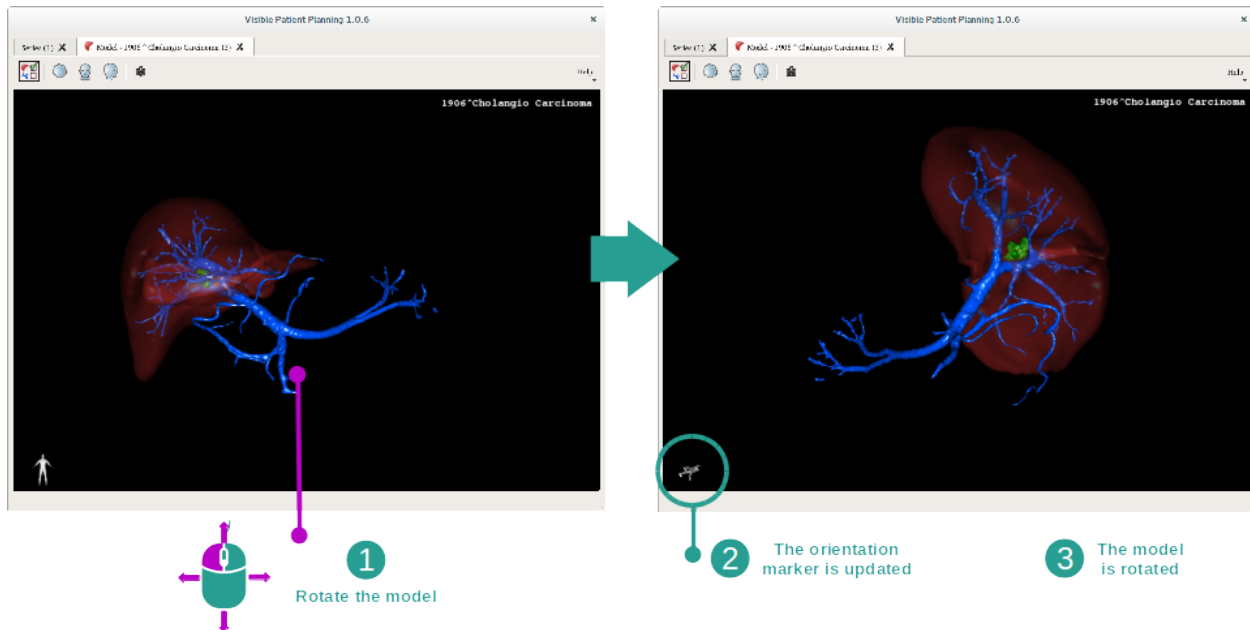

Vous pouvez faire un zoom avant ou arrière avec la molette de la souris.

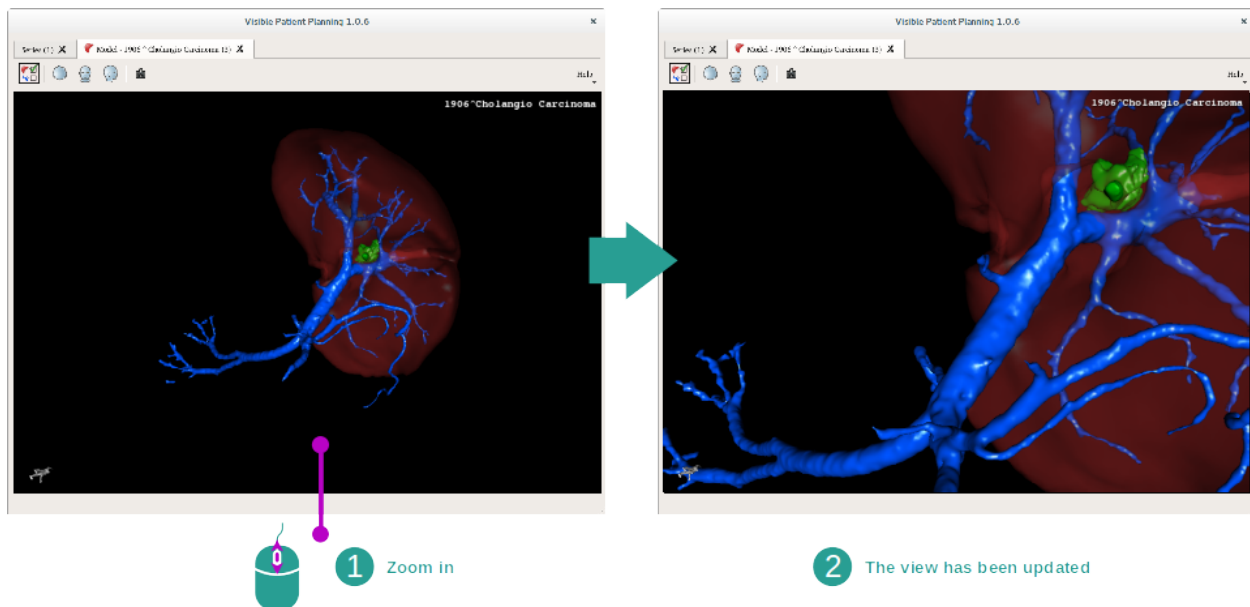


Enfin, vous pouvez déplacer votre modèle en cliquant et en maintenant le bouton du milieu de la souris enfoncé tout en déplaçant le curseur.

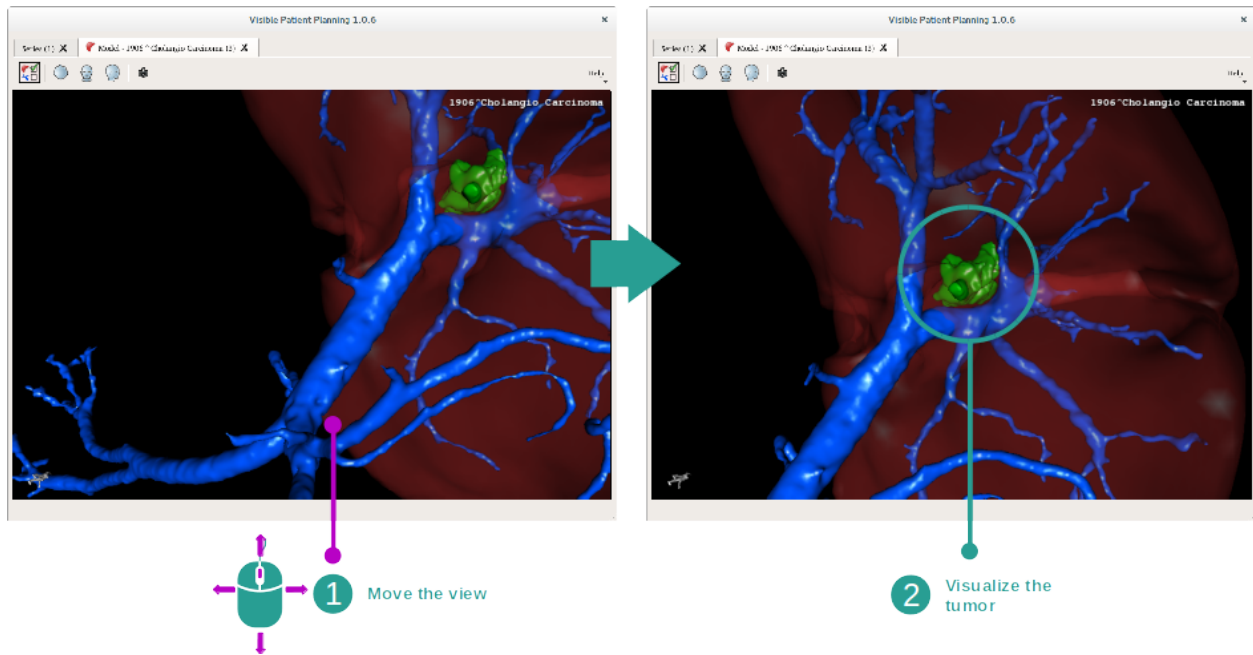

6.3.3 Exemples d'autres structures anatomiques


Le scénario détaillé précédemment peut s'appliquer à d'autres structures anatomiques en utilisant l'activité Modèle 3D. La section suivante dresse la liste de plusieurs exemples de structures qui peuvent être visualisées. Cette liste n'est pas exhaustive.

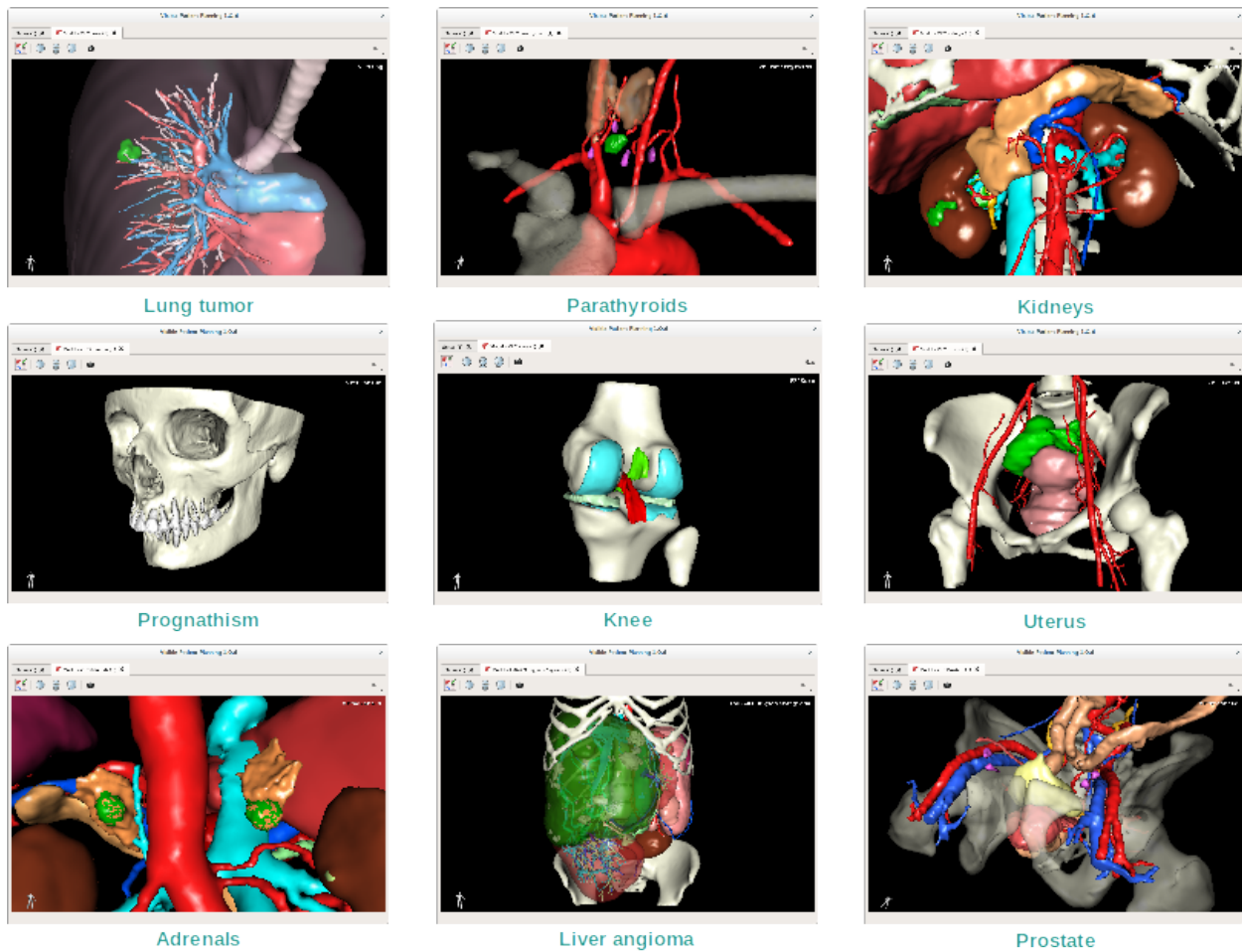


6.3.4 Informations complémentaires

Informations complémentaires sur les images

L'activité Modèle 3D affiche le nom du patient et un marqueur d'orientation sur la vue 3D.

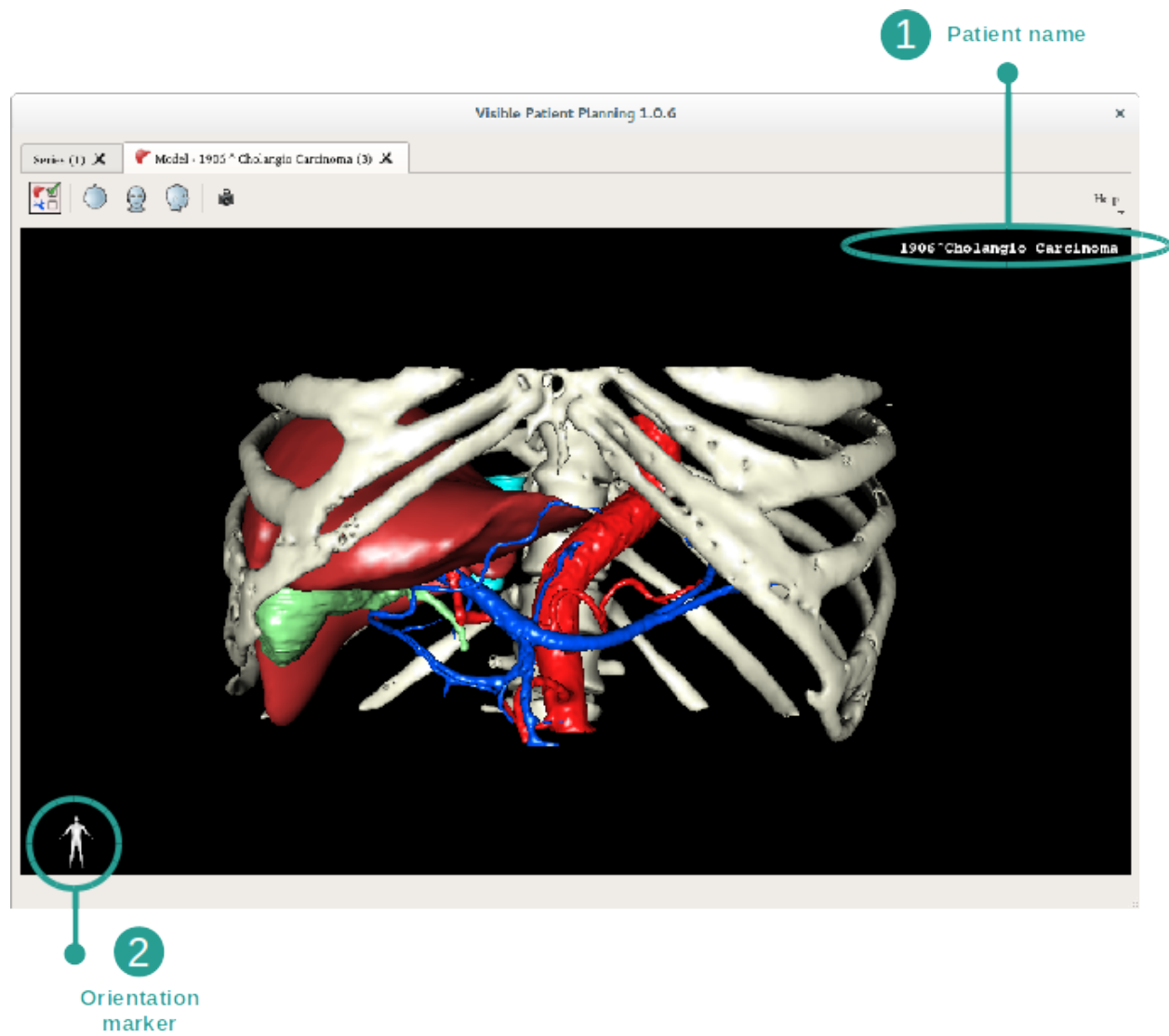


Réinitialiser la vue

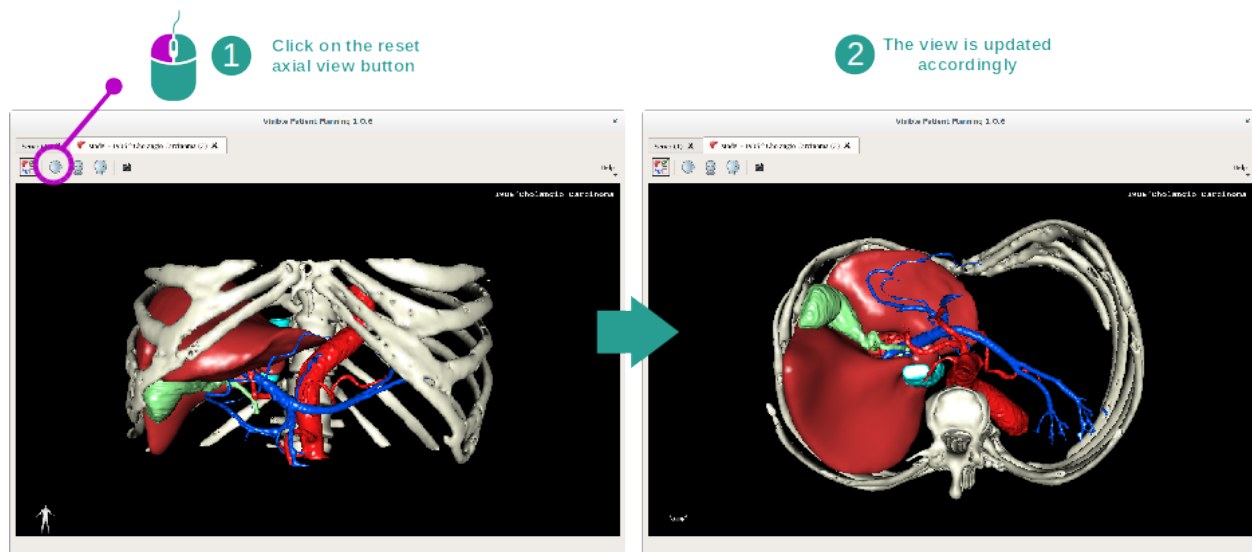

A tout moment, vous pouvez réinitialiser la vue grâce à l'un des trois boutons de réinitialisation situés au-dessus de la vue principale. Ces boutons permettent de retrouver la vue axiale, frontale ou sagittale.

Sauvegarder une capture d'écran

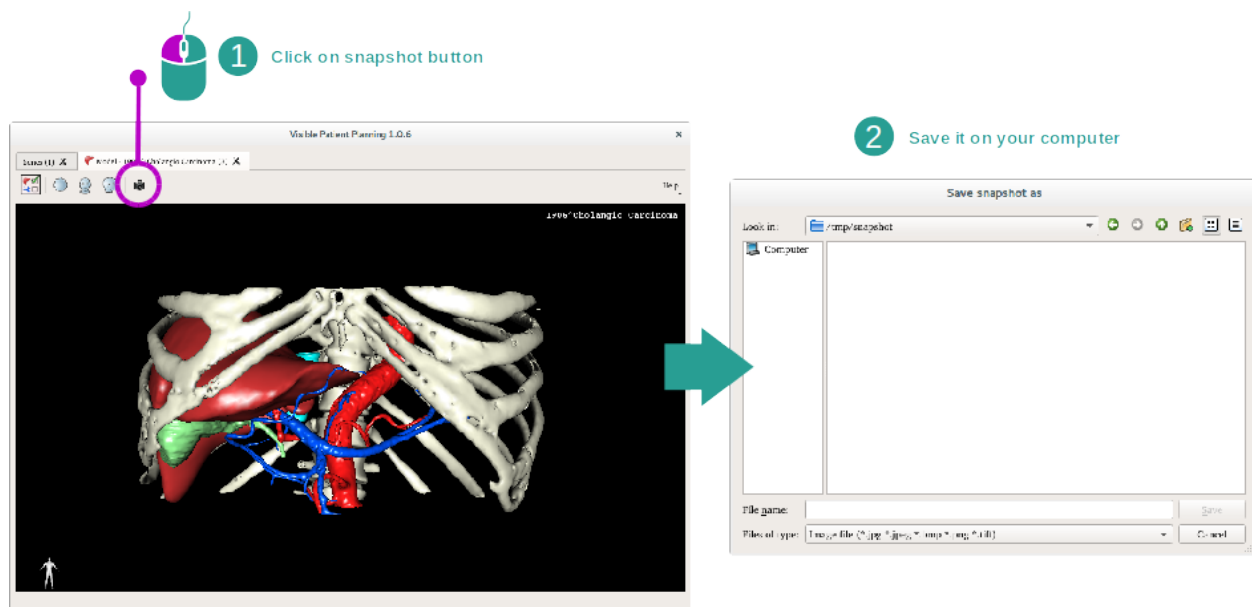


Si vous souhaitez sauvegarder la vue actuelle en tant qu'image, utilisez le bouton capture d'écran.

6.4 Comment visualiser une image avec un modèle 3D

L'activité MPR 3D est dédiée à la visualisation d'images médicales et de modèles 3D. L'objectif principal de cette activité est de visualiser vos modèles 3D avec leurs images médicales correspondantes.

Cette activité inclut des fonctionnalités telles que la mesure de structures anatomiques et la sauvegarde de captures d'écran.

6.4.1 Conditions préalables

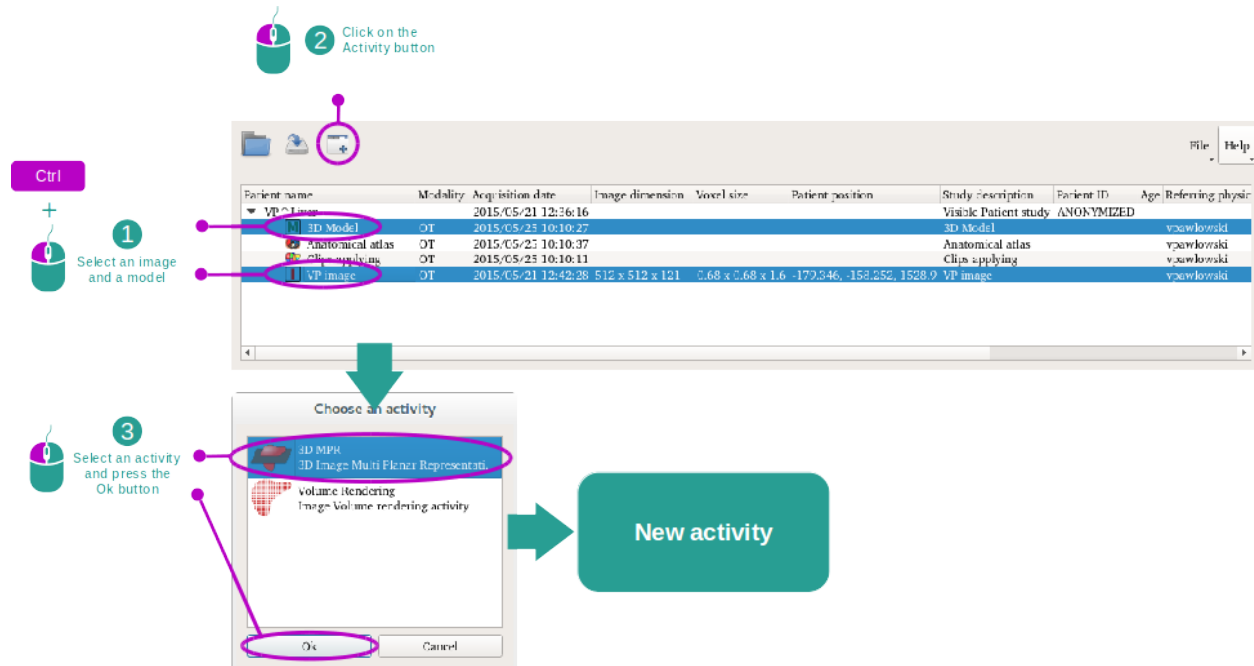


Afin de démarrer l'activité MPR 3D, une série d'images et la série du modèle associé sont nécessaires. Typiquement, ces données sont chargées depuis un fichier VPZ.

Sélectionnez les deux séries dans l'activité "Series" (*Comment charger des données*) en maintenant la touche Ctrl enfoncée pendant la sélection de la série. Cliquez sur "Launch activity", sélectionnez "3D MPR" et cliquez sur "Ok".

6.4.2 Visualiser l'anatomie du patient


La configuration de l'activité MPR 3D se compose de trois vues.

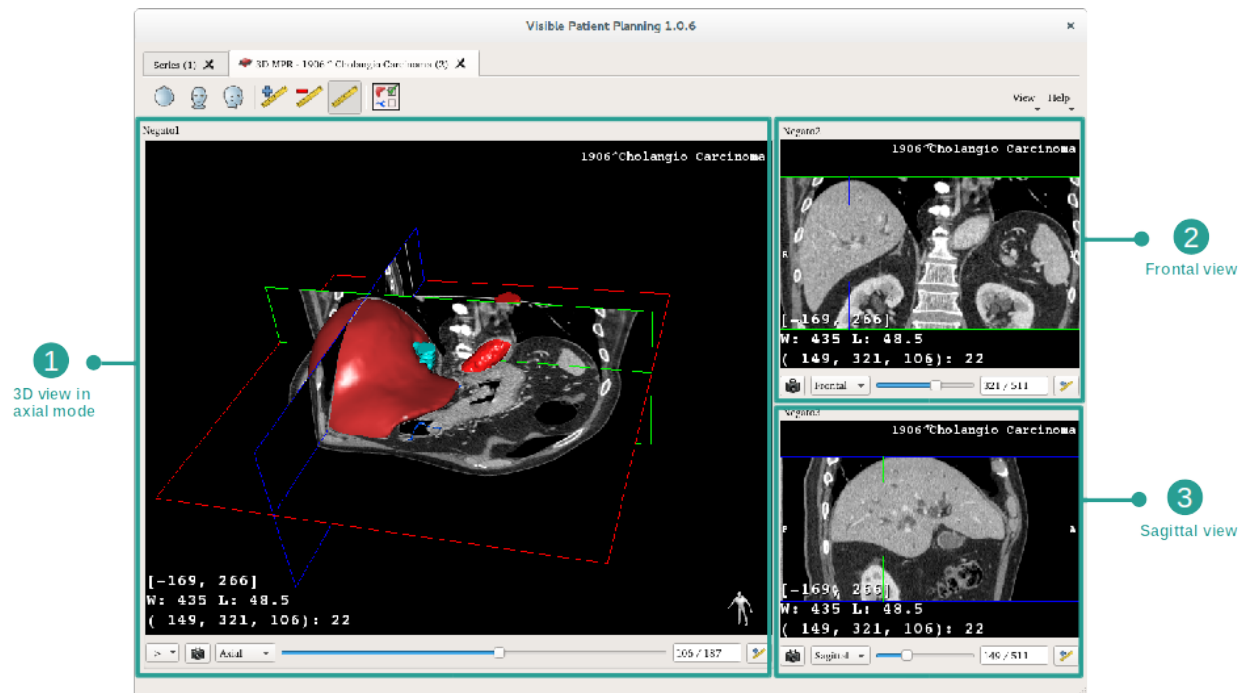

La vue principale affiche votre modèle 3D et l'image associée. Les deux autres vues affichent les vues frontale et sagittale de l'image.

A titre d'exemple, les étapes suivantes reposeront sur l'analyse de la tumeur hépatique d'un patient.


Etape 1 : cacher des organes pour visualiser une zone anatomique

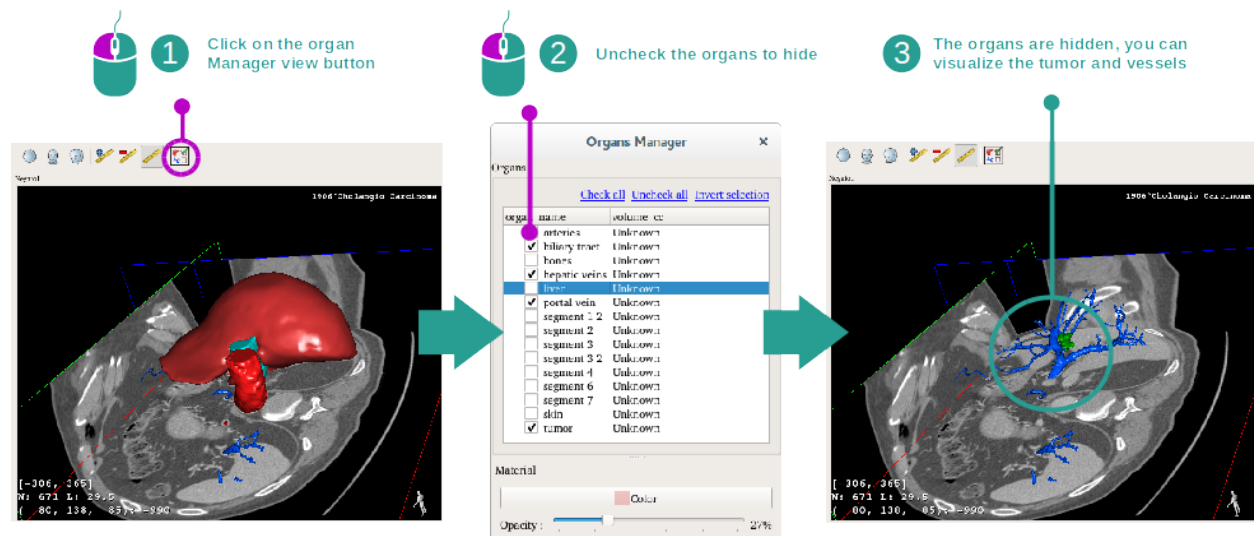

Afin de visualiser la tumeur située dans le foie, vous pouvez cacher les organes que vous ne voulez pas voir à l'écran. Pour ce faire, cliquez sur le bouton gestionnaire d'organes et décochez les organes à cacher.


Pour plus d'informations sur le fonctionnement du gestionnaire d'organes, veuillez vous référer à la documentation de l'activité sur le modèle 3D.

Etape 2 : pivoter le modèle pour avoir une vue globale

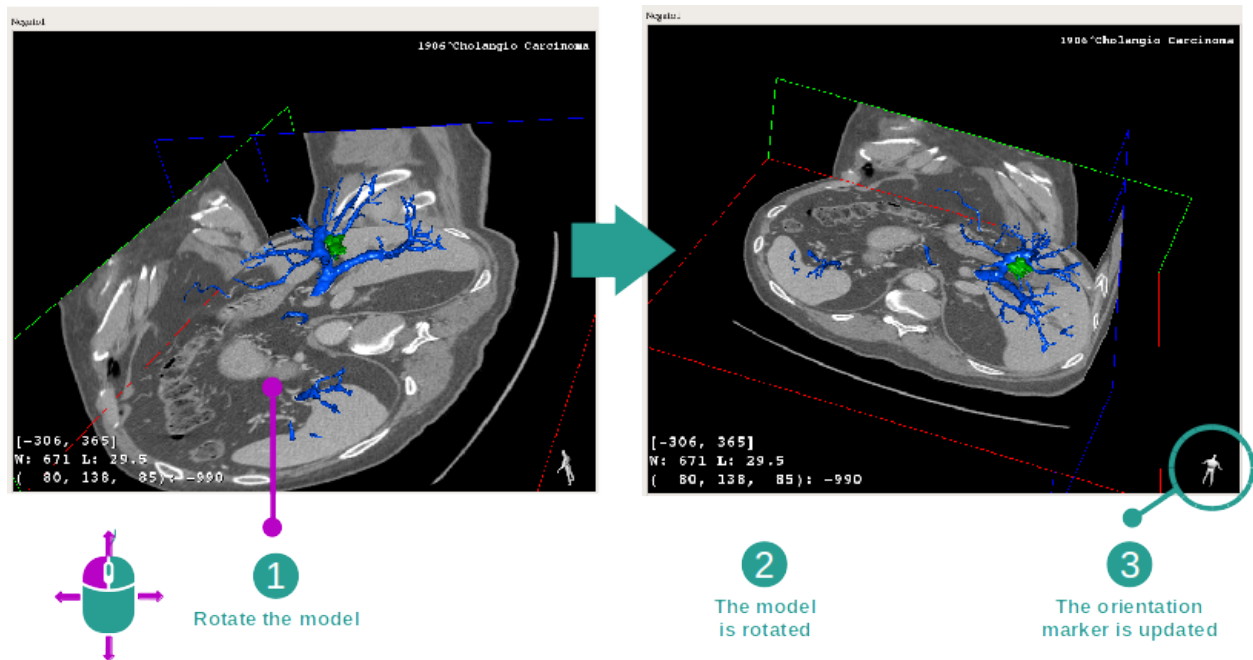


Pour faire tourner votre modèle 3D, maintenez le clic gauche de la souris enfoncé sur la vue principale et déplacez le curseur. Le modèle et l'image vont pivoter en conséquence.

Etape 3 : détailler la zone anatomique

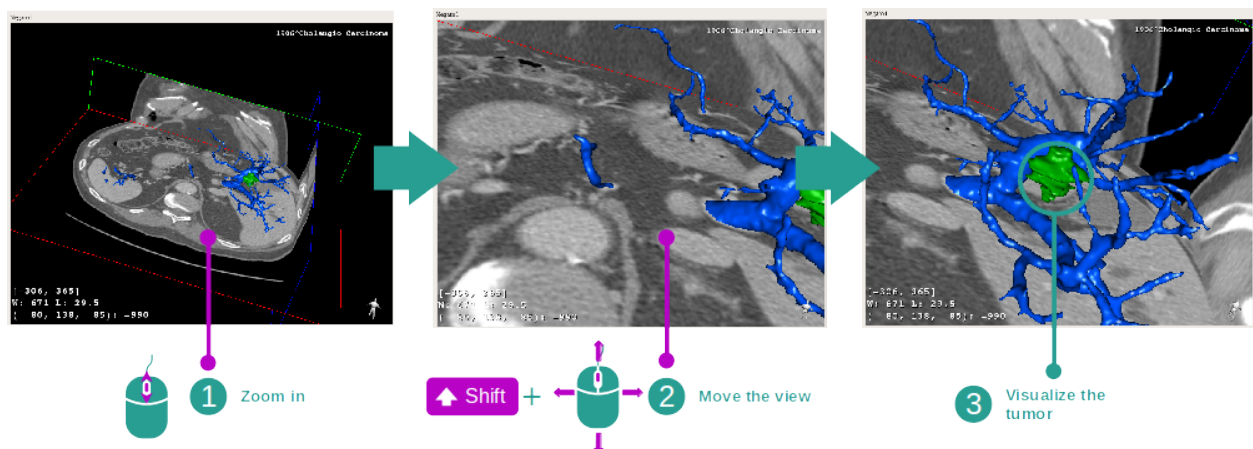


Utilisez la molette de la souris pour effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez déplacer la vue en gardant la touche Maj enfoncée, tout en maintenant le bouton du milieu de la souris enfoncé et en faisant glisser la souris sur la vue.

Etape 4 : mise à jour de la coupe visualisée

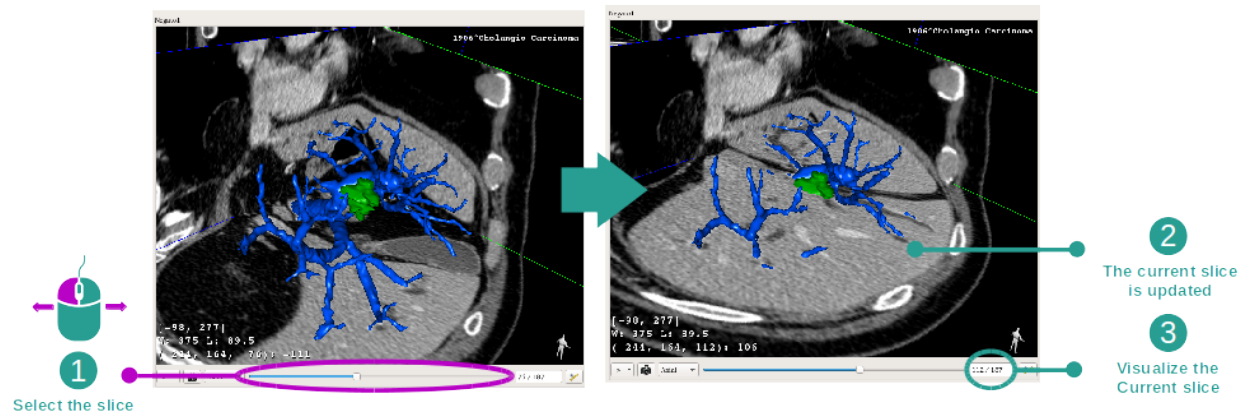

Utilisez la barre coulissante sous la vue principale pour changer la coupe visualisée. La coupe correspondant à l'orientation sélectionnée sera mise à jour en conséquence.


Etape 5 : mesurer une partie anatomique

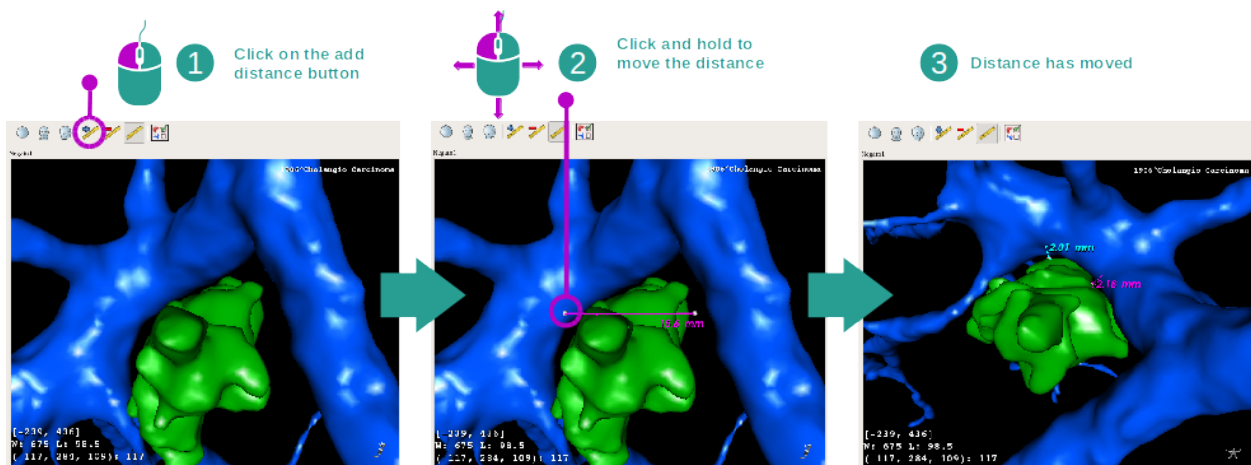

Utilisez le bouton “Add distance” pour placer une nouvelle mesure sur la vue. Une fois mise en place, la distance peut être déplacée en maintenant le clic gauche de la souris enfoncé sur l'un des deux points de mesure situés à l'extrémité du segment.

6.4.3 Exemples d'autres structures anatomiques


Le scénario détaillé précédemment peut être appliqué à d'autres structures anatomiques utilisant l'activité MPR 3D. Ci-dessous, plusieurs exemples de structures qui peuvent être visualisées. Cette liste n'est pas exhaustive.

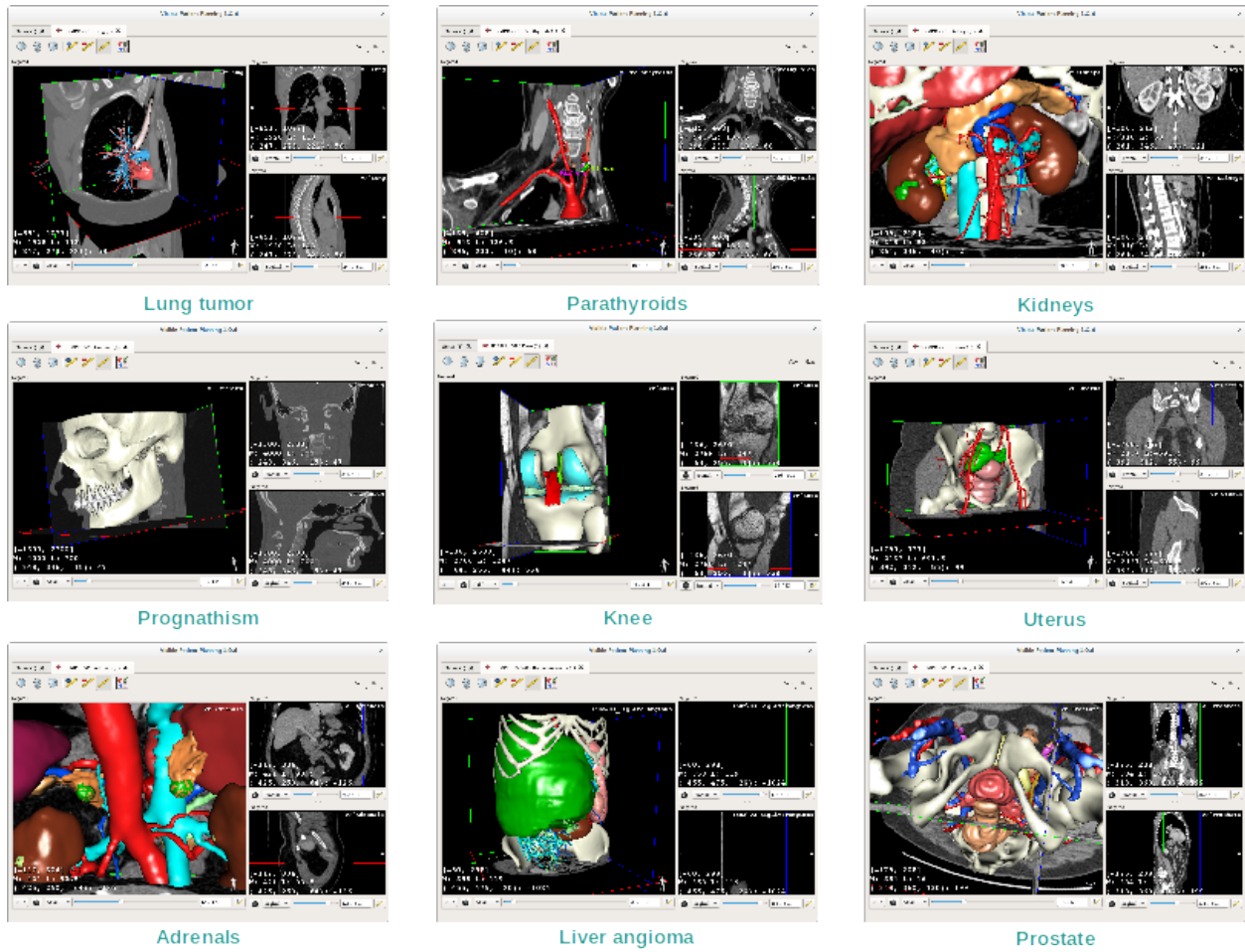

6.4.4 Informations complémentaires


Informations complémentaires sur les images

De nombreuses informations complémentaires sur l'image se trouvent sur la vue MPR 3D.

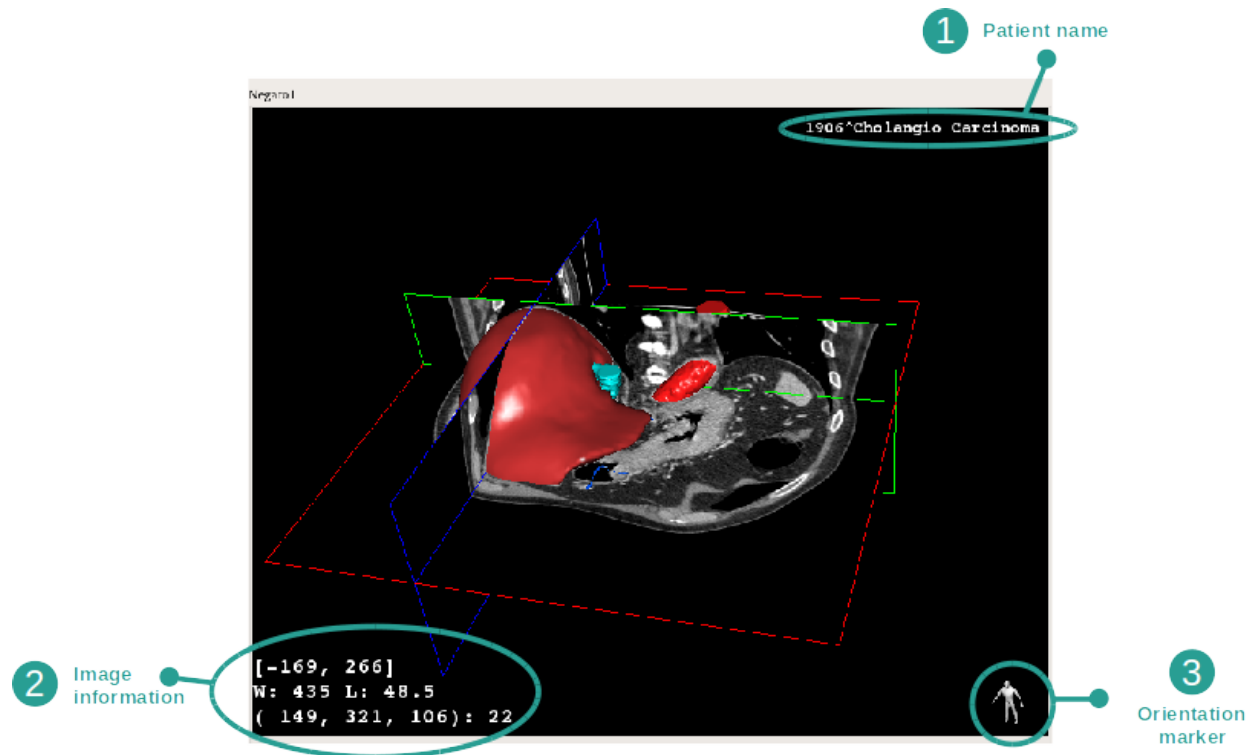


1. Nom du patient
2. Marqueur d'orientation
3. Informations sur l'image (informations avancées, connaissances en analyse d'images médicales requises)
 - Sur la première ligne, amplitude des bords de l'image actuelle
 - Puis, la largeur de la fenêtre de l'image actuelle
 - Sur la troisième ligne, les coordonnées et la valeur du dernier voxel sélectionné.

Ajuster le fenêtrage

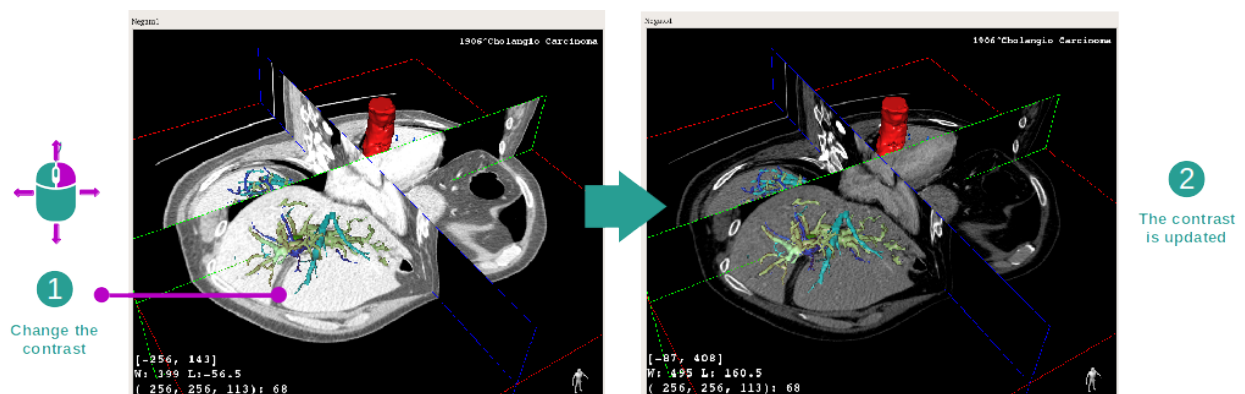


Vous pouvez changer le fenêtrage en maintenant un clic droit pendant que vous déplacez le curseur.

Focus sur une zone anatomique

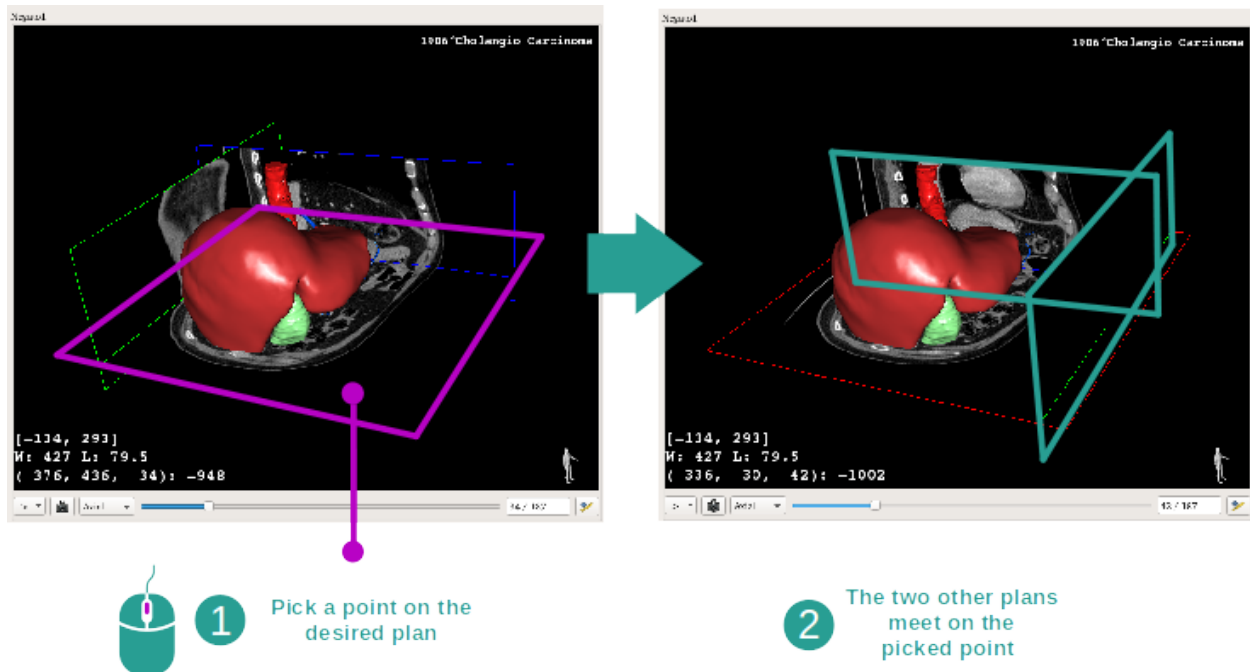


Utilisez le bouton du milieu de la souris pour faire un focus sur une zone anatomique. Lorsque vous choisissez un point sur une vue, les trois plans de coupe (axial, frontal et sagittal) s'entrecroiseront sur ce point.

Réinitialiser la vue

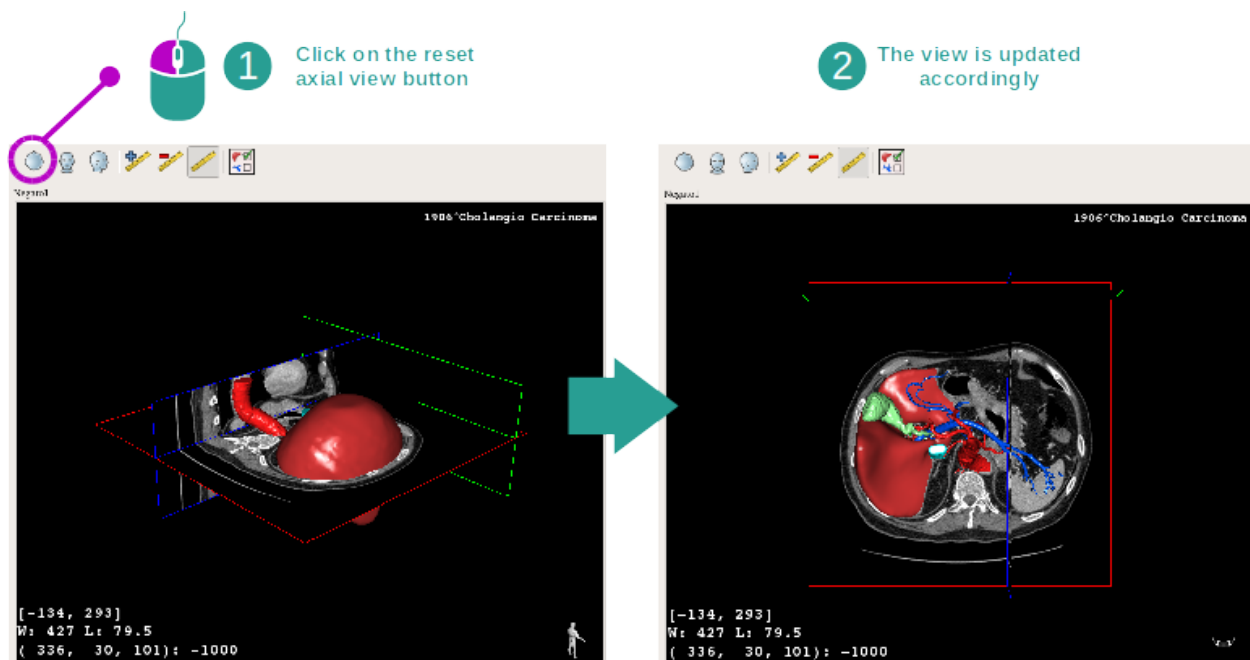


A tout moment, vous pouvez réinitialiser la vue grâce à l'un des trois boutons de réinitialisation situés au-dessus de la vue principale. Ces boutons permettent de retrouver la vue axiale, frontale ou sagittale.

Sélectionner l'orientation de l'image

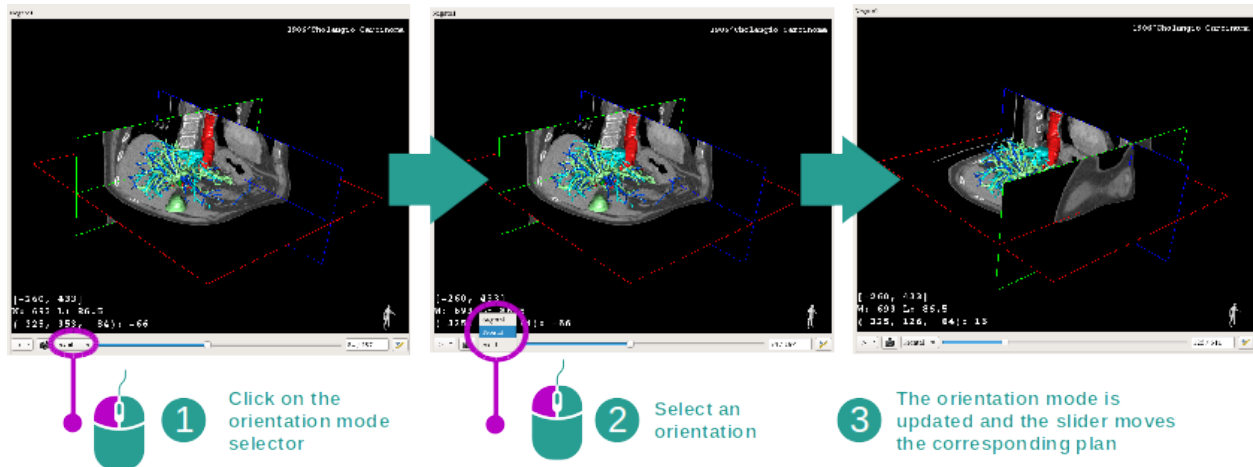

Le mode d'orientation peut être sélectionné grâce au menu dédié situé sous la vue principale. Une fois l'orientation changée, la barre coulissante met à jour la vue correspondante lorsqu'elle est déplacée.


Sélectionner le nombre de plans de l'image

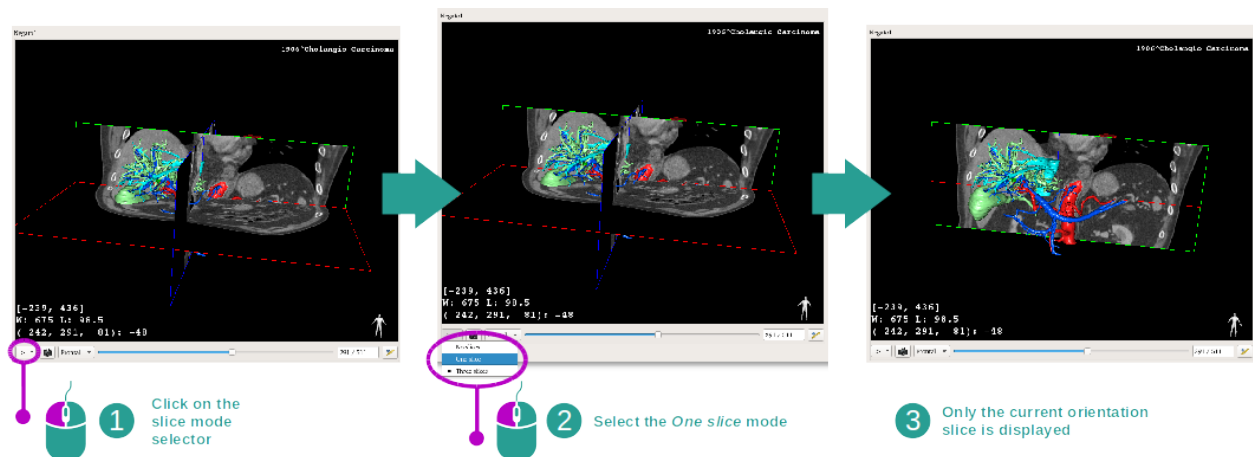

Le nombre de plans affichés peut être modifié en utilisant le sélecteur situé sous la vue principale. Trois modes sont disponibles :

- No slices (“pas de coupe”) supprime tous les plans
- One slice (“une coupe”) n’affiche que le plan de l’axe sélectionné
- Three slices (“trois coupes”) affiche les trois plans

Sauvegarder une capture d'écran

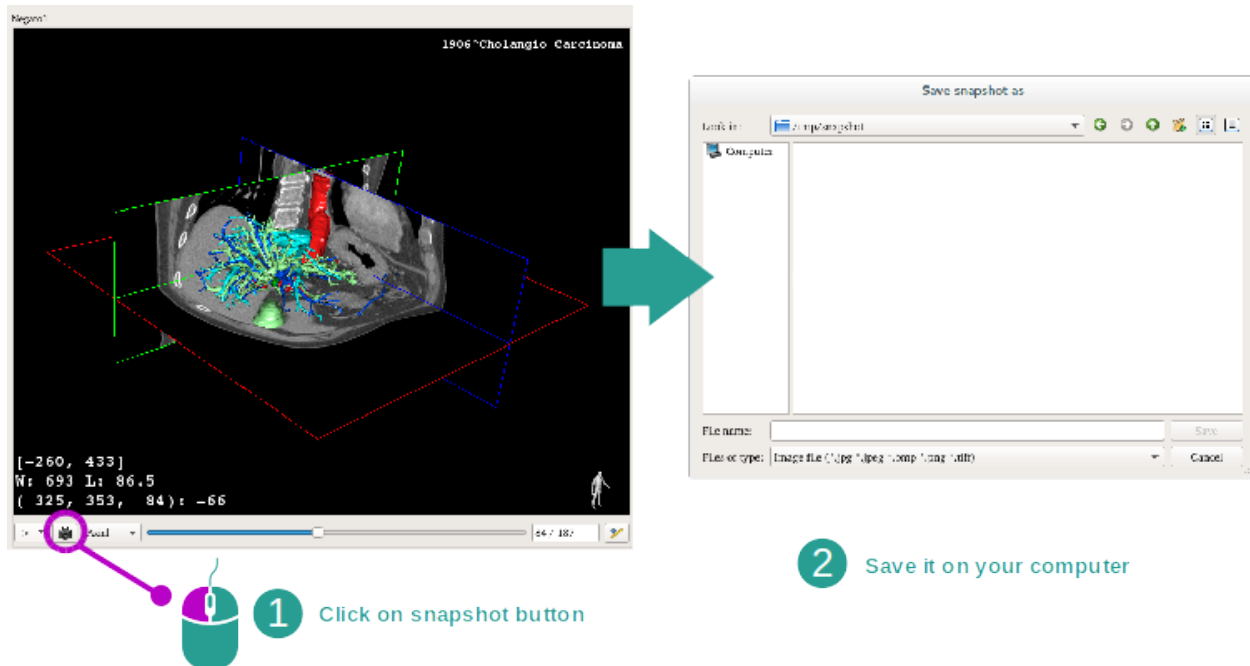

2 Save it on your computer

Pour sauvegarder la vue actuelle en tant qu'image, utilisez le bouton de capture d'écran.

Effectuer des mesures dans les vues secondaires

Pour des explications sur comment effectuer des mesures sur une image médicale 2D, veuillez vous référer à la documentation de l'activité MPR 2D, section "Prendre des mesures".

6.5 Comment visualiser un rendu volumique

L'activité de Rendu volumique est dédiée à la visualisation de l'image médicale en tant que rendu volumique. L'activité permet d'intégrer le modèle 3D associé dans le rendu volumique pour une meilleure compréhension de l'anatomie du patient.


Cette activité inclut un gestionnaire de fonctions de transfert qui permet de changer l'affichage du rendu volumique en fonction des parties anatomiques que vous souhaitez visualiser.

6.5.1 Conditions préalables

Pour démarrer une activité de Rendu volumique, une série d'images est nécessaire. Facultativement, sa série de modèles correspondante peut y être associée. Sélectionnez la série dans l'activité Séries (*Comment charger des données*), cliquez sur "Launch activity", sélectionnez "Volume Rendering" et cliquez sur "Ok".

6.5.2 Visualiser l'anatomie du patient


Commençons par une courte description de la structure de l'activité.

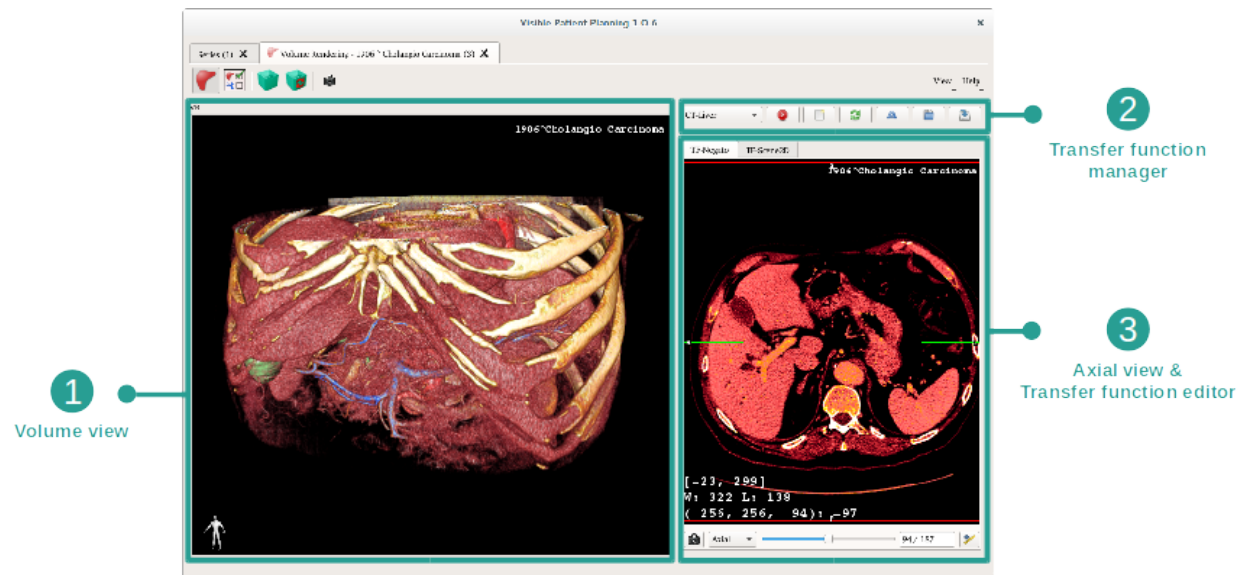

Cette activité se compose de deux vues. La vue principale sur la gauche affiche le rendu volumique de votre image. La vue sur la droite se compose de deux onglets. Le premier affiche une vue axiale de votre image. Le deuxième est un éditeur de fonction de transfert.


A titre d'exemple, les étapes suivantes reposeront sur l'analyse de la tumeur hépatique d'un patient.

Etape 1 : cacher le modèle 3D

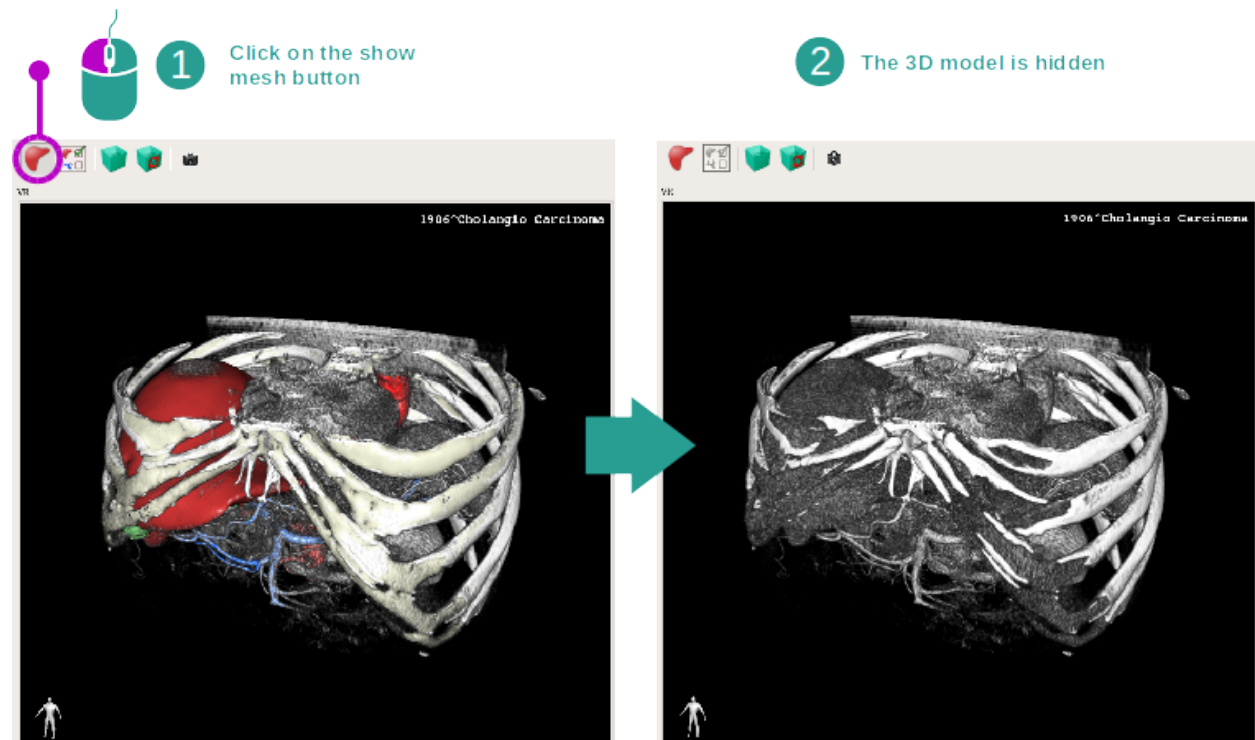


Si l'activité a été lancée avec une image et un modèle, vous souhaitez peut-être cacher le modèle afin de voir uniquement le rendu volumique. A cette fin, décochez le bouton "Show Mesh".

Etape 2 : sélectionner une fonction de transfert

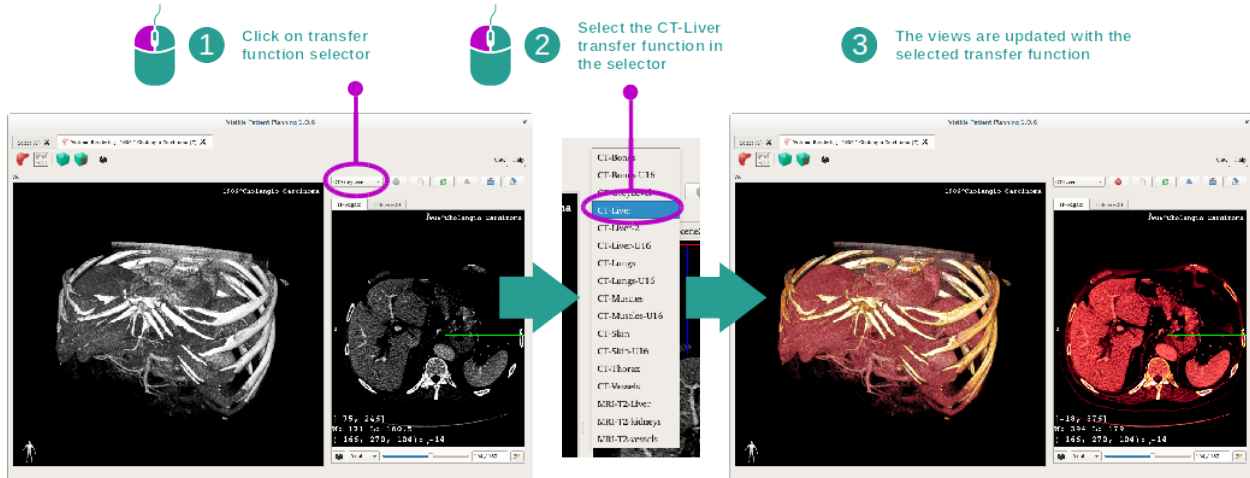

Vous pouvez changer la fonction de transfert du rendu volumique afin d'afficher d'autres parties anatomiques. La fonction de transfert établit une correspondance entre la valeur des pixels et les couleurs afin de faire ressortir des informations spécifiques. Pour changer la fonction de transfert, cliquez sur le sélectionneur de fonction de transfert et sélectionnez celle dont vous avez besoin.

Etape 3 : ajuster le fenêtrage

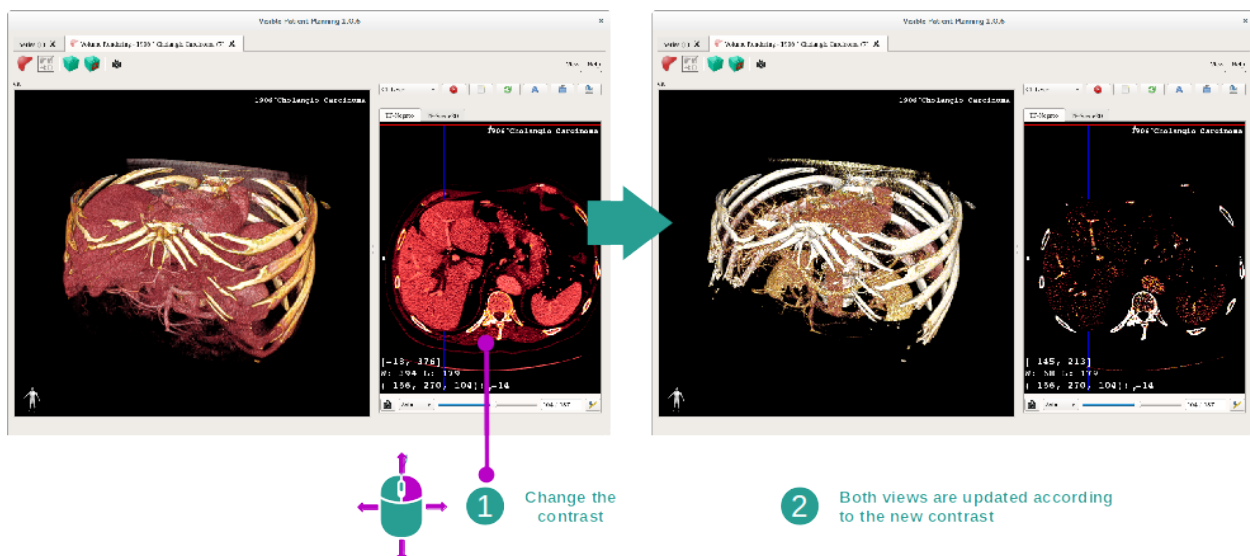

Le rendu volumique peut être ajusté en changeant le fenêtrage de l'image médicale. Cela peut être fait exactement de la même manière que dans l'activité MPR 2D (: réf :window_level).


Etape 4 : afficher un modèle 3D dans le rendu volumique

Comme dans l'étape 1, vous pouvez afficher des modèles 3D en cliquant sur le bouton "Show Mesh". Le gestionnaire d'organes est disponible dans cette activité. Ainsi, vous pouvez changer l'opacité et la couleur des modèles d'organes à l'instar de l'activité Modèle 3D. Pour les étapes suivantes, nous afficherons la tumeur hépatique du patient dans la vue volumique.

Etape 5 : détailler une zone anatomique

Les interactions de rendu volumique sont les mêmes que les interactions dans l'activité Modèle 3D.

Etape 6 : utiliser le curseur de la coupe 3D

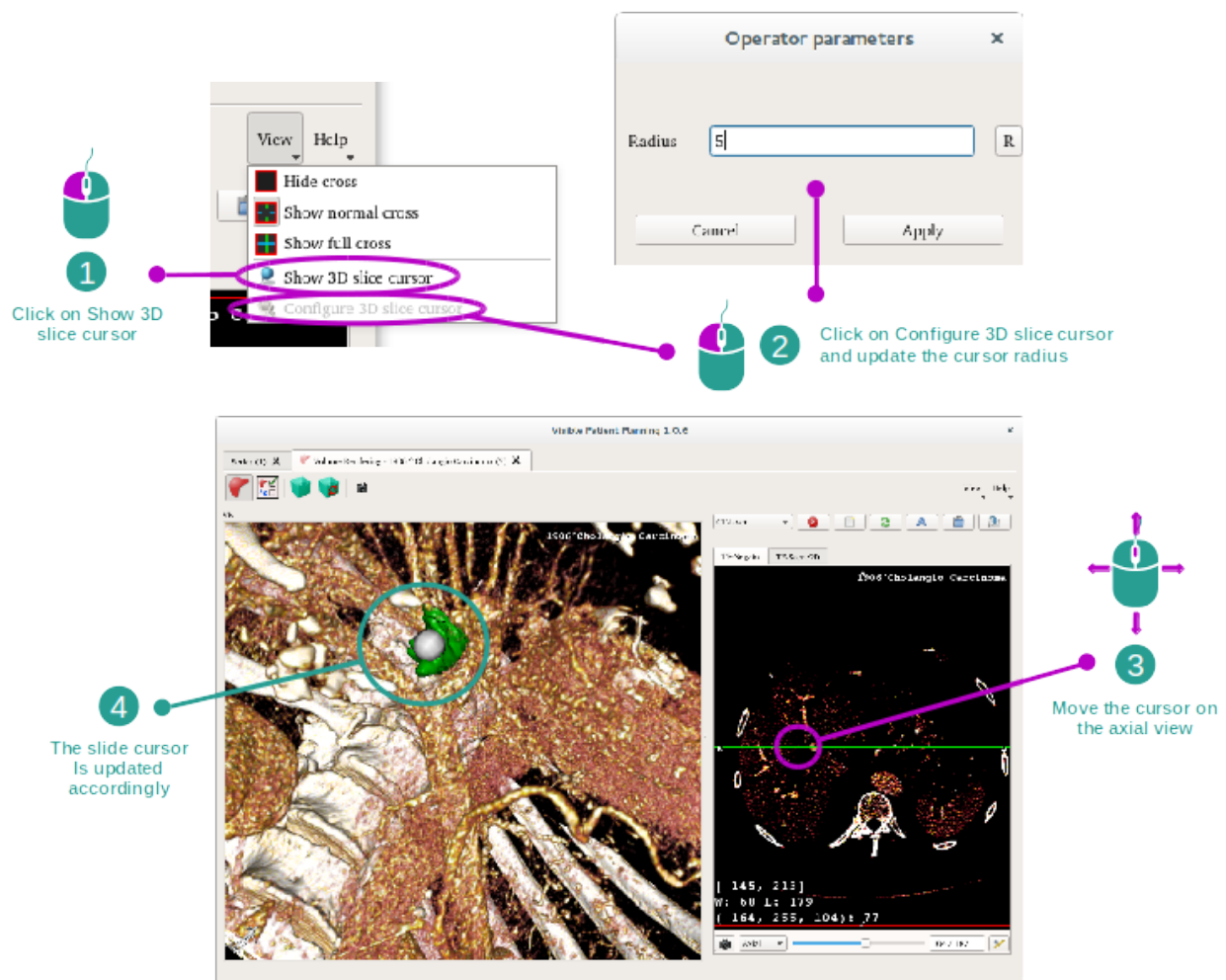


Afin de localiser un point dans la vue de rendu volumique, vous pouvez utiliser le curseur de la coupe 3D disponible dans le menu "View" :

- cliquez sur "Show 3D slice cursor"
- Cliquez sur "Configure 3D slice cursor".

Puis, choisissez simplement un point dans la vue de droite en utilisant le bouton central de la souris. Le point lié sera affiché dans la vue de rendu volumique par une sphère blanche. Sur l'image ci-dessus, le curseur est déplacé sur la tumeur hépatique du patient.

Les interactions de negato sont les mêmes que dans l'activité MPR 2D.

Etape 7 : mise à jour de la boîte de recadrage

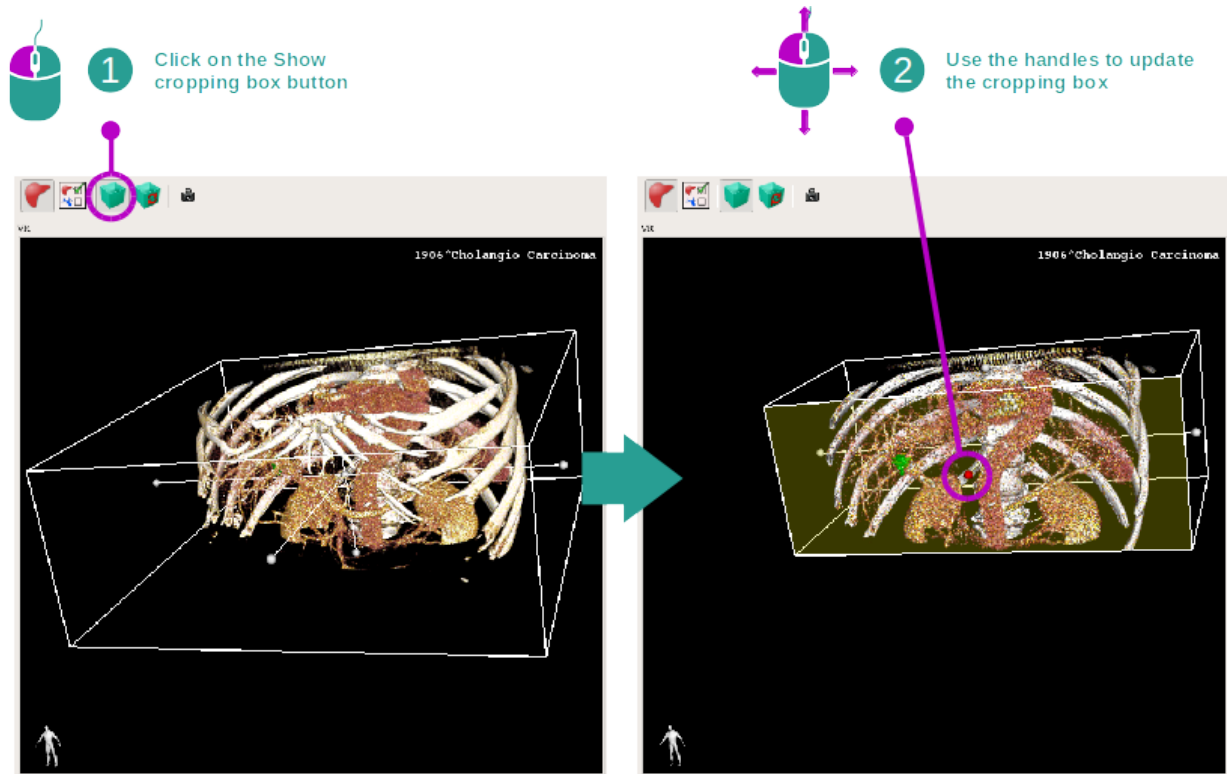


Le visualisation du volume peut être améliorée en utilisant la boîte de recadrage. Pour l'utiliser, cliquez sur "Show/Hide box cropping". Elle peut alors être déplacée ou redimensionnée en cliquant et glissant un des repères centraux de la face de la boîte. Le volume sera recadré en fonction.


Vous pouvez réinitialiser la boîte en cliquant sur "Reset box cropping".

6.5.3 Exemples d'autres structures anatomiques


Le scénario détaillé précédemment peut être appliqué à d'autres structures anatomiques en utilisant l'activité de Rendu volumique. La section suivante dresse la liste de plusieurs exemples de structures qui peuvent être visualisées. Cette liste n'est pas exhaustive.

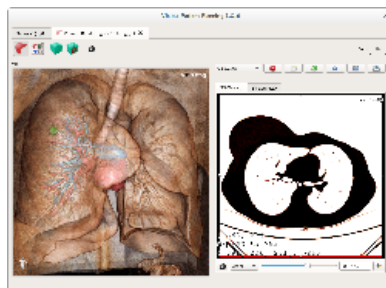


Lung tumor

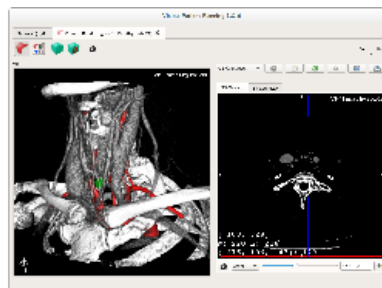


Parathyroids

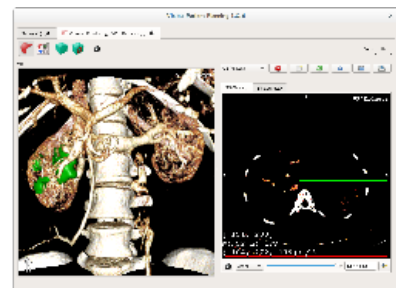


Kidneys

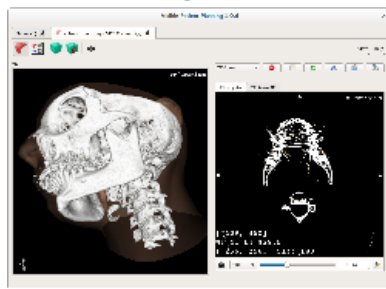


Prognathism

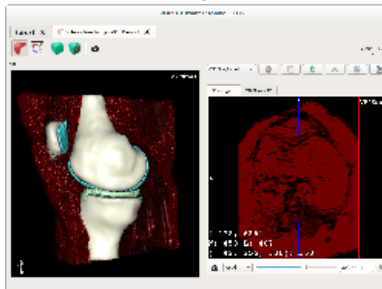


Knee

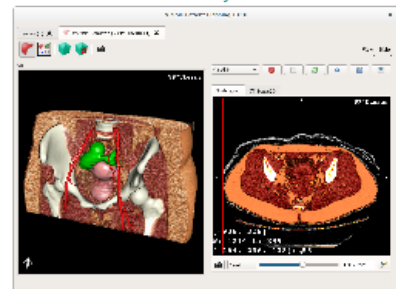


Uterus

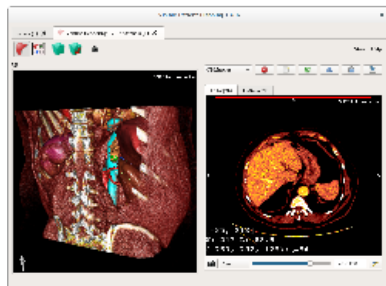

Adrenals

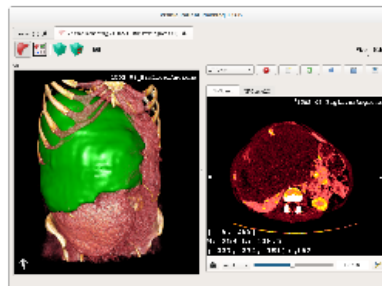

Liver angioma

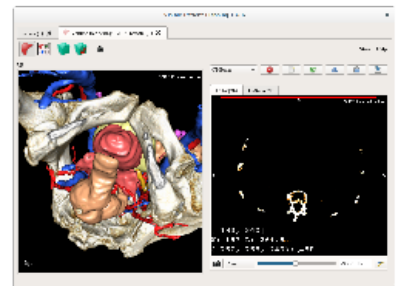


Prostate

6.5.4 Informations complémentaires

Informations complémentaires sur les images

La vue de rendu volumique affiche un marqueur d'orientation et le nom du patient, comme dans l'activité Modèle 3D.

Editeur de fonction de transfert

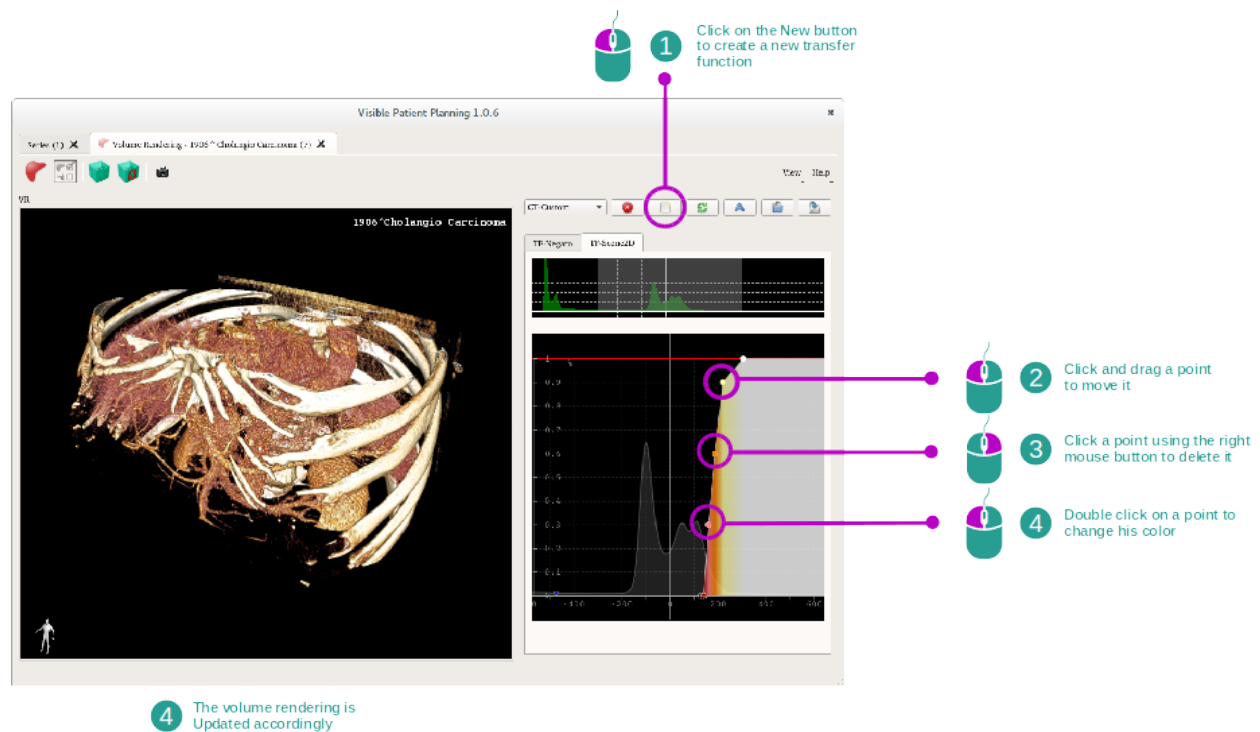

Le gestionnaire de fonctions de transfert permet de créer, réinitialiser, renommer, effacer, sauvegarder et charger des fonctions de transfert. Pour l'éditeur de fonctions de transfert, vous pouvez personnaliser vos fonctions en traçant des points colorés sur l'histogramme de votre image.

Sauvegarder une capture d'écran

On peut faire des captures d'écran de la vue de rendu volumique avec le bouton de capture d'écran, comme dans toute autre activité.

Changer l'orientation du négato 2D

To get an explanation on how the cross displaying system works, please refer to the MPR2D activity documentation (see *Changer l'orientation de l'image dans la vue centrale*).

6.6 Comment utiliser l'activité Atlas Anatomique


L'activité Atlas Anatomique est dédiée à la visualisation des parties anatomiques segmentées grâce aux zones colorées de l'image appelées atlas.

6.6.1 Conditions préalables

Afin de démarrer l'activité Atlas Anatomique, il faut une série d'atlas anatomique. Typiquement, ces données sont chargées à partir d'un fichier VPZ. Sélectionnez ces séries depuis l'activité Séries (*Comment charger des données*) et

cliquez sur “Launch activity”, ou double-cliquez sur la série.


6.6.2 Visualiser l’anatomie du patient

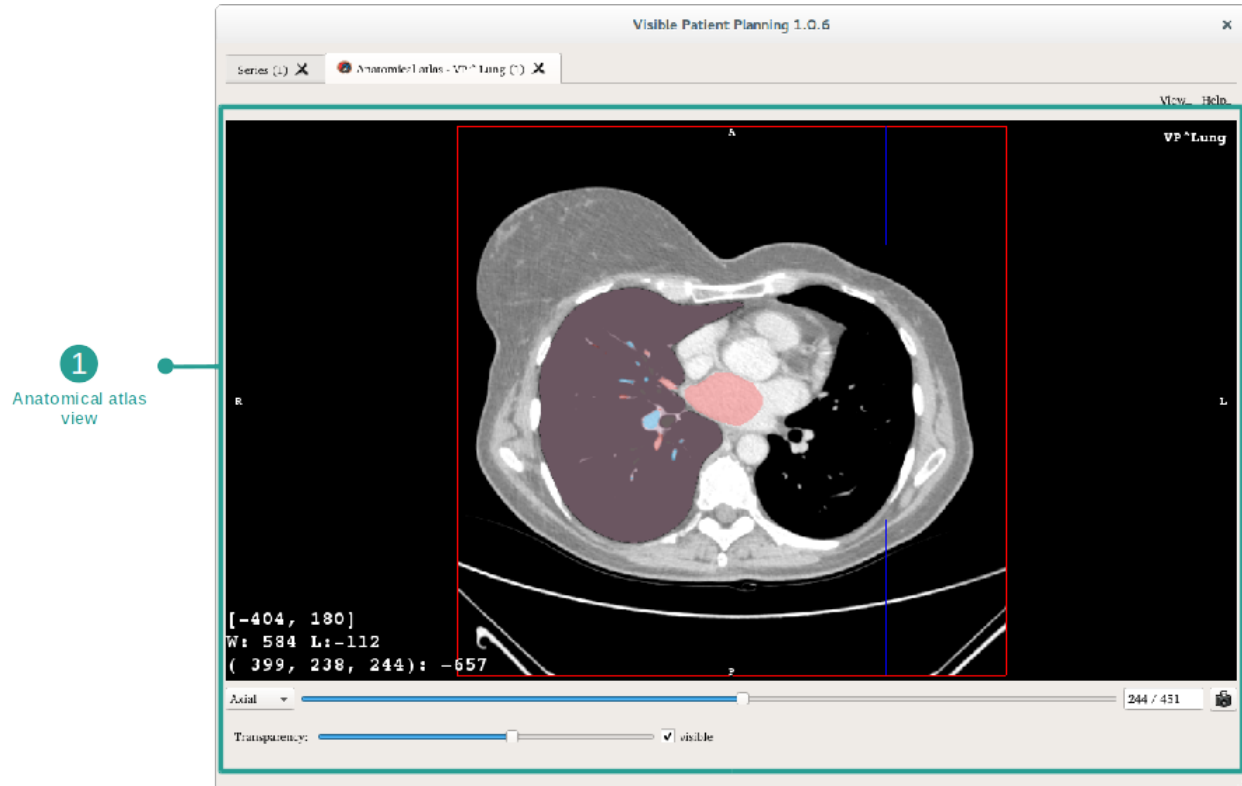

L'activité inclut une vue de l'image permettant de localiser les parties anatomiques segmentées.


A titre d'exemple, les étapes suivantes reposent sur l'analyse de la tumeur du poumon d'un patient.

Etape 1 : mise à jour de la transparence de l'atlas anatomique

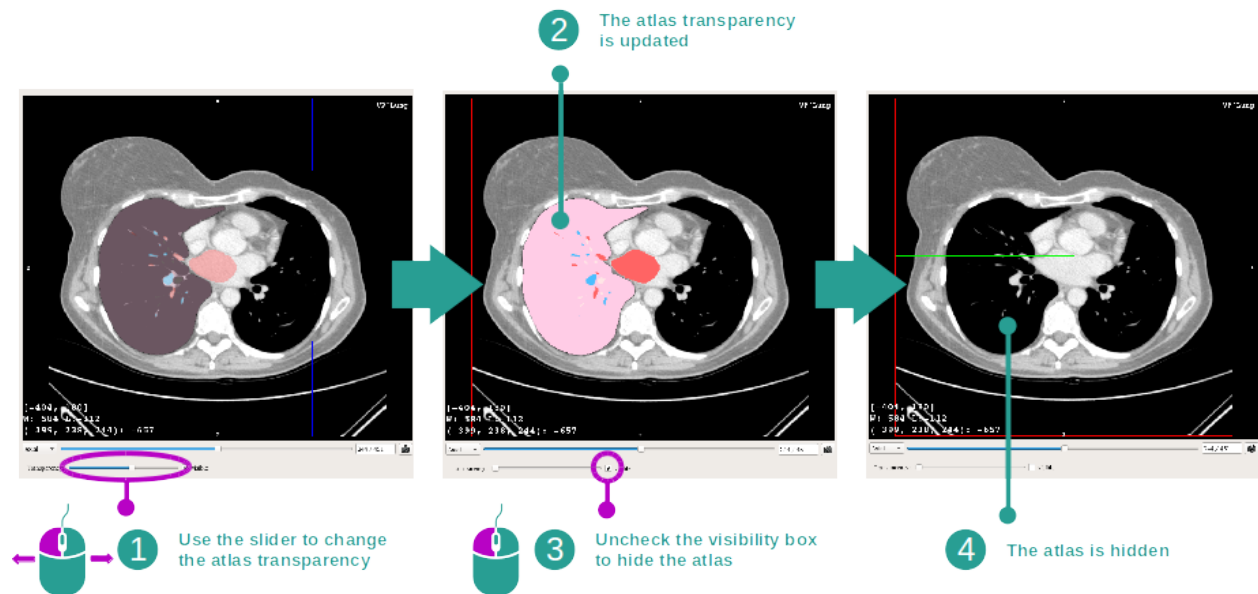

L'activité Atlas Anatomique permet de changer la transparence de l'atlas afin d'améliorer la compréhension des différentes parties anatomiques. Pour ce faire, utilisez la barre coulissante déterminant la transparence située en-dessous de la vue de l'image. L'atlas peut également être caché en décochant la case de visibilité à côté de la barre coulissante de transparence.

Etape 2 : localisation d'une partie anatomique

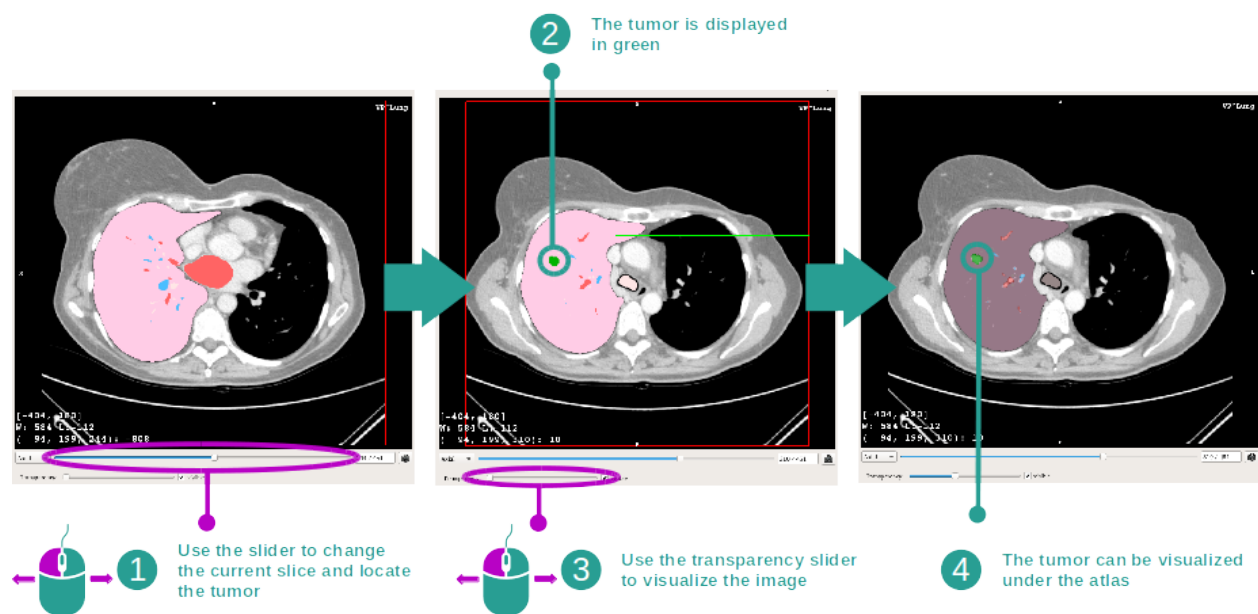


Afin de localiser une partie anatomique spécifique, utilisez la barre coulissante située au-dessus de la barre coulissante déterminant la transparence. Une fois la coupe sélectionnée, la transparence peut être mise à jour pour améliorer la

visualisation de la tumeur.

6.6.3 Exemples d'autres structures anatomiques

Le scénario détaillé précédemment peut être appliqué à d'autres structures anatomiques en utilisant l'activité Atlas Anatomique. La section suivante dresse la liste de plusieurs exemples de structures qui peuvent être visualisées. Cette liste n'est pas exhaustive.

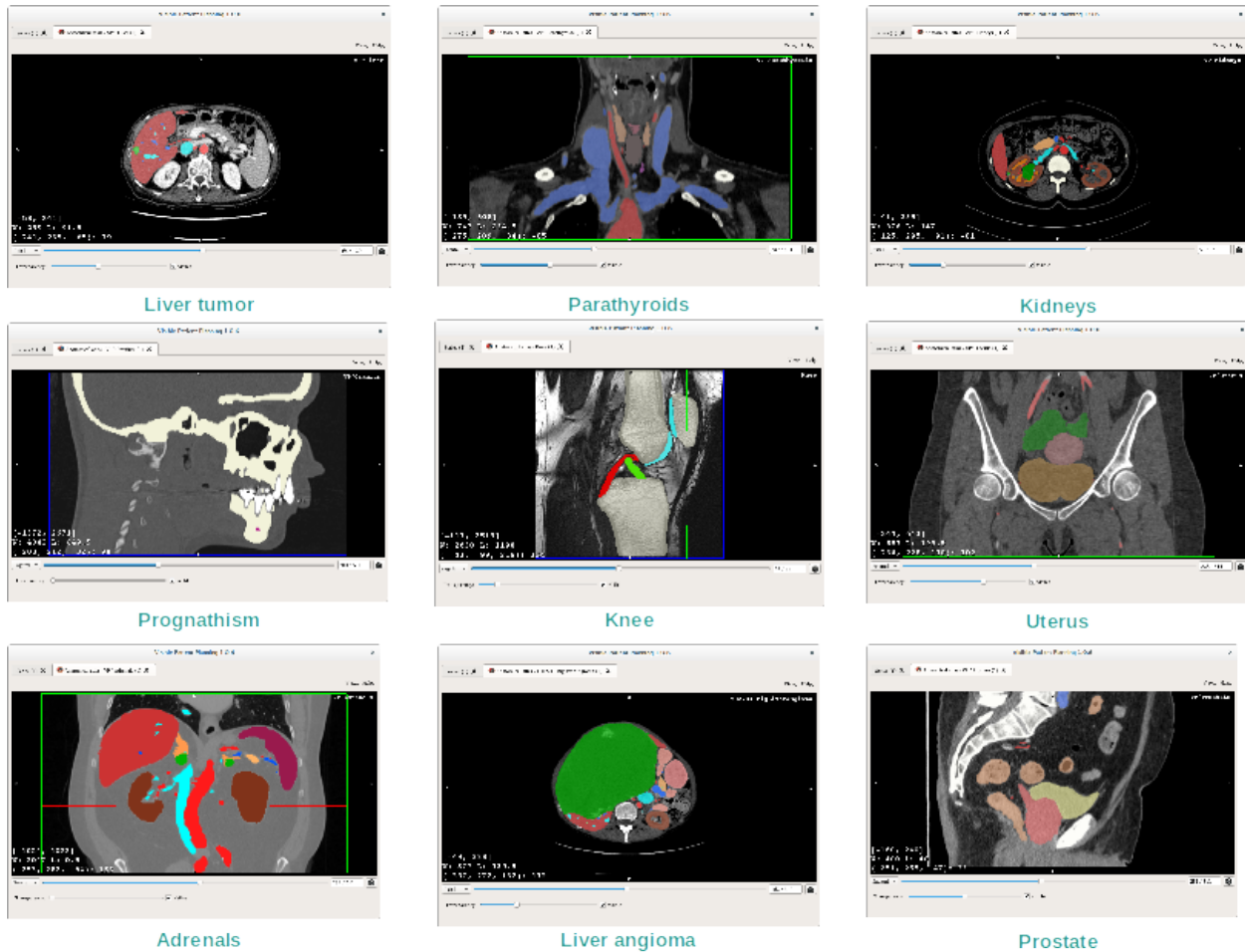

6.6.4 Informations complémentaires

Informations complémentaires sur les images

Tout comme dans l'activité MPR 2D, les informations de l'image sont affichées sur la vue.

1. Nom du patient
2. Marqueur de position (cette information est également affichée sur les bords supérieur, gauche, inférieur et droit de la vue)
 - S : Supérieur / I : Inférieur
 - A : Antérieur / P : Postérieur
 - R : Droite ("Right") / L : Gauche ("Left")
3. Informations sur l'image (informations avancées, connaissances en analyse d'images médicales requises)

- Sur la première ligne, amplitude des bords de l'image actuelle
- Puis, la largeur de la fenêtre de l'image actuelle
- Sur la troisième ligne, les coordonnées et la valeur du dernier voxel sélectionné.

Ajuster le fenêtrage

Comme dans les autres activités incluant un négato 2D, le fenêtrage peut être changé en maintenant un clic droit de souris tout en déplaçant le curseur. Seul le fenêtrage de l'image est impacté, l'affichage de l'atlas reste inchangé.

Sélectionner le mode d'orientation

Comme dans les autres activités incluant un négato 2D, le mode d'orientation peut être sélectionné avec le sélecteur situé en-dessous de la vue principale. Une fois le mode d'orientation choisi, la barre coulissante met la vue correspondante à jour lorsqu'elle est bougée.

Sauvegarder une capture d'écran

Afin de sauvegarder la vue actuelle en tant qu'image, utilisez le bouton capture d'écran, comme dans d'autres activités.


6.7 Comment visualiser les segments

L'activité de Pose de Clip est dédiée à la visualisation des segments (veuillez noter que les segments sont approximatifs). Les clips peuvent être placés sur le réseau de l'organe afin d'afficher les divers segments et approximations des volumes calculés.

6.7.1 Conditions préalables


Afin de démarrer une activité de Pose de Clip, une série de pose de clip est requise. Typiquement, ces données sont chargées d'un fichier VPZ. Sélectionnez la série dans l'activité Series (*Comment charger des données*) et cliquez sur "Launch activity" pour lancer l'activité, ou double-cliquez sur la série.

6.7.2 Poser des clips sur le réseau d'un organe

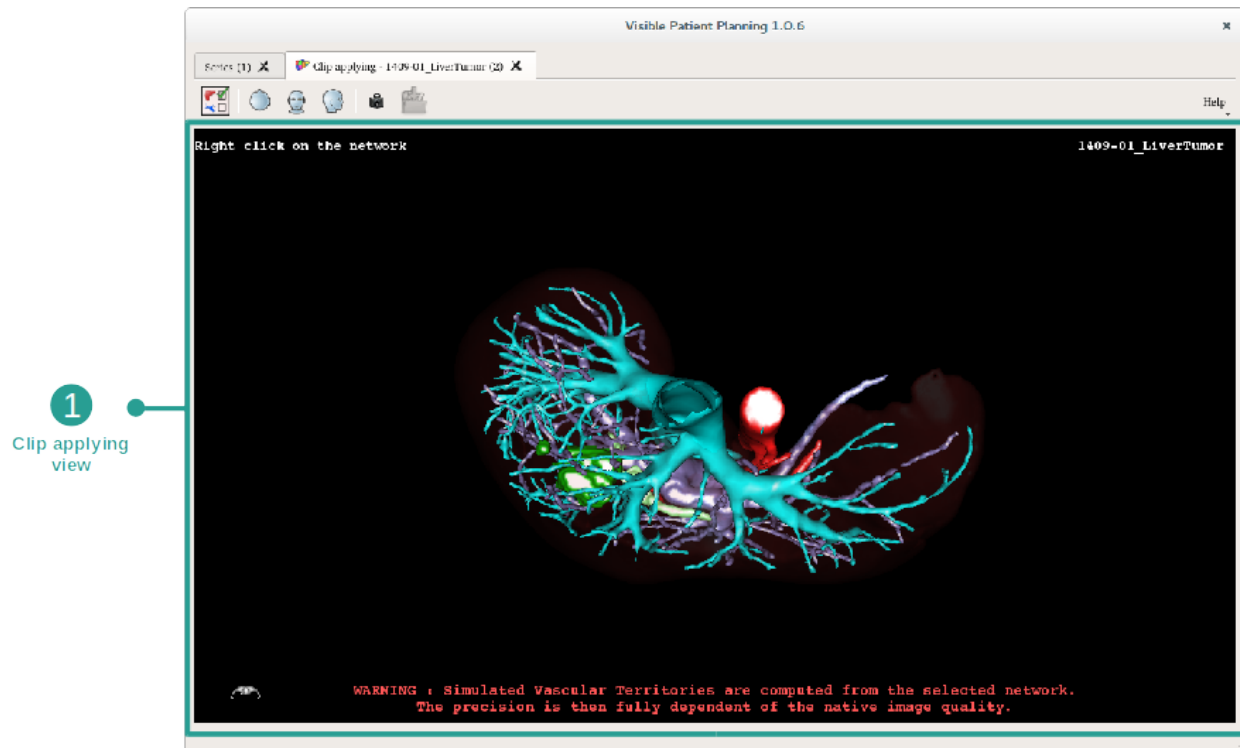

L'activité inclut une vue 3D permettant de visualiser les segments.

Etape 1 : cacher des organes pour visualiser une zone anatomique

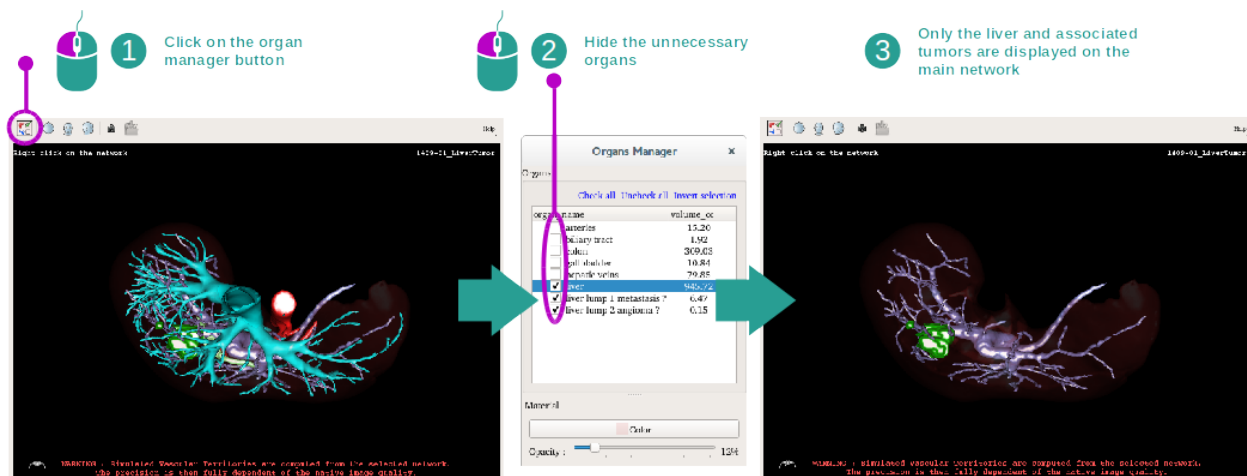


La première étape consiste à cacher les parties anatomiques qui obstruent la visualisation des tumeurs avec le gestionnaire d'organes.

Pour plus d'informations sur le gestionnaire d'organes, veuillez vous référer à la documentation de l'activité modèle 3D.

Etape 2 : détailler la zone anatomique

Dans la vue principale, les mêmes interactions peuvent être effectuées que dans l'activité modèle 3D (rotation, zoom et translation).

Etape 3 : simulation de la pose de clip

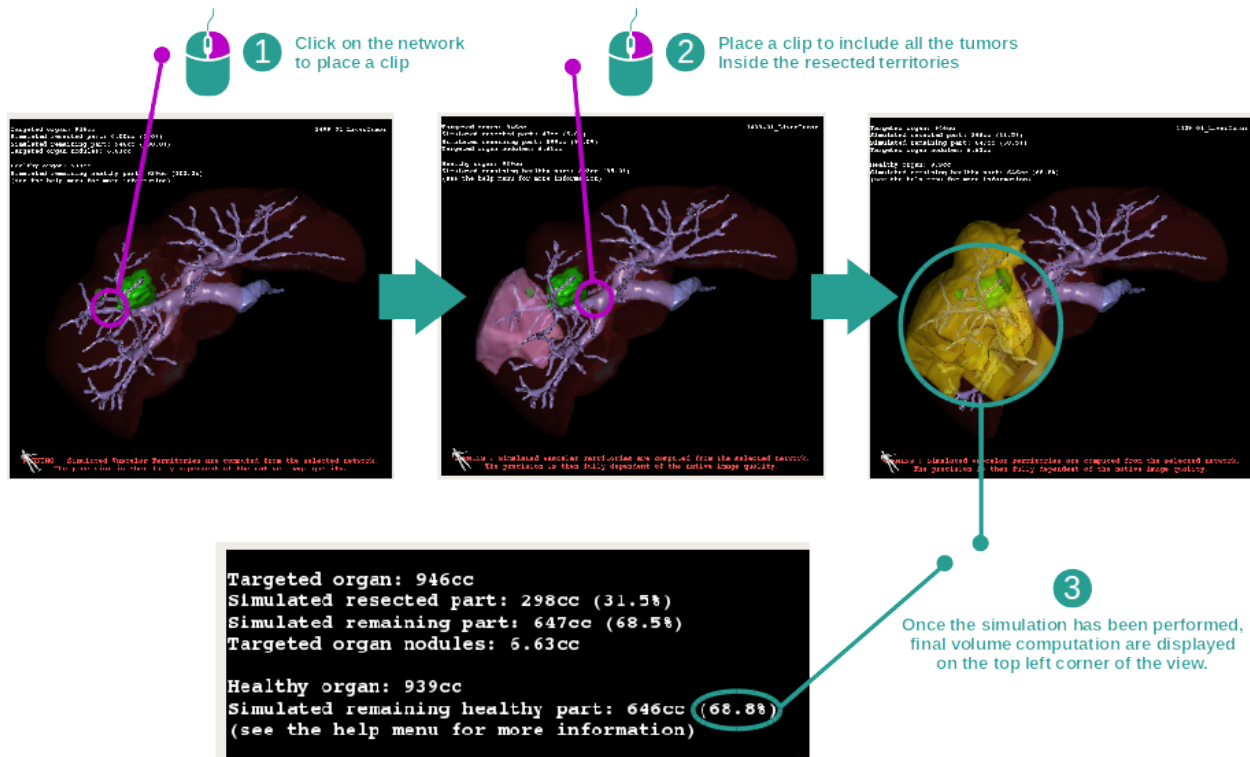

Pour montrer une segmentation correspondant à une section du réseau, effectuez un clic droit sur la section correspondante. Pour cacher une segmentation, effectuez simplement un clic droit dessus. Les volumes approximatifs de plusieurs parties d'organes, telles que les parties réséquées, et les parties saines restantes sont calculés en conséquence.

Méthode d'approximation des volumes

Partie réséquée simulée :

Volume de la partie réséquée simulée = volume de tous les segments affichés

Pourcentage de la partie réséquée simulée = volume de la partie réséquée simulée / volume de l'organe cible

Partie restante simulée :

Volume de la partie restante simulée = volume de l'organe cible - volume de la partie réséquée simulée

Pourcentage de la partie restante simulée = volume de la partie restante simulée / volume de l'organe cible

Nodules ciblés de l'organe :

Volume des nodules ciblés de l'organe = somme des volumes de nodules situés dans l'organe cible

Nodules : la masse ou la grosseur détectée dans l'organe cible et présente dans la modélisation 3D

Organe sain :

Volume de l'organe sain = volume de l'organe cible - volume des nodules ciblés dans l'organe


Partie saine restante simulée :

Volume de la partie saine restante simulée = volume des organes restants - volume des nodules restants


Pourcentage de la partie saine restante simulée = volume de la partie saine restante simulée / volume de l'organe sain

6.7.3 Exemples d'autres structures anatomiques

Le scénario détaillé précédemment peut être appliqué à d'autres structures anatomiques. La pose de clip peut également être utilisée pour visualiser la segmentation des poumons et des reins.

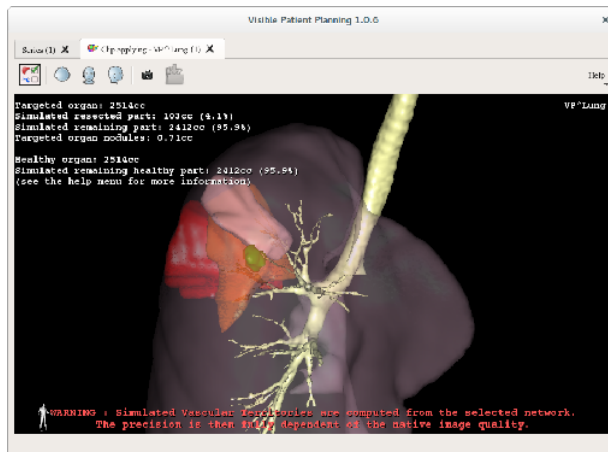

Lungs

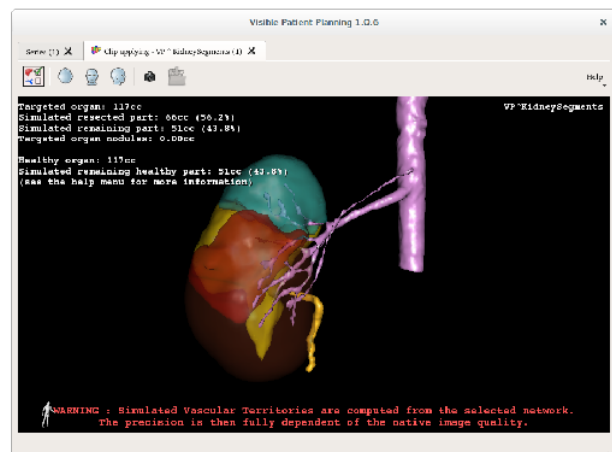


Kidneys


6.7.4 Informations complémentaires

Estimation des territoires vasculaires et respiratoires

Les territoires vasculaires et respiratoires proposés dans cette activité sont une approximation de l'anatomie réelle du patient. La méthode utilisée pour estimer ces territoires repose sur la vascularisation de l'organe ou l'appareil respiratoire de l'organe et la précision de la méthode dépend directement de la qualité de segmentation de l'arbre. L'estimation des territoires résulte du procédé suivant.

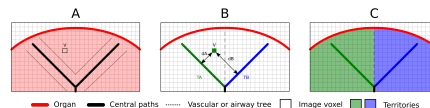

Premièrement, la segmentation de l'appareil vasculaire ou respiratoire est utilisée pour calculer les voies centrales tubulaires (A). Puis, ces voies centrales, qui représentent la structure tubulaire, sont étiquetées par des professionnels de santé qualifiés afin d'associer chaque voie au territoire d'un organe. Pour chaque voxel de la structure anatomique ciblée, la méthode trouve ensuite la voie centrale la plus proche et y associe le même territoire d'organe (B). Enfin, le résultat de l'image étiquetée est maillé pour obtenir toutes les estimations de territoire.

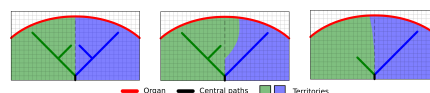

La précision de la méthode dépend directement de la qualité de segmentation de l'appareil vasculaire ou respiratoire. La résolution de l'image, la diffusion du produit de contraste dans le système vasculaire de l'organe pendant l'acquisition de l'image, etc. peuvent avoir un impact sur l'estimation des territoires.

Informations complémentaires sur les images

Comme dans l'activité de modèle 3D, le nom du patient et un marqueur d'orientation sont affichés dans la vue.

Sauvegarder une capture d'écran

Pour sauvegarder la vue actuelle en tant qu'image, utilisez le bouton de capture d'écran.

6.8 How to load troublesome DICOM data

The Dicom Filtering activity is dedicated to reading and filtering Dicom series. It can be useful if difficulties are encountered while reading Dicom data in the standard series activity.


This activity has been created because the DICOM standard implementation may differ between different manufacturers. Furthermore, certain manufacturers use private DICOM tags to store useful information. The activity allows the user to apply filters on the DICOM data in order to retrieve the information correctly.

6.8.1 Conditions préalables

In order to start a Dicom Filtering activity, make sure that no series are selected (or that no data are loaded) in Series activity (*Comment charger des données*) and click "Launch activity".

6.8.2 Load troublesome DICOM data

Let's get started with a presentation on the activity layout.

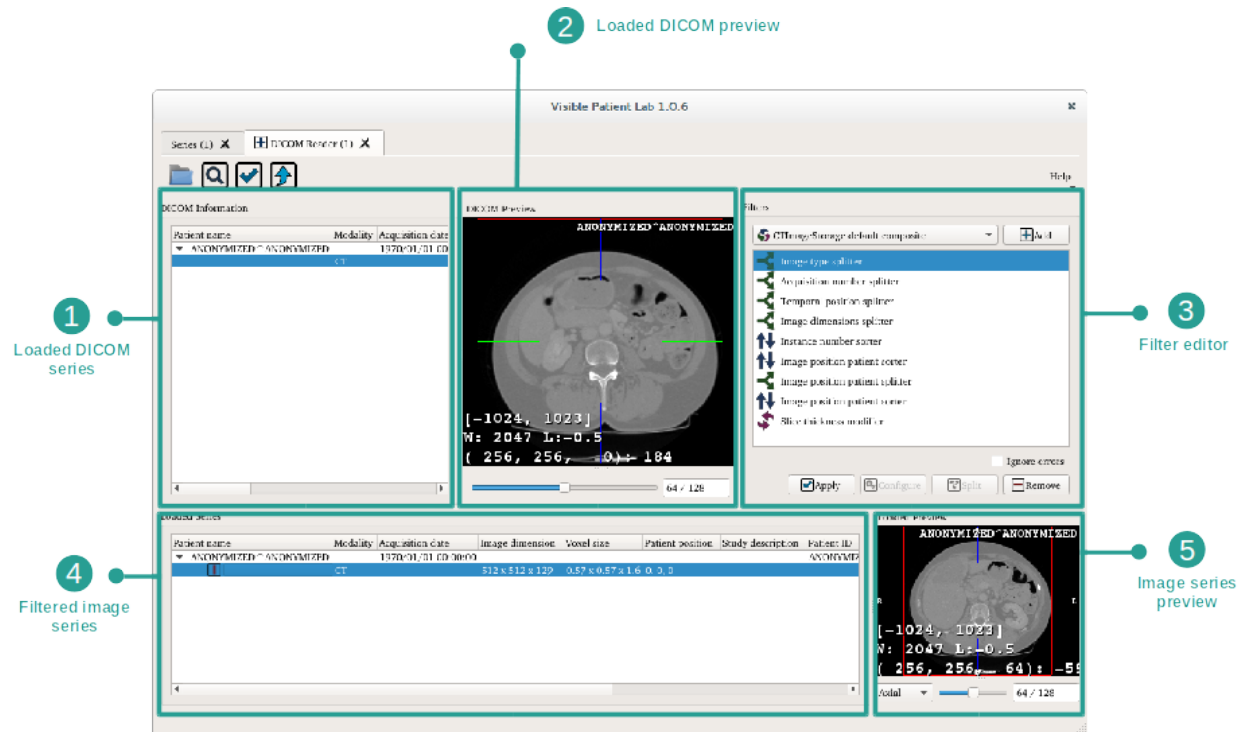

The Dicom Filtering activity is composed of five views. The three top views are dedicated to the management of raw DICOM data :

- The list of your loaded DICOM series (whithout any filter applied)
- The preview of the selected loaded DICOM series
- The editor being used to apply filters to the loaded DICOM series

The two bottom views are dedicated to the filtered DICOM data :

- The list of filtered series
- The preview of the selected filtered series

Step 1 : Load DICOM data

1 Click on the Read DICOM files

2 Select your DICOM folder and press the Open button

3 Select the loaded series

4 Previsualize the series

The diagram shows a sequence of four steps to load DICOM data. Step 1 involves clicking the 'Read DICOM files' button in the 'Series' panel. Step 2 shows a file explorer window titled 'Choose a directory with DICOM images' where a folder is selected and the 'Choose' button is pressed. Step 3 shows the 'DICOM Information' table with a series selected. Step 4 shows the 'DICOM Preview' window displaying a CT scan slice.

DICOM Information

Patient name	Modality	Acquisition date	Image dimension
ANONYMIZED	CT	19/09/12 11:00:00	

DICOM Preview


ANONYMIZED ANONYMIZED

[-1024, 1023]
W: 2047 L: 0.5
(256, 256, 0)

74 / 128


To begin with, DICOM data need to be loaded in the activity. To do so, click “Read DICOM files” and select DICOM data on your computer. The loaded series can be visualized by selecting them and manipulating the slider of the DICOM preview as you would do in the 2D MPR activity. When no filter is applied, the DICOM slices might not be in the correct order.

Step 2 : Apply filters on the series

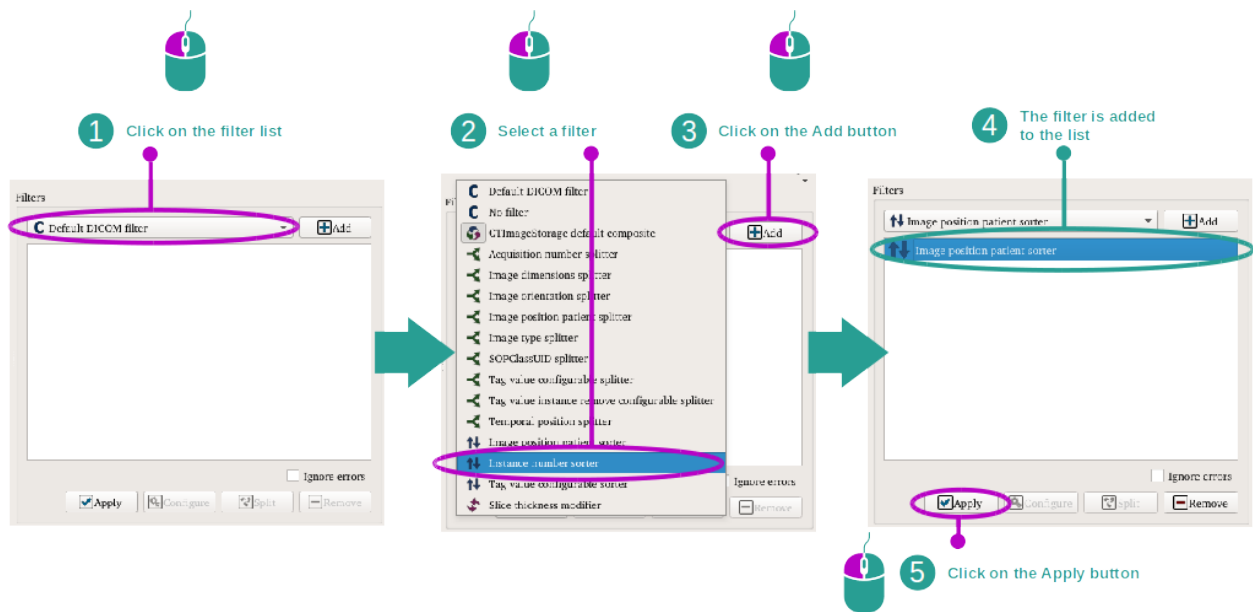


Once the series needing to be processed are identified, select them in the series list. A selection of filters can be made from the menu on the right side of the activity. The order of the filters can be rearranged by performing a drag and drop on the filter list. Note that certain filters are configurable. Those properties can be accessed by clicking the "Configure" button. Once the filter order has been set, click "Apply".

Step 3 : Preview filtered series

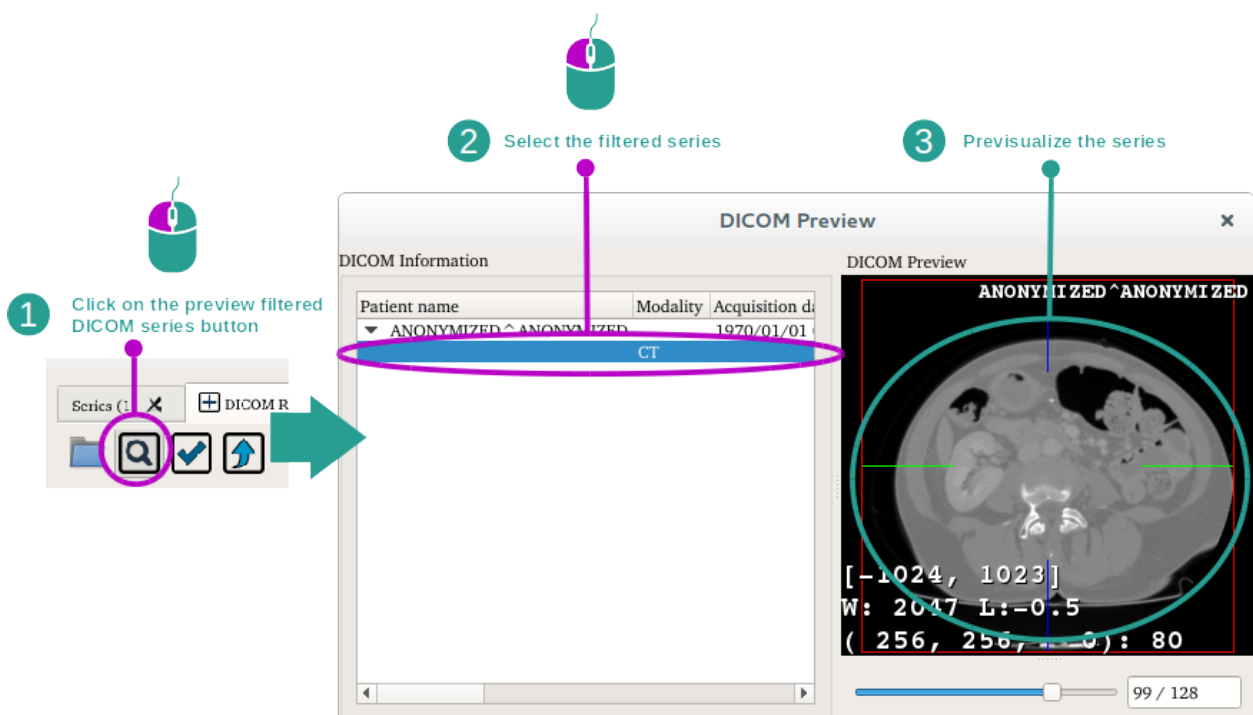


Once the filters have been applied, the results can be previsualized by clicking “Preview filtered DICOM series”. A new dialog will appear allowing to visualize the result of the application of the filter.

Step 4 : Convert DICOM series to Image series

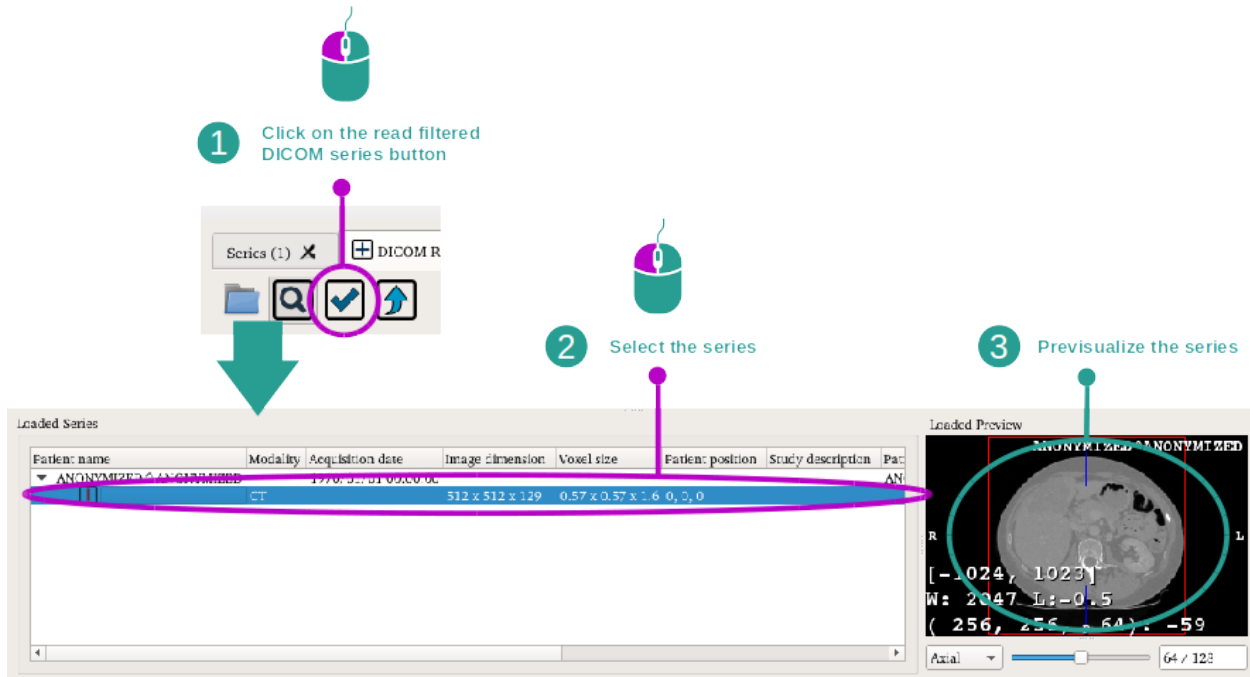


Once the previewed series match the requirements, the reading process can be validated by clicking “Read filtered DICOM series”. The DICOM series will be converted to image series. These new series will appear on the series list located at the bottom of the activity.

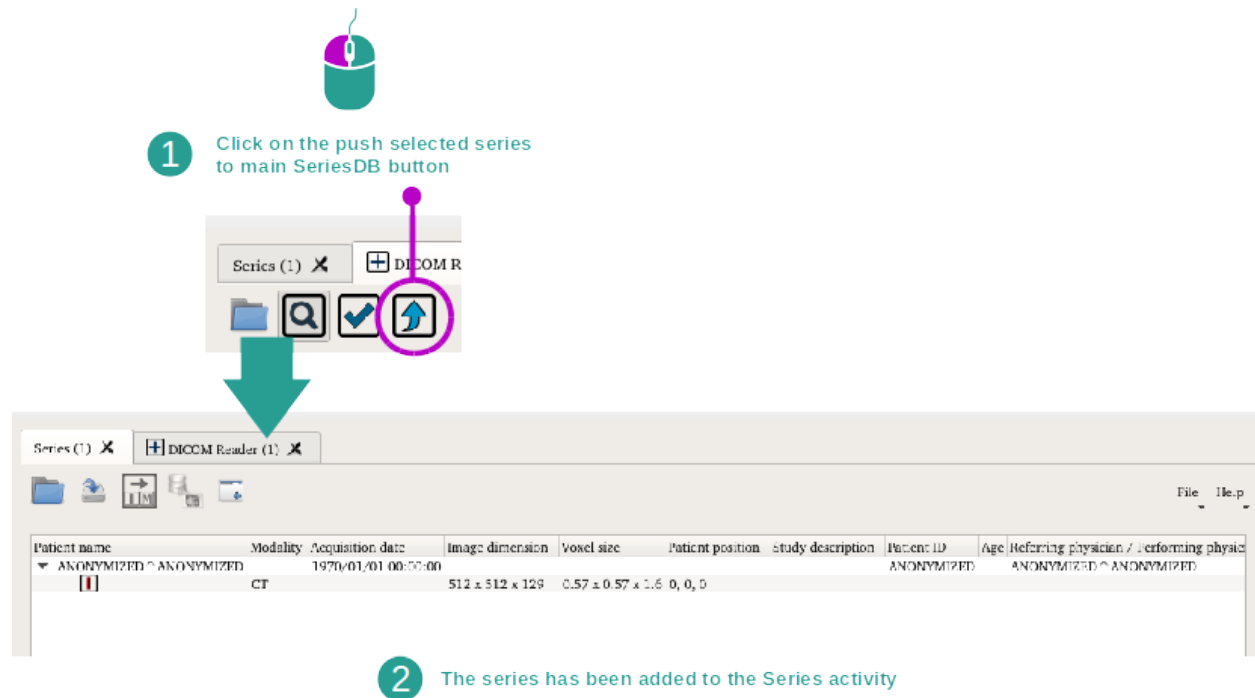Step 5 : Export Image series to the Series activity

Once the image series have been created, these series can be exported to the series activity by selecting them and clicking “Push selected Series to the main SeriesDB”. These series will then be added to the main activity.


6.8.3 Informations complémentaires

Remove a filter from the list

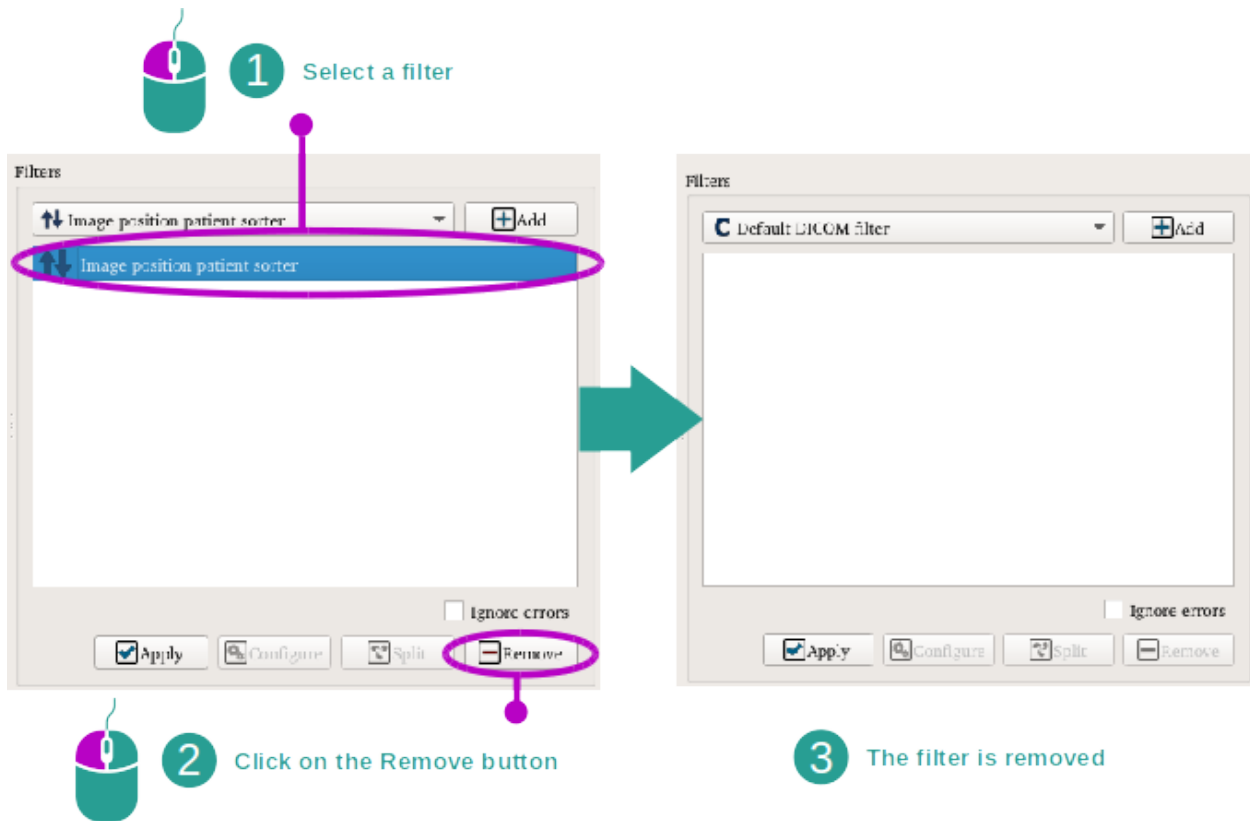


To remove a filter from the list, select the filter and press the "Remove" button.

Retrieve information on a filter functionality

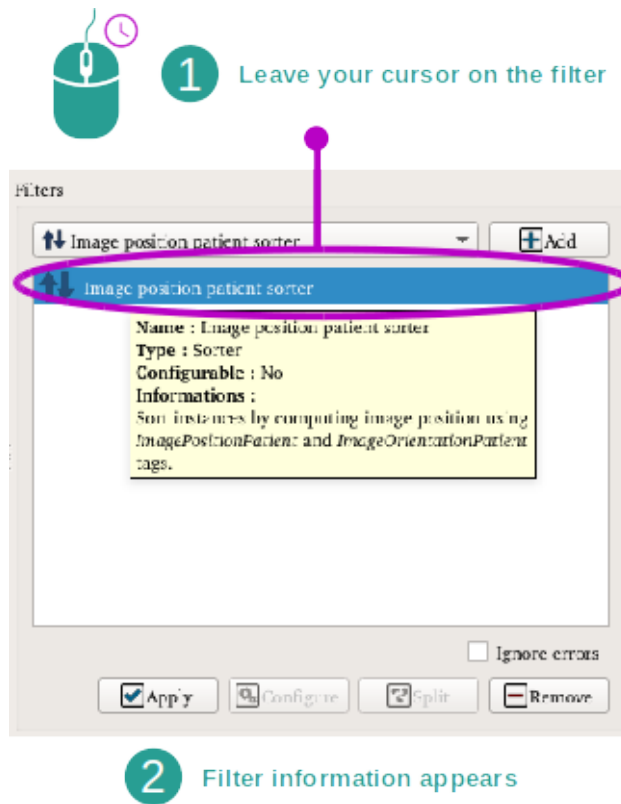


To retrieve information on a filter functionality, select a filter from the list and leave the mouse over it. A message will be displayed explaining how the filter works.

Split a composite filter

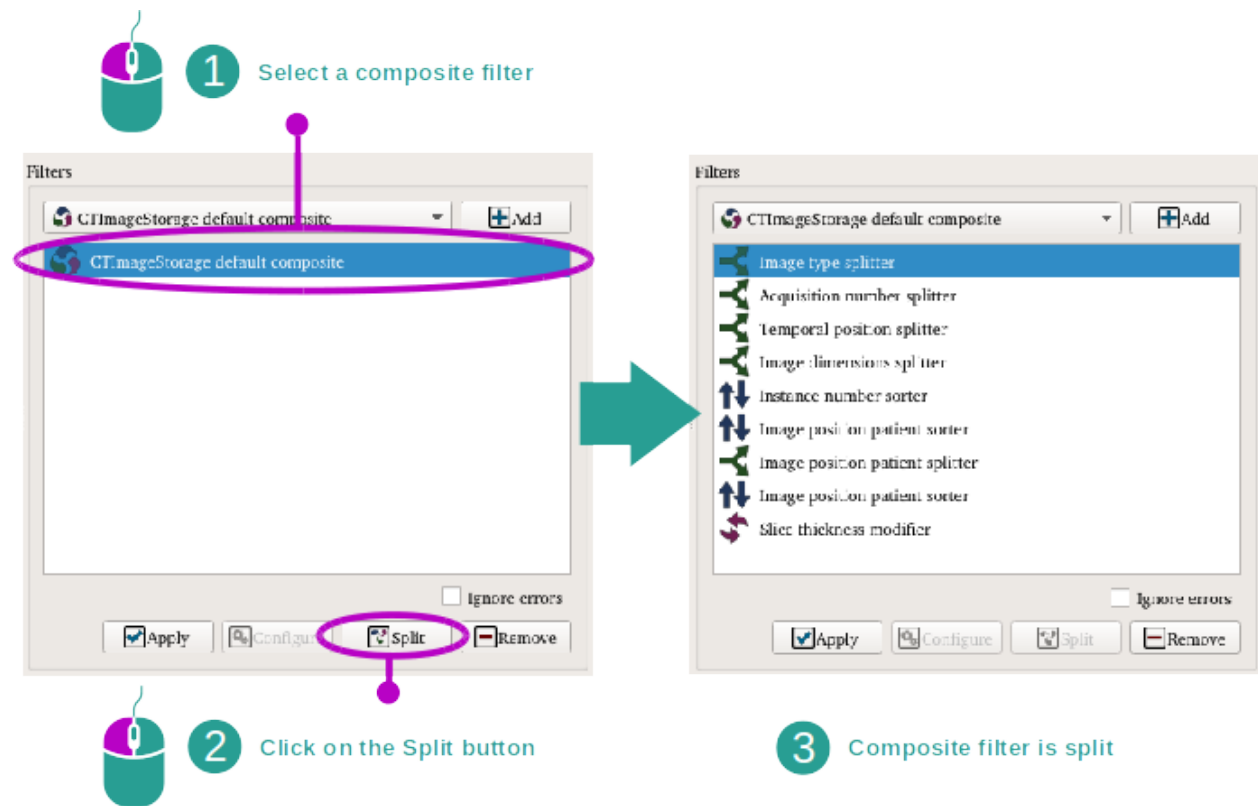

A composite filter can be split by selecting it in the filter list and clicking “Split”. The different filters composing the filter composite will be added to the list.

Configure a configurable filter

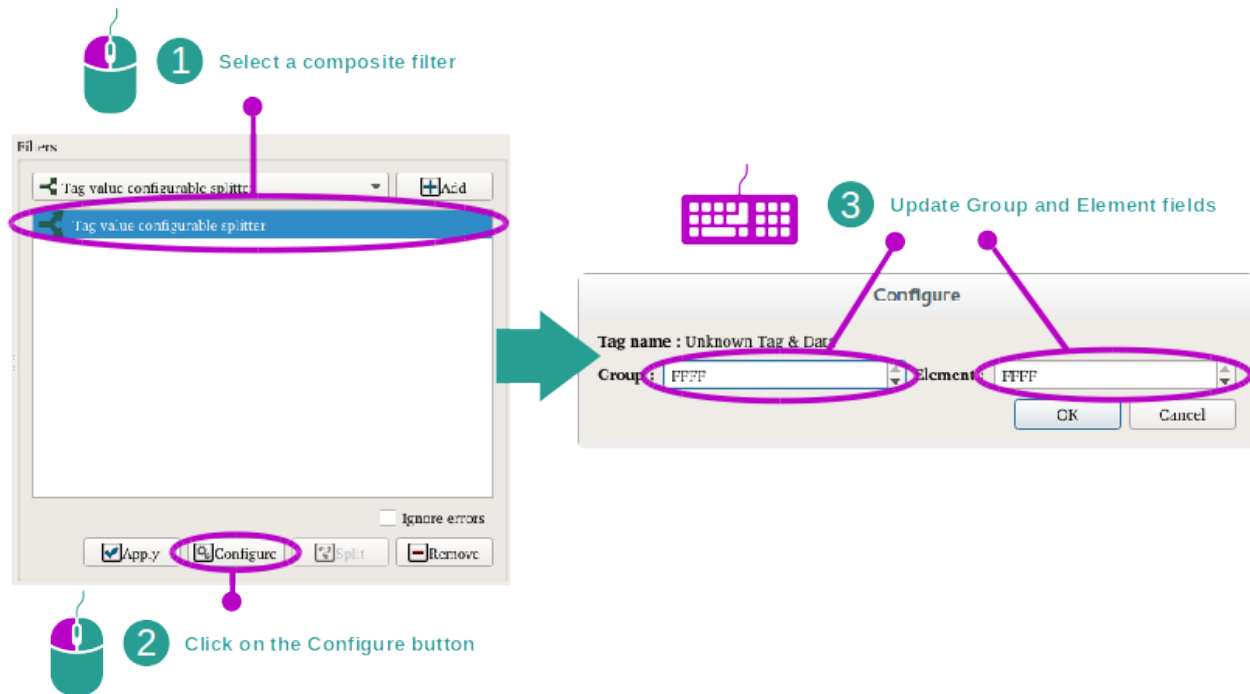

Certain filters can be configured. To manage the configuration of these filters the “Configure” button must be used. A dialog will appear allowing one to set up the values required to filter the series.

6.9 How to use the modeling activity

The Modeling activity is dedicated to the creation of anatomical structure segmentations. This activity is used to create models and export activities used by the medical teams.


6.9.1 Conditions préalables

In order to start an existing Modeling activity, a modeling series is required. Typically, these data are loaded from a VPZ file. Select the series from Series activity (*Comment charger des données*) and click “Launch activity”, or double click the series.

In order to start a new Modeling activity, at least one image series is required (multiple image series can be used). Select the series from Series activity, click “Launch activity”, select “Modeling” and click “Ok”.

6.9.2 Activity overview

Let’s get familiar with the activity layout.

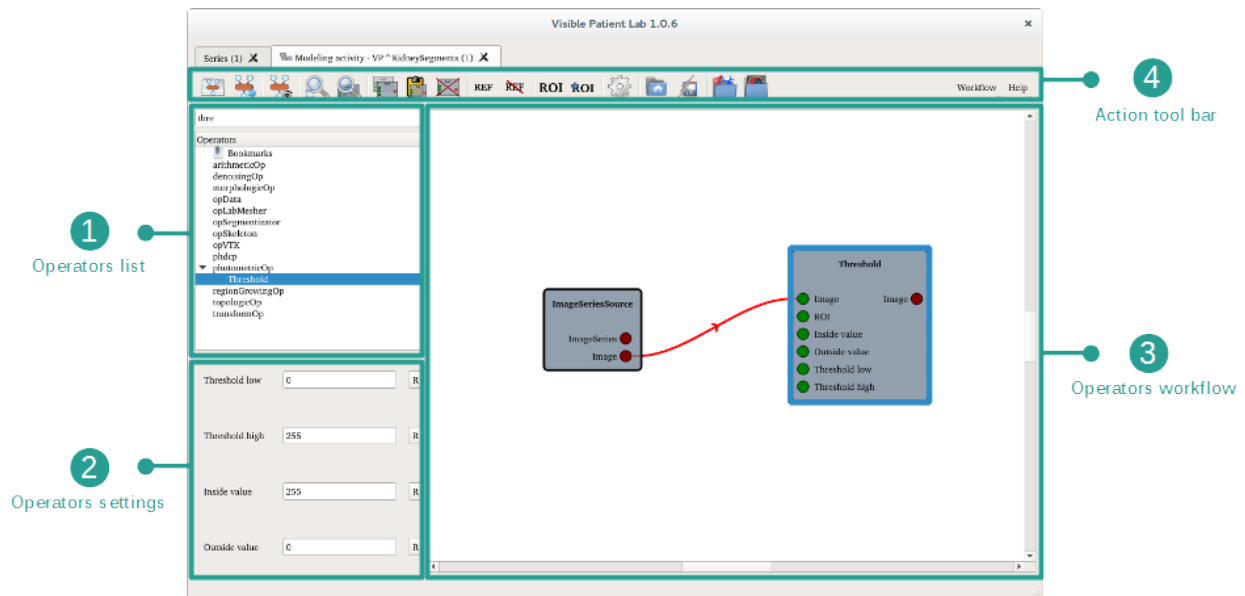

The main view shows current operators workflow. The workflow is created by adding operators from the operators list. The operators settings view allows to configure the selected operator. A toolbar provides some actions to interact with the workflow.

The workflow consists of a set of operators connected to each other representing a sequence of operations to apply on a source data (typically a medical image).


The modeling of some anatomical structures will be covered hereafter.

6.9.3 How to model an anatomical structure : skin


As an example, the following steps will be based on the modeling of a patient's skin.

Step 1 : Set up the process line

When started, the activity shows the input image as an ImageSeriesSource operator on the workflow : it is the source data of this workflow.

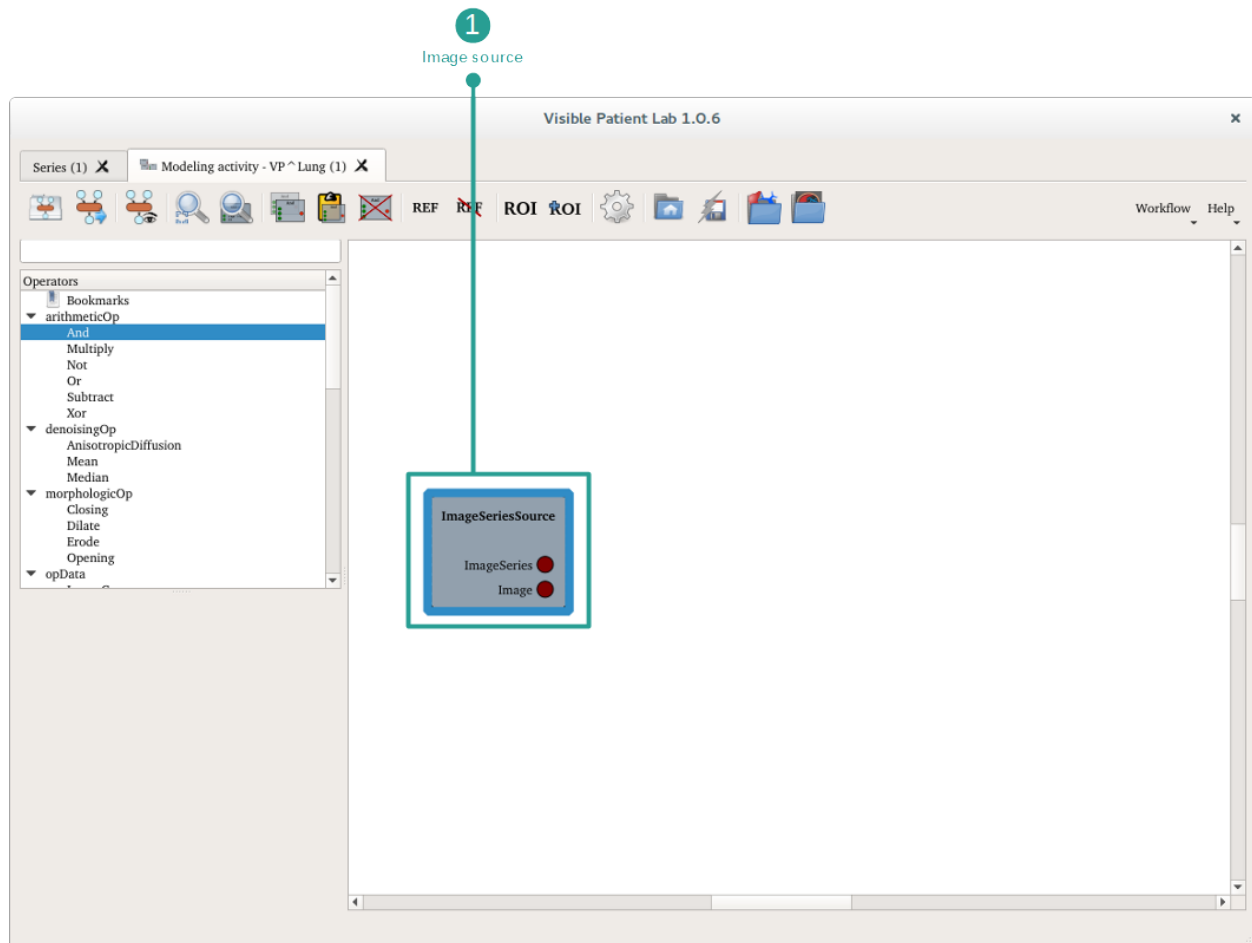

In order to model the skin from this image, an operator workflow must be created from the ImageSeriesSource operator.

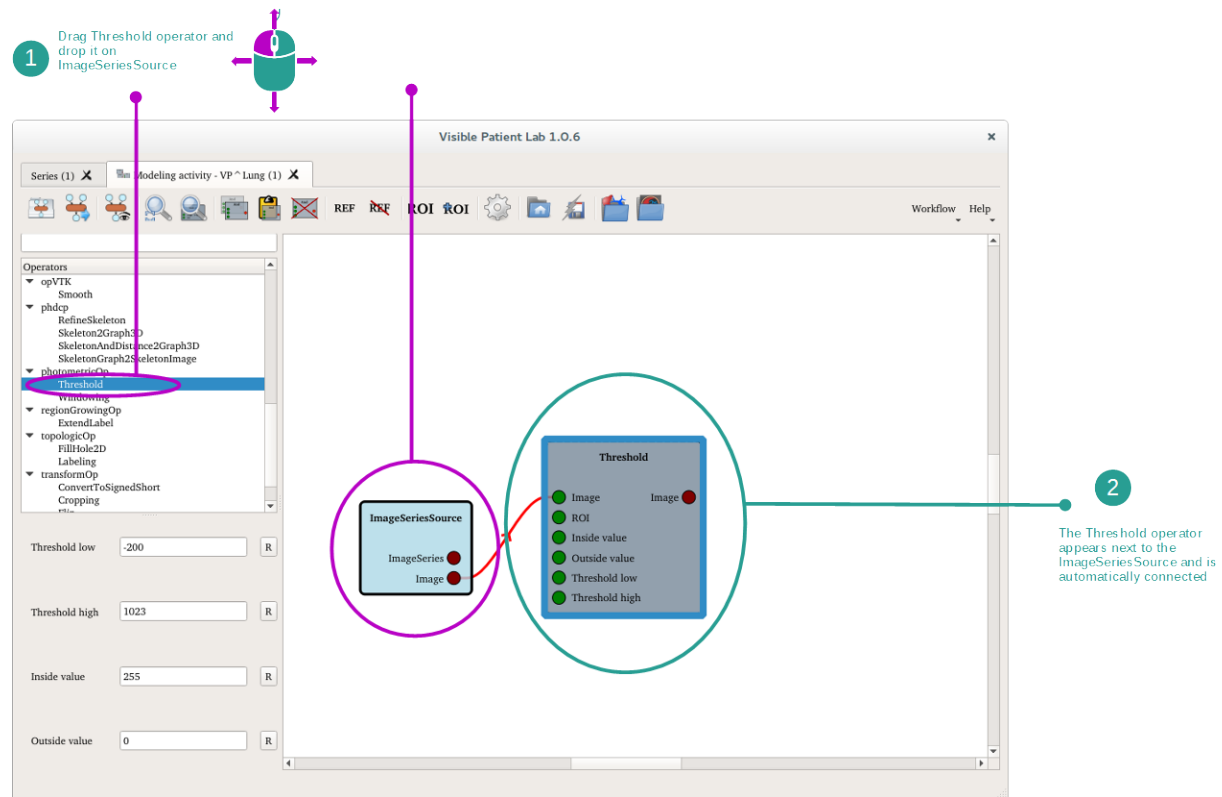


First of all, the Threshold operator needs to be added in order to highlight a range of voxel values identified as human skin, and clear other ones. Thus, the resulting image shows an approximation of the skin extracted from the input image.


The Threshold operator outputs a region of interest (ROI) which will be identified as the skin.



The ROI Manager provides a dictionary of anatomical structures which is used to organize the modeling workflow.

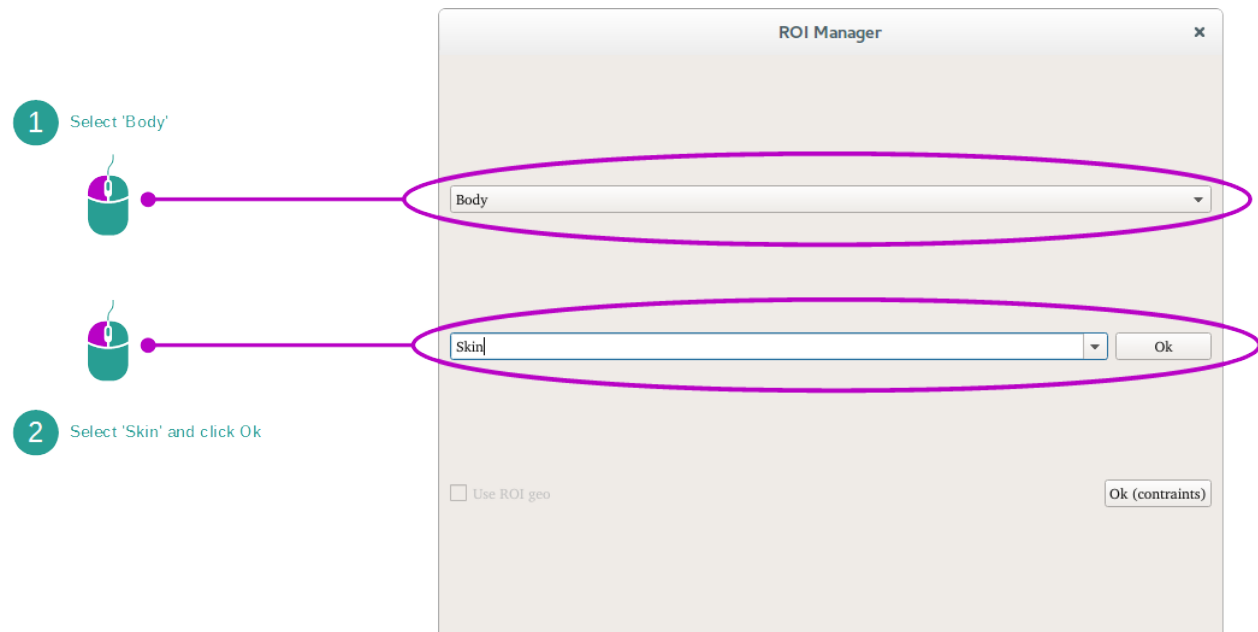


The Threshold operator is labeled as being the Skin. Since it is selected, its settings can be changed on the operator settings view.

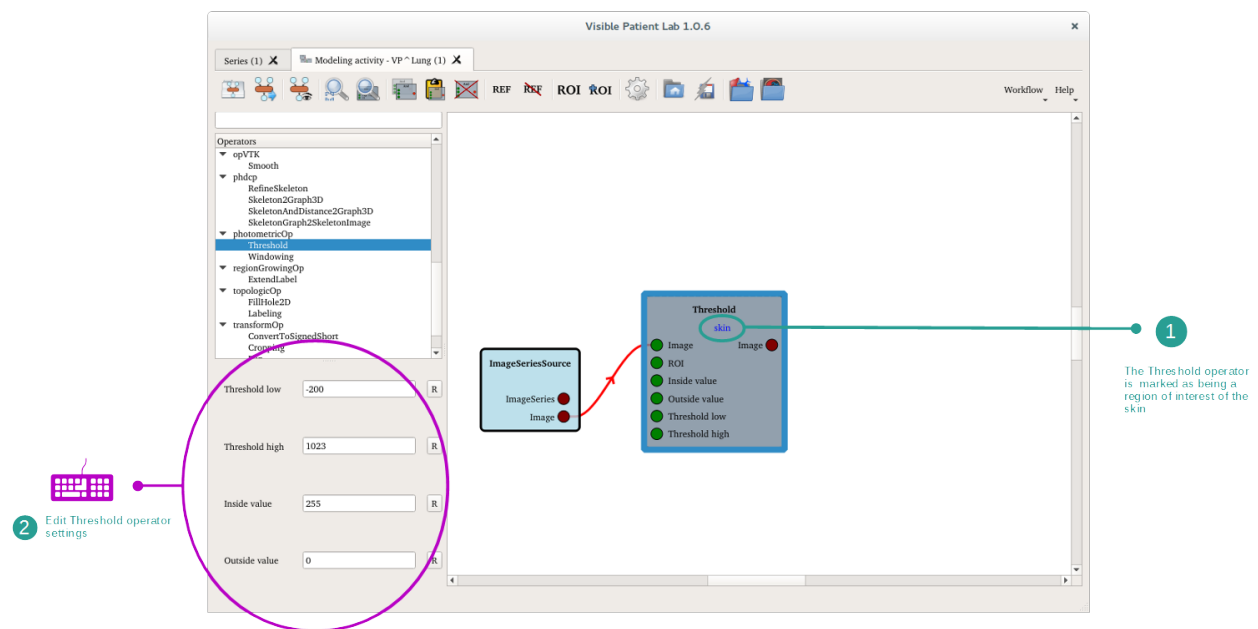

Step 2 : Add additional operators

Additional operators are needed for skin modelisation. Just like the Threshold operator, drag and drop operators from the operator list to the operator workflow.

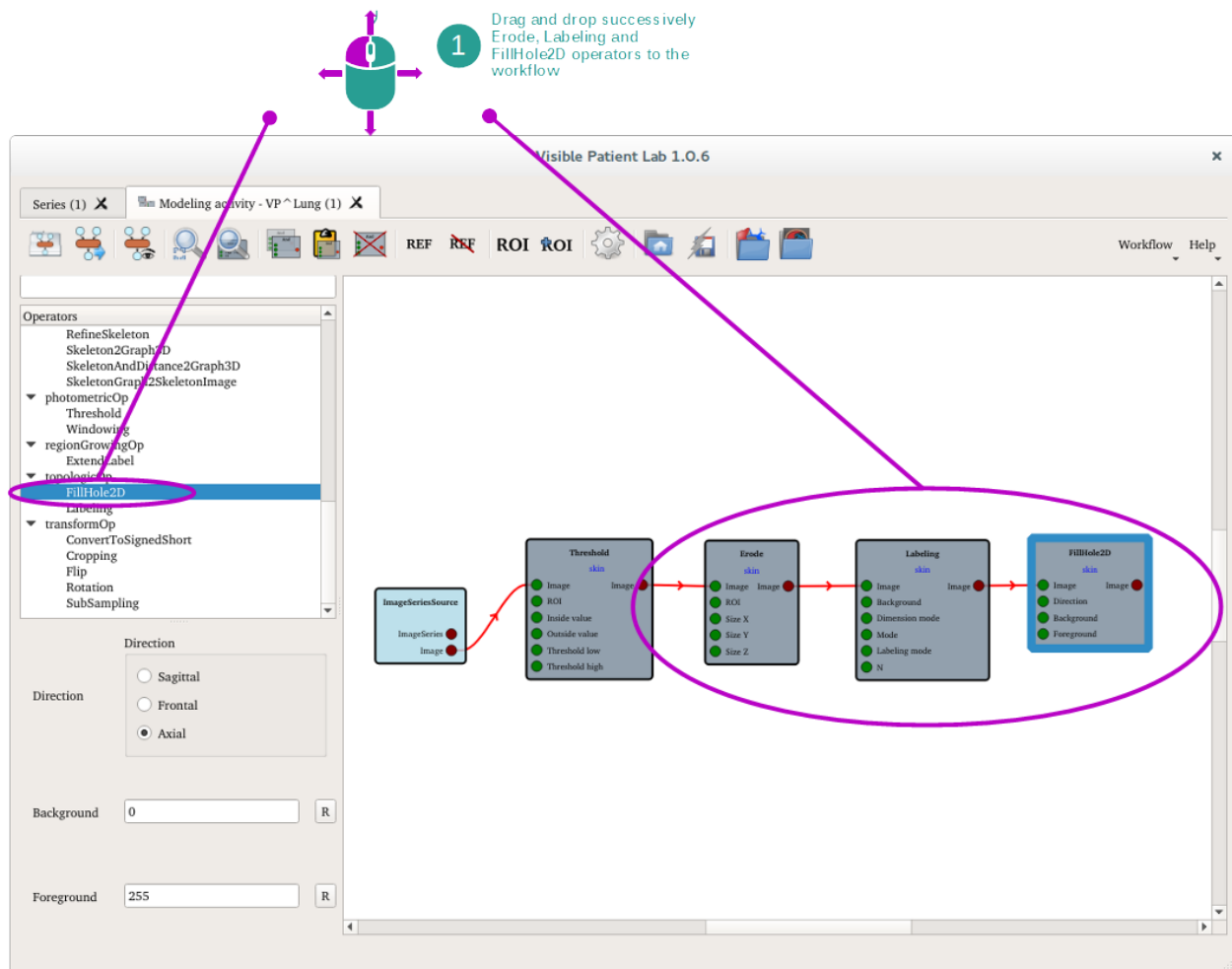

Each newly added operator is automatically marked as being part of the skin modelisation because the operator they refer to (Threshold) is already marked as being part of the skin.


Erosion operator (Erode) allows one to remove image artifacts in order to focus on the skin. Then, Labeling operator extracts the biggest object (the skin) and removes the others. At the end, FillHole2D operator fills the shape of the skin in order to fill the holes.

Step 3 : Execute the workflow

The operator workflow to model skin is now created and can be executed.




At the end of the execution, all operators have a new appearance to inform you that they have been executed.

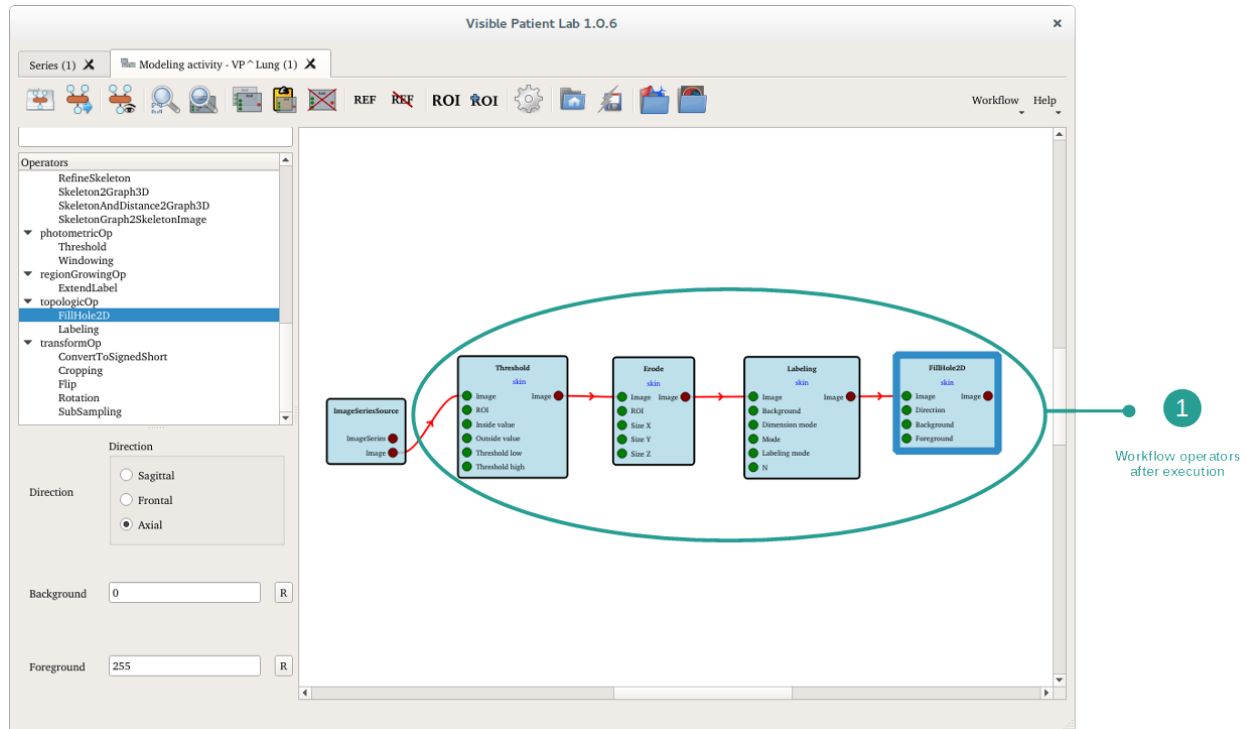

The result of the workflow can be viewed by opening the latest operator (FillHole2D).




The modeling of the skin is displayed in the operator's output.

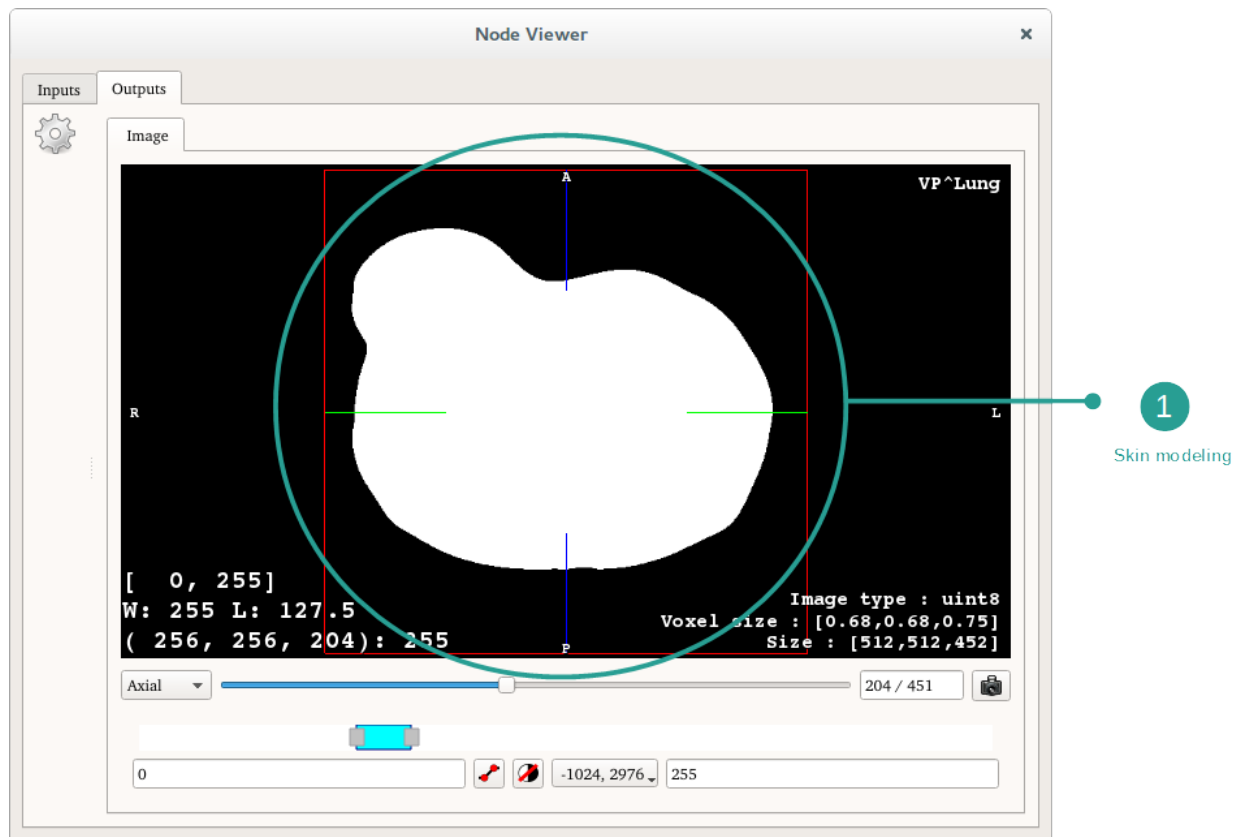


Step 4 : Validate the organ mask

The skin modeling is now finished. The resulting modeling is validated as being the skin image mask.

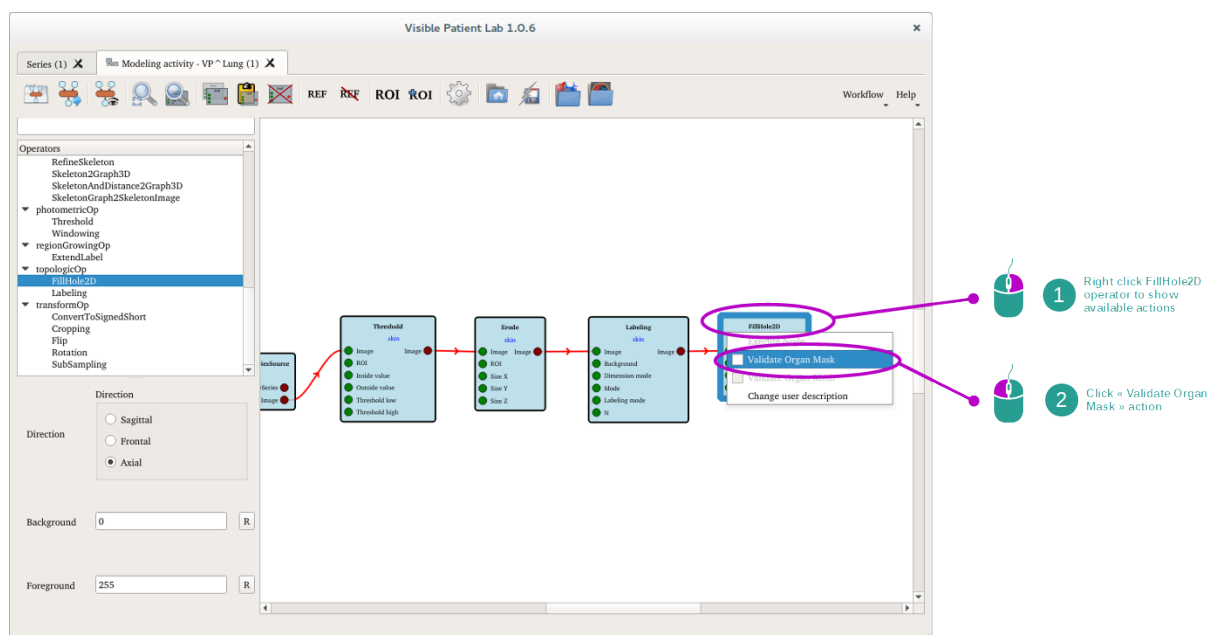

The FillHole2D is marked as being the skin image mask, which is the required input for subsequent 3D model proces-


sing.

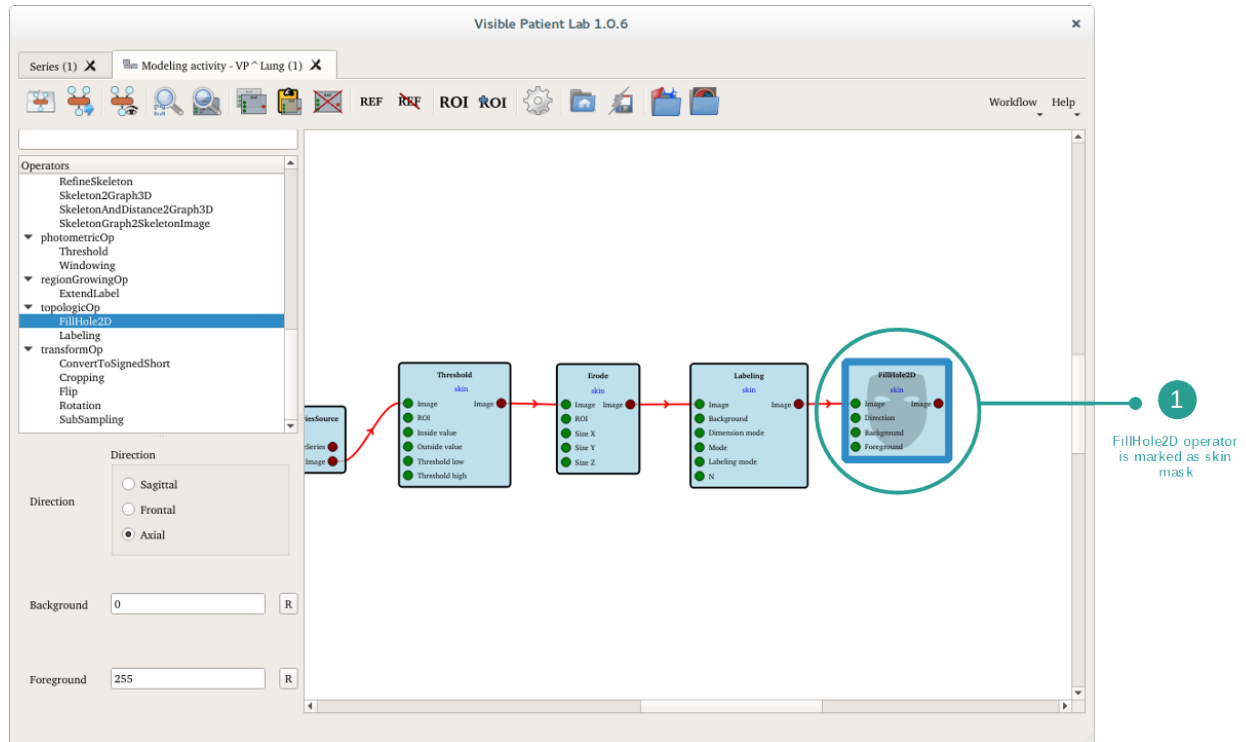


6.9.4 How to model an anatomical structure : the right lung


Step 1 : Set up the process line

The required operators for lung modeling are added.

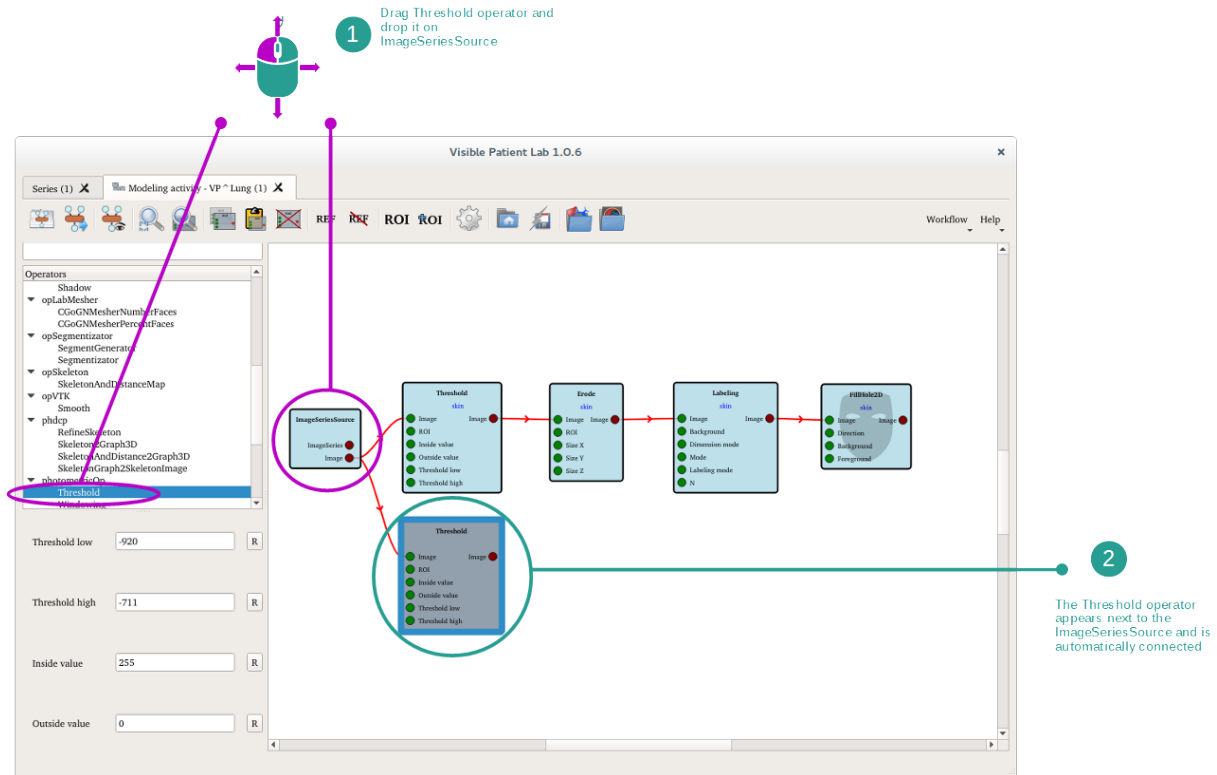


In order to identify the lung modeling on the workflow, the newly added Threshold operator will be labeled with a lung ROI.

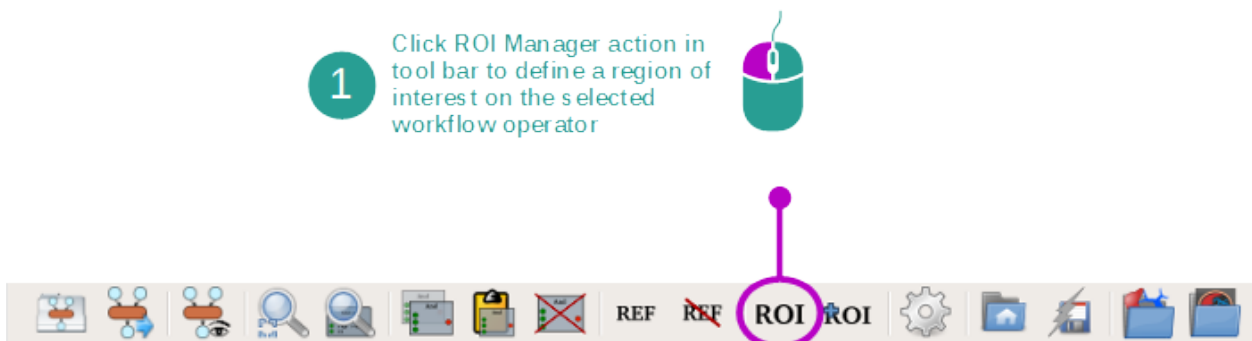

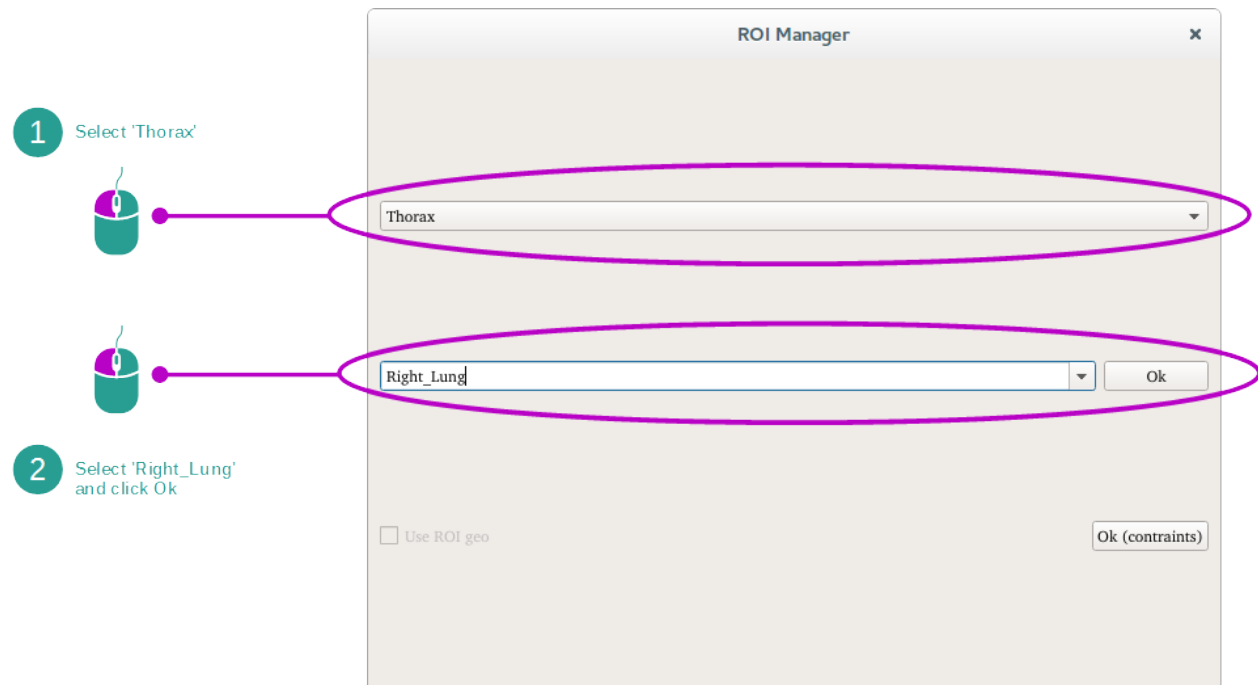


Per the anatomical structures dictionary, its ROI input is linked to the skin mask to inform that the right lung ROI is located inside the skin ROI. This relation comes from the dictionary which locates the lungs into the region of the skin.

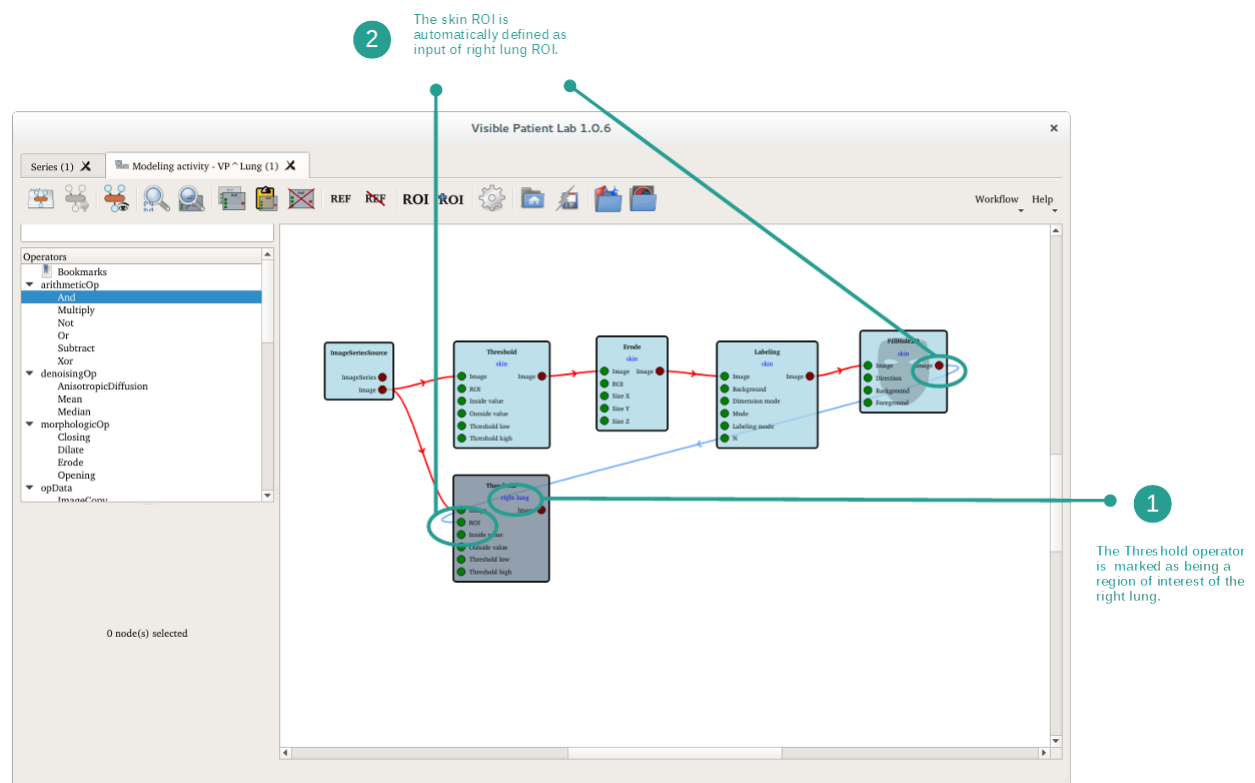

Step 2 : Add additional operators

Additional operators are added for lung modelisation. Just like the Threshold operator, drag and drop operators from the operator list to the operator workflow.

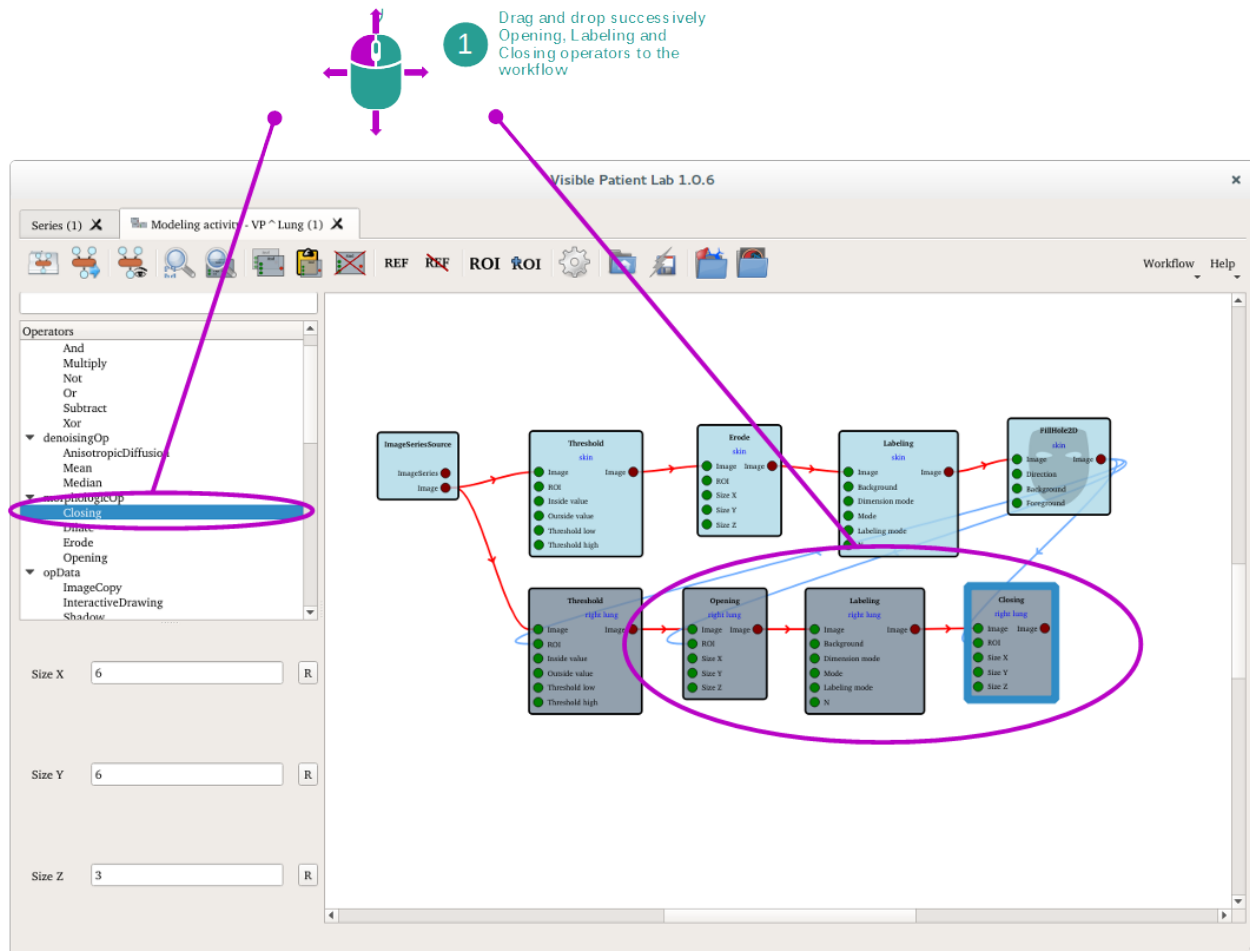


The Opening operator erases artifacts of the image (remaining object's size is preserved). The Labeling operator allows one to highlight the right lung. Then, the Closing operator fills small holes in the lung shape.

Step 3 : Execute the workflow


The operator workflow to model the right lung is now created and can be executed.



The result of the workflow can be viewed by opening the latest operator (Closing).

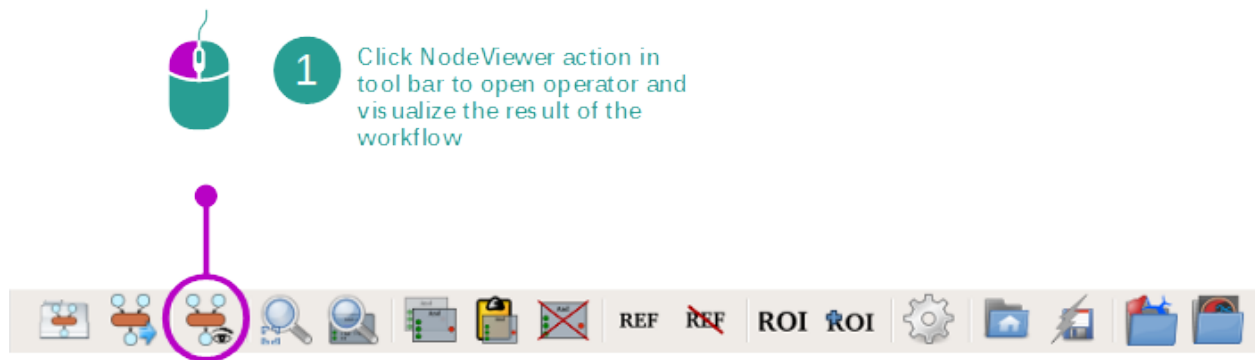


The modeling of the right lung is displayed in the operator's output.

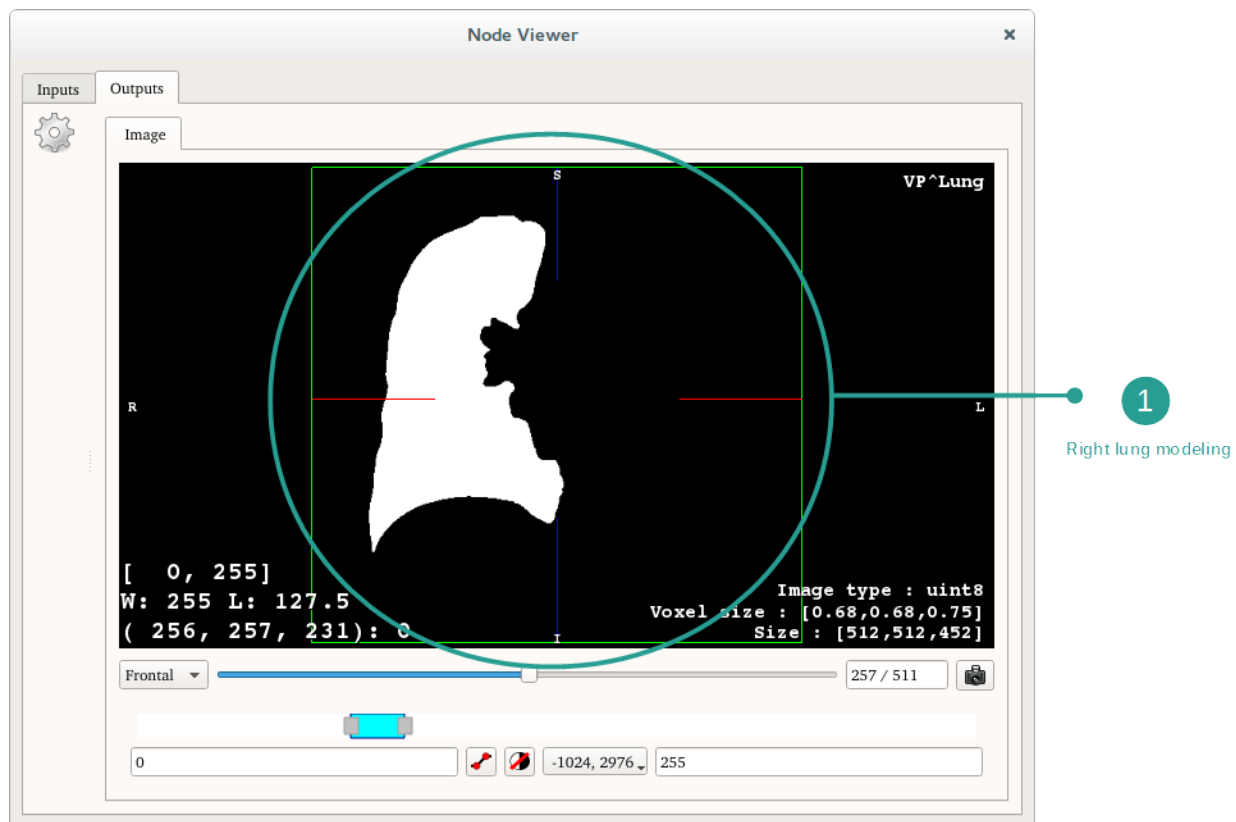

Step 4 : Validate the structure mask

The right lung modeling is now finished. The resulting modeling is validated as being the right lung image mask. The Closing operator is marked as being the right lung image mask, which is the required input for subsequent 3D model processing.

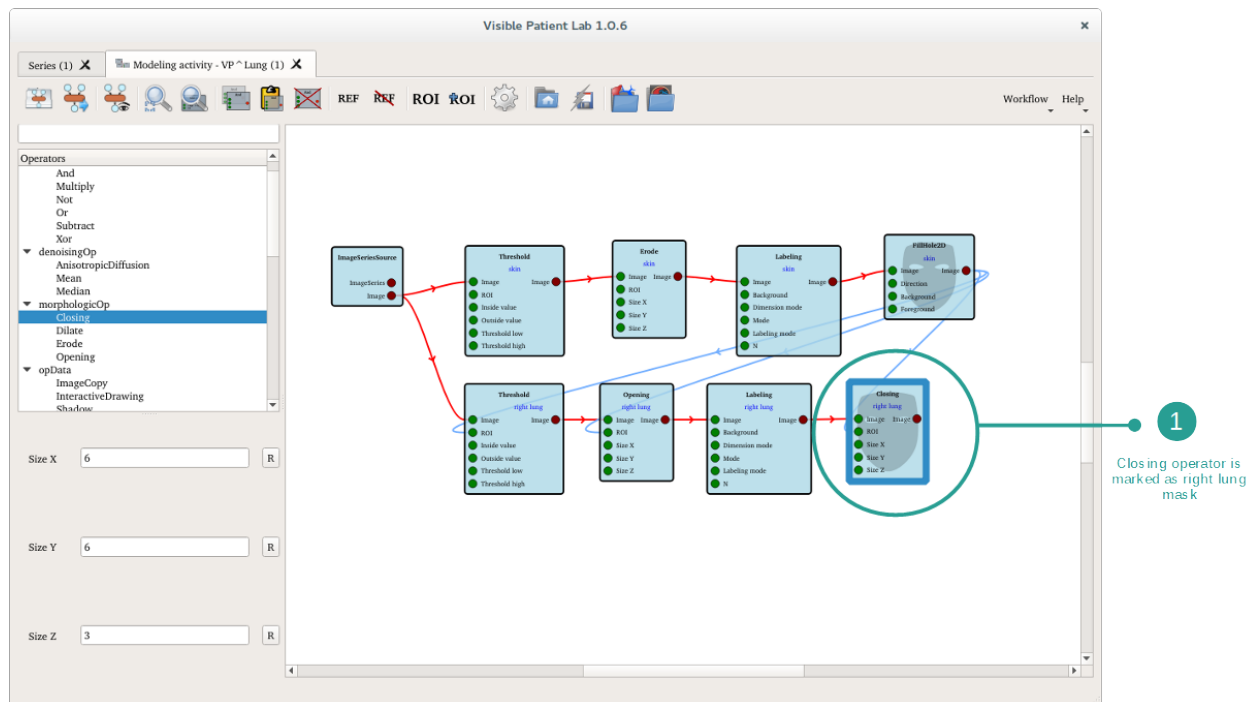


6.9.5 How to export an Anatomical Atlas activity

The modeling activity allows you to generate Anatomical Atlas activities.


Step 1 : Export the activity

Once the masks are validated, the reference image must be set (see [reference image](#)). To export an Anatomical Atlas activity click “Export Anatomical Atlas”.

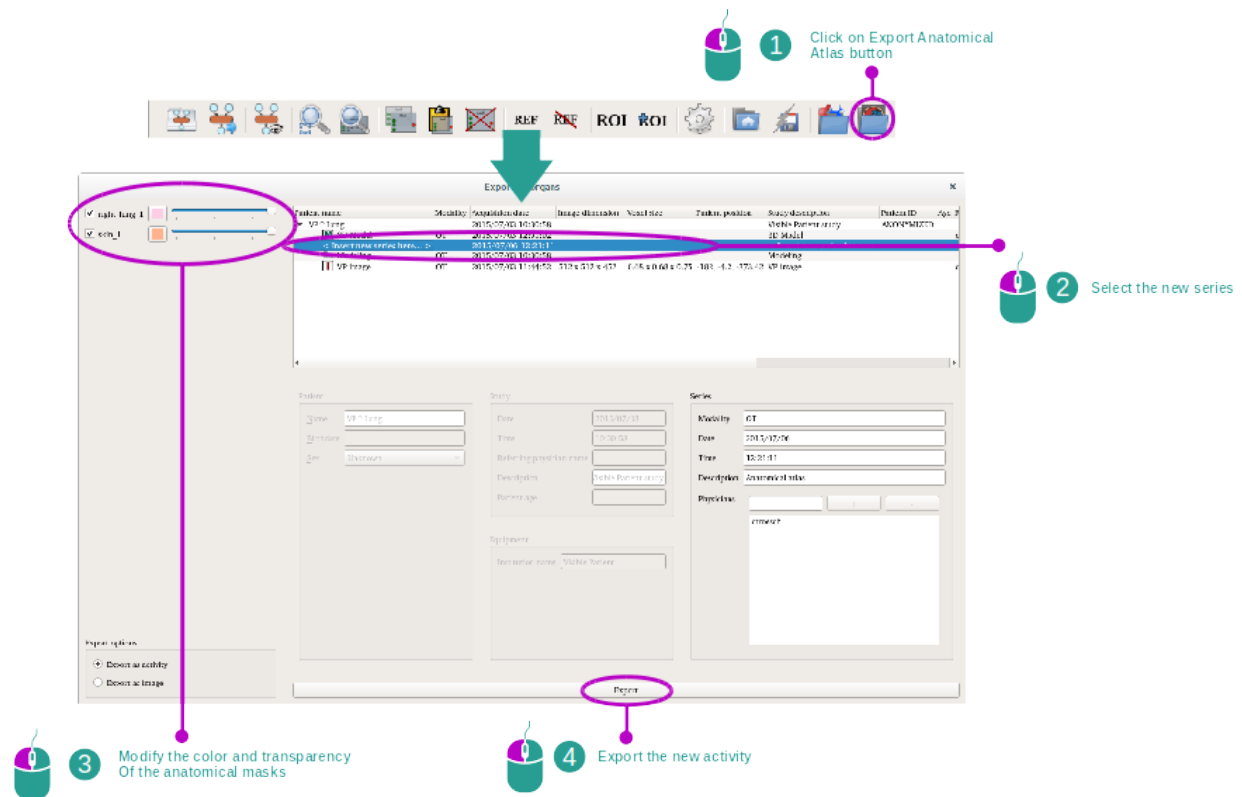

An export window appears, allowing one to select where to save the activity. You can also modify the color and transparency of the previously segmented anatomical structures. Click “Export” to export the new activity.

The Anatomical Atlas activity can now be started from the Series activity.

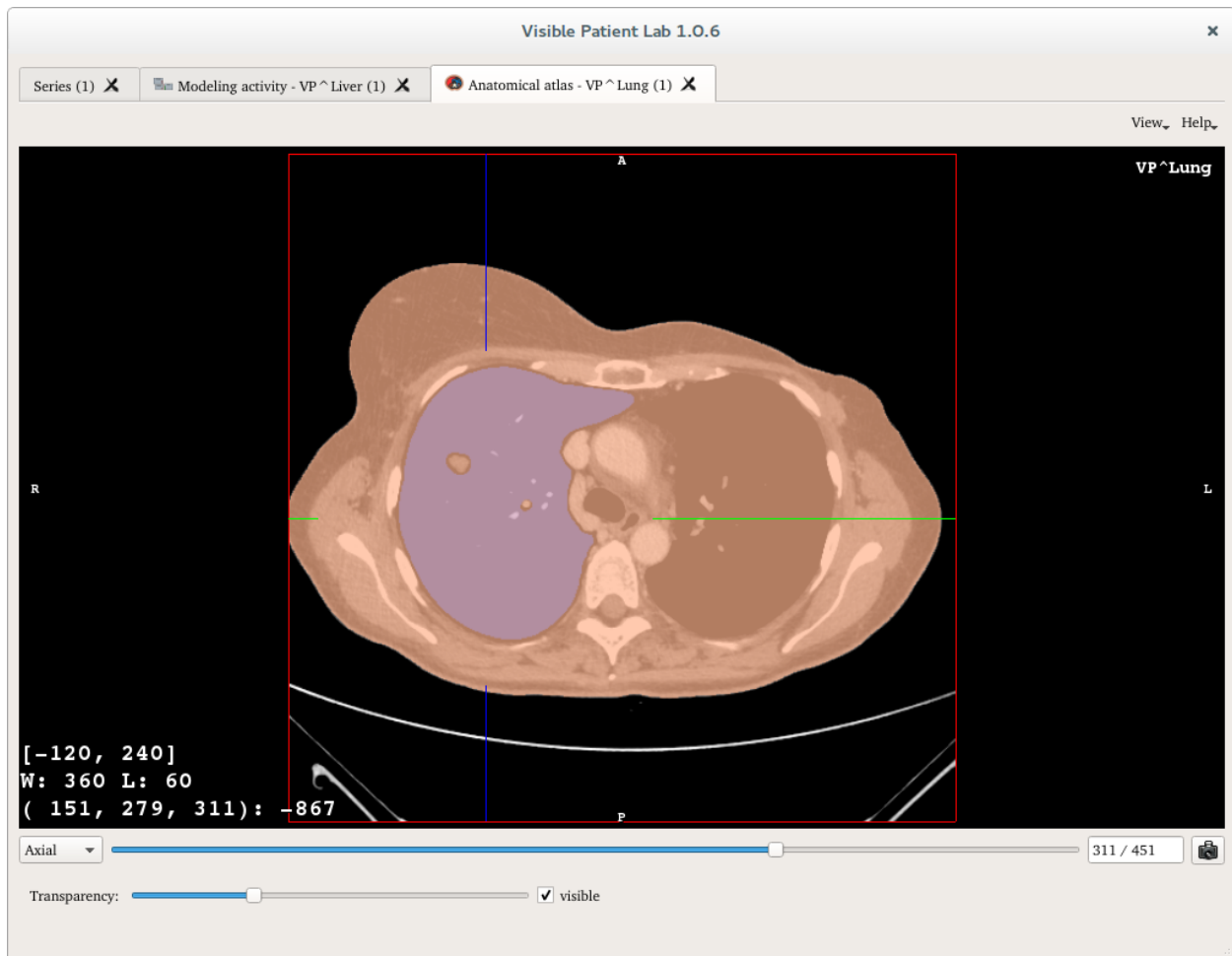

6.9.6 How to export a 3D Model


3D models can be generated from the modeling activity.

Step 1 : Add a mesher operator


To create a 3D model, connect CGoGNMesherNumberFaces operators to each of your anatomical structures masks.



Now, validate the anatomical structures meshes by right clicking on the operators and selecting **Validate Organ Mesh**.

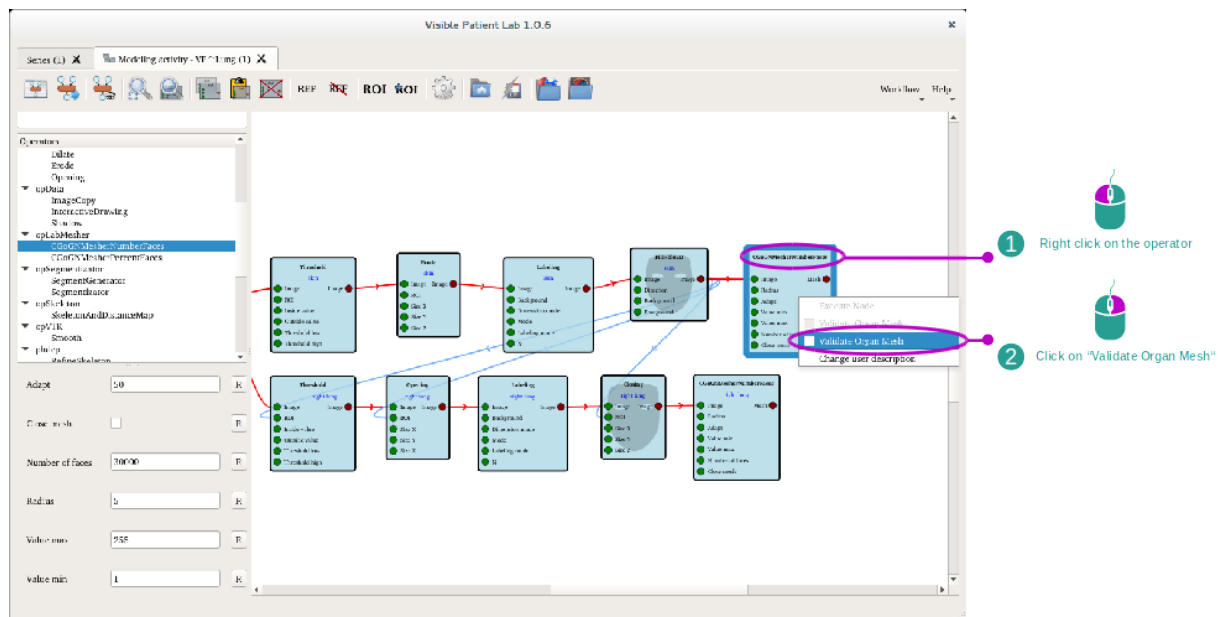


Once the operators are validated, a wireframe mask appears on them, symbolizing a 3D model.

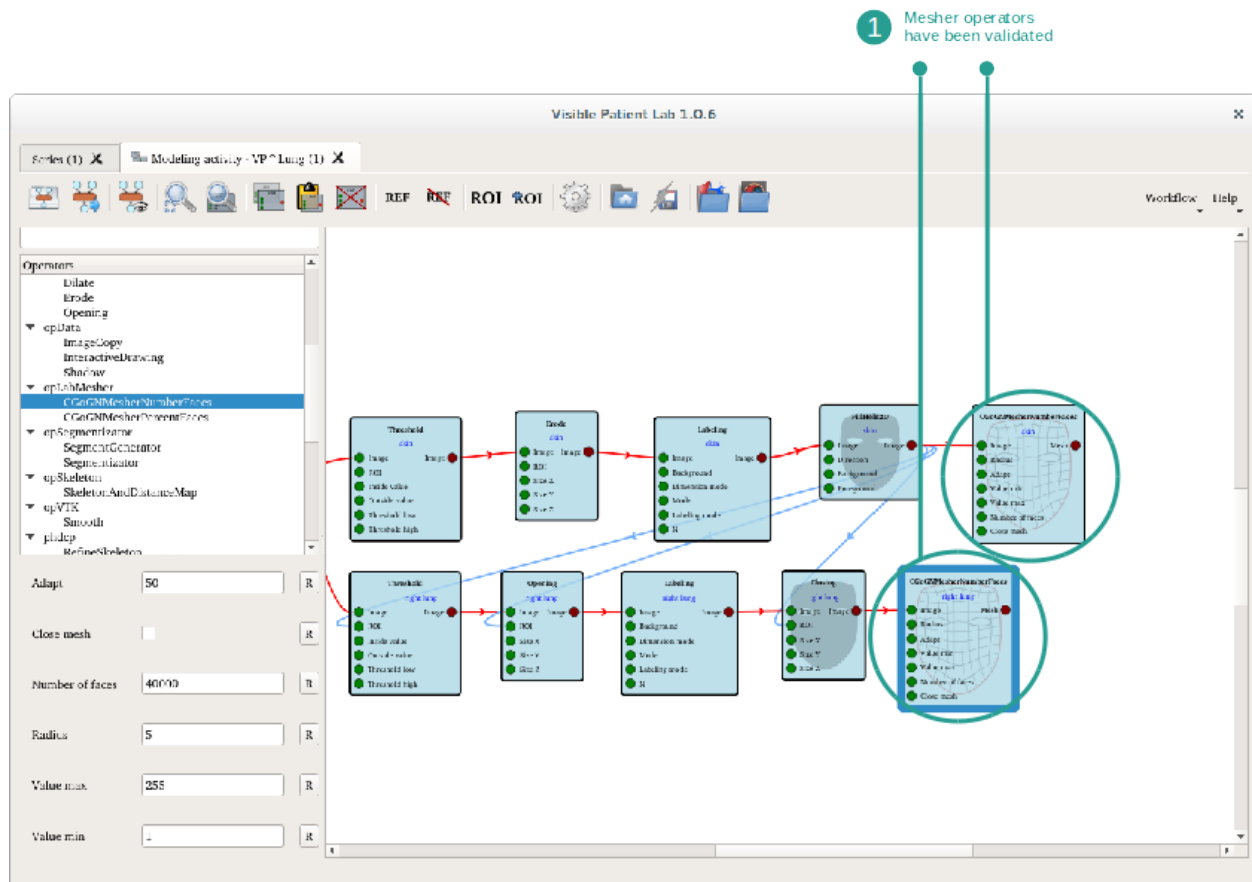


Step 3 : Export the 3D model

Click “Export Model” to export the 3D model. An export window appears and lets you select in which study the model must be exported. The color and transparency of the anatomical structures present in the model can be changed before export.

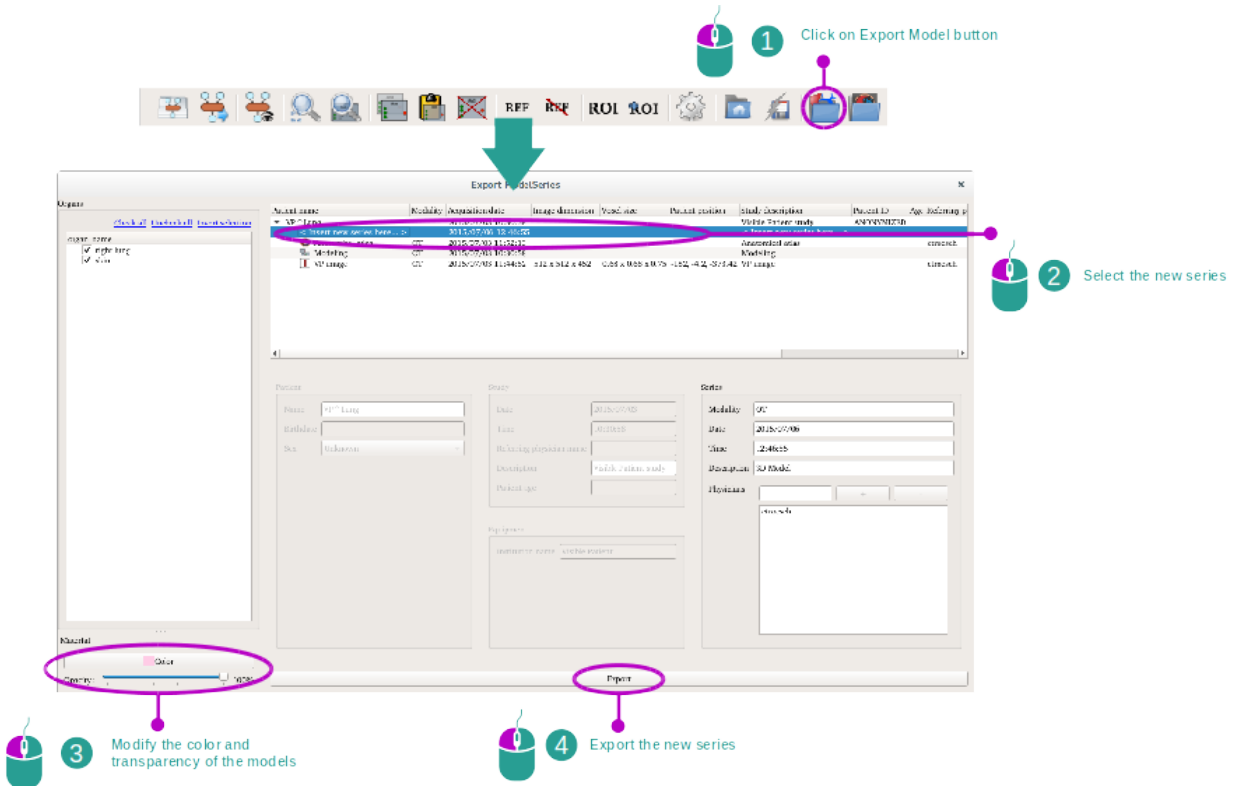

Once exported, the model appears in the Series activity. You can then use it in several activities.

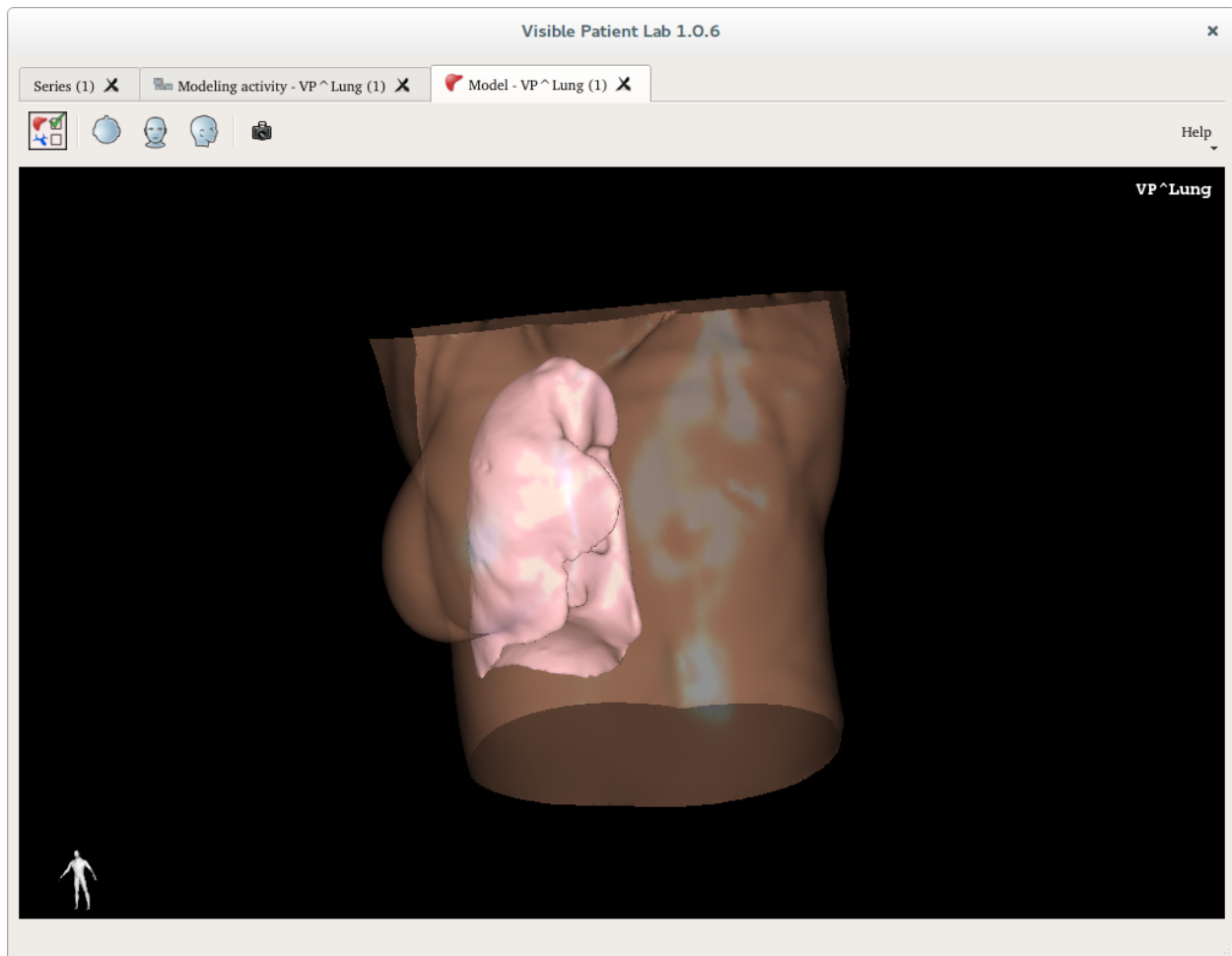


6.9.7 How to use modeling interactive tools : bronchus

The modeling activity contains an operator, which provides a way to interactively create a segmentation. The operator InteractiveDrawing allows the image analysts to draw, erase, fill or use propagation tools to delimit a section of an image.


Step 1 : Set up the process line

In order to use the interactive tools, add an InteractiveDrawing operator to your process line. In this case, we are going to model the bronchus network, so we add the bronchus ROI to the operator.

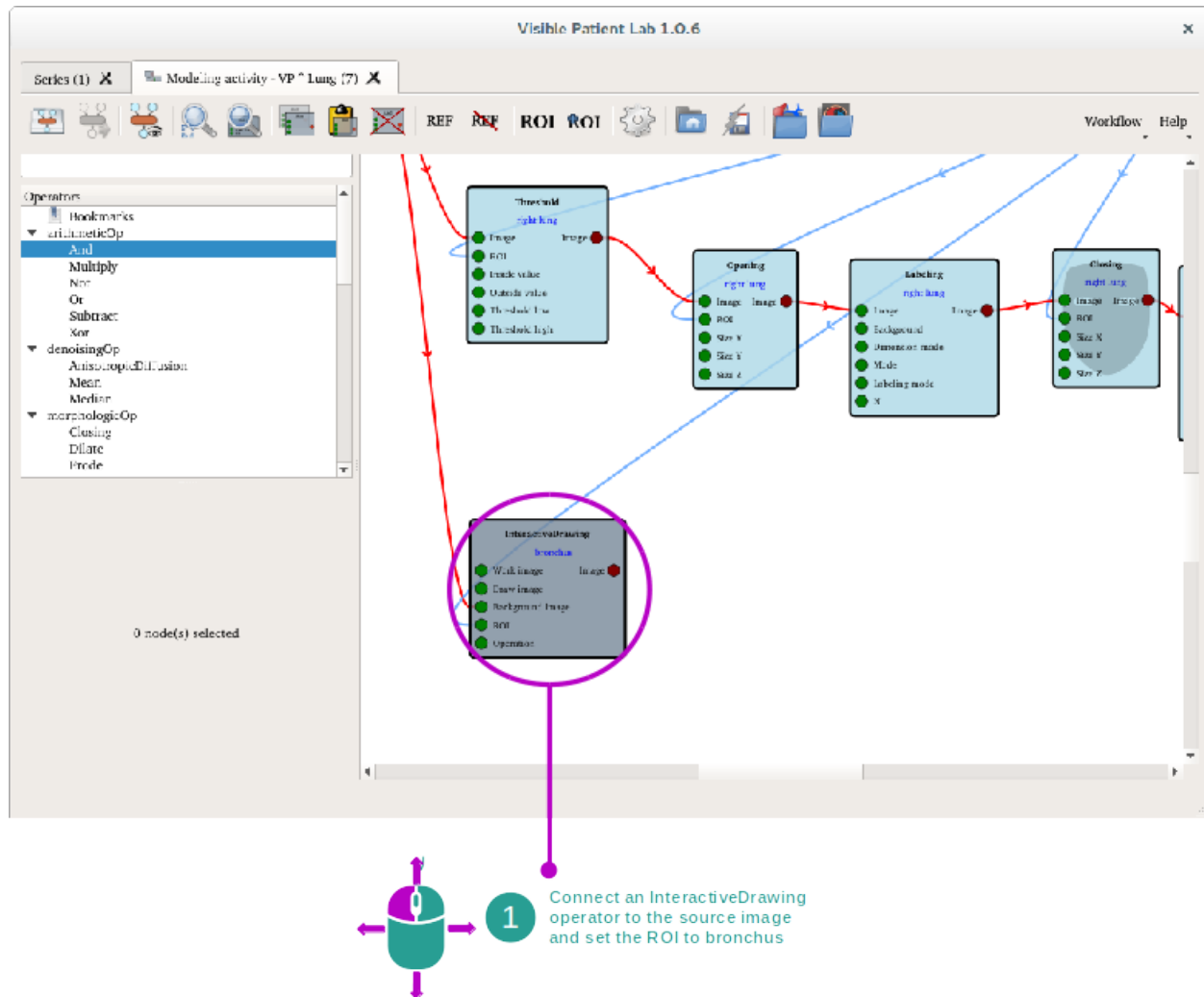


Step 2 : Use the interactive tools

In the node viewer of the operator, several views are displayed. The action toolbar contains several drawing tools that can be used to fill the mask. This bar also contains undo/redo operations. On the left side, a parameters and information toolbar displays information such as picked values, or configuration for the propagation tools. Finally, the main view is used to color the pixels in order to create the anatomical structure mask.

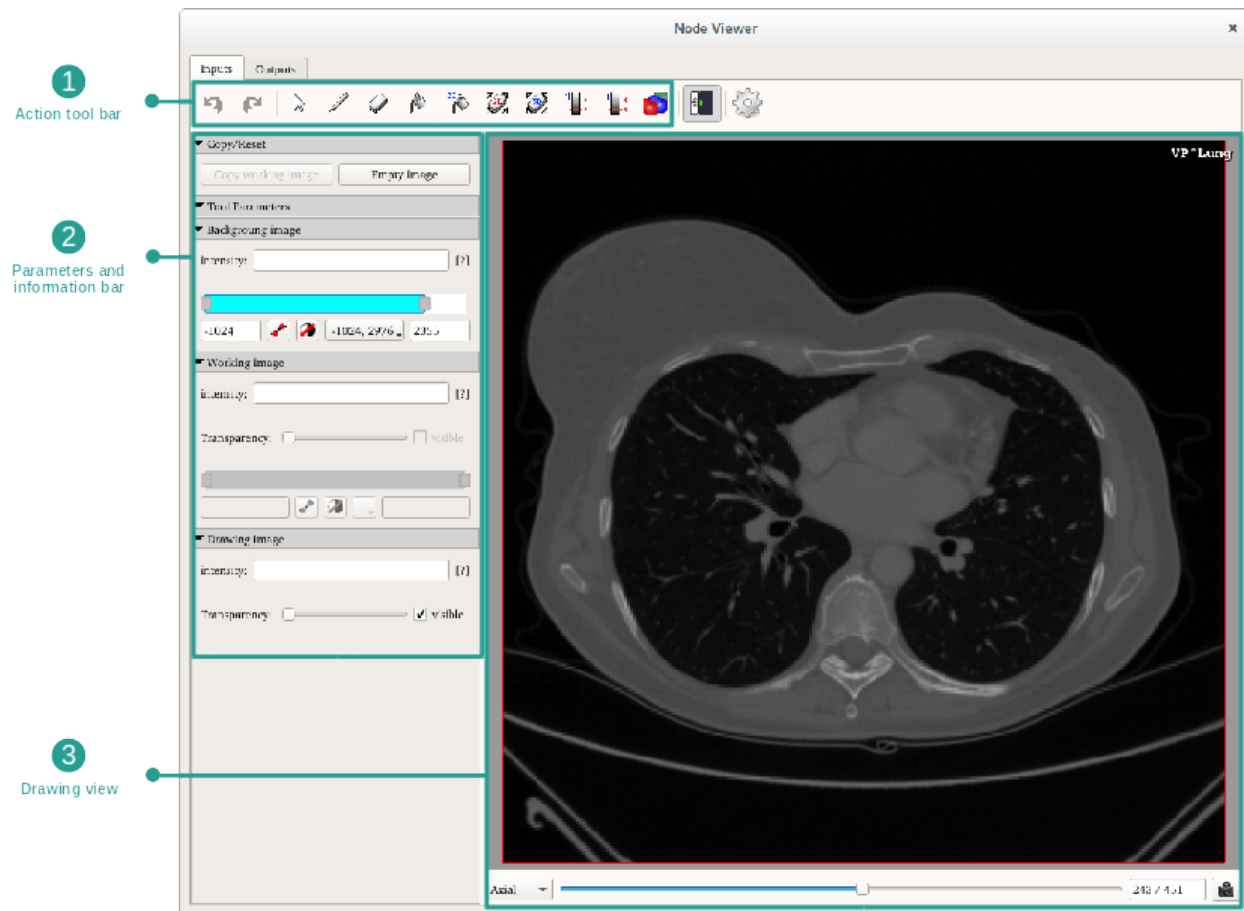


When coloring the view, the mask appears above the original image.

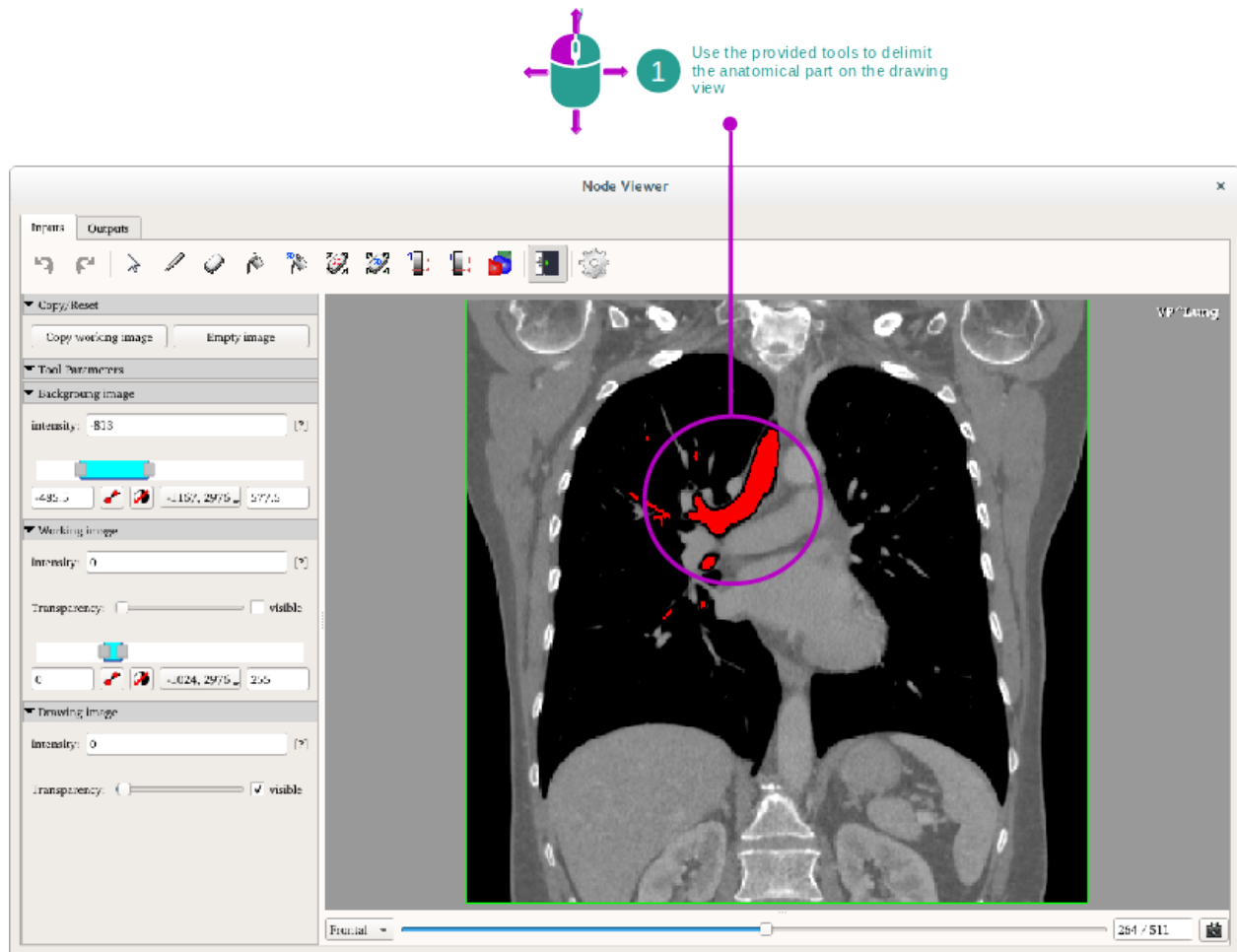


Step 3 : Generate the anatomical structure mesh

Once the mask has been drawn, the operator must be executed to generate the image output. The anatomical structure mask can then be validated. The next step is to add a mesher to generate the anatomical structure mesh.

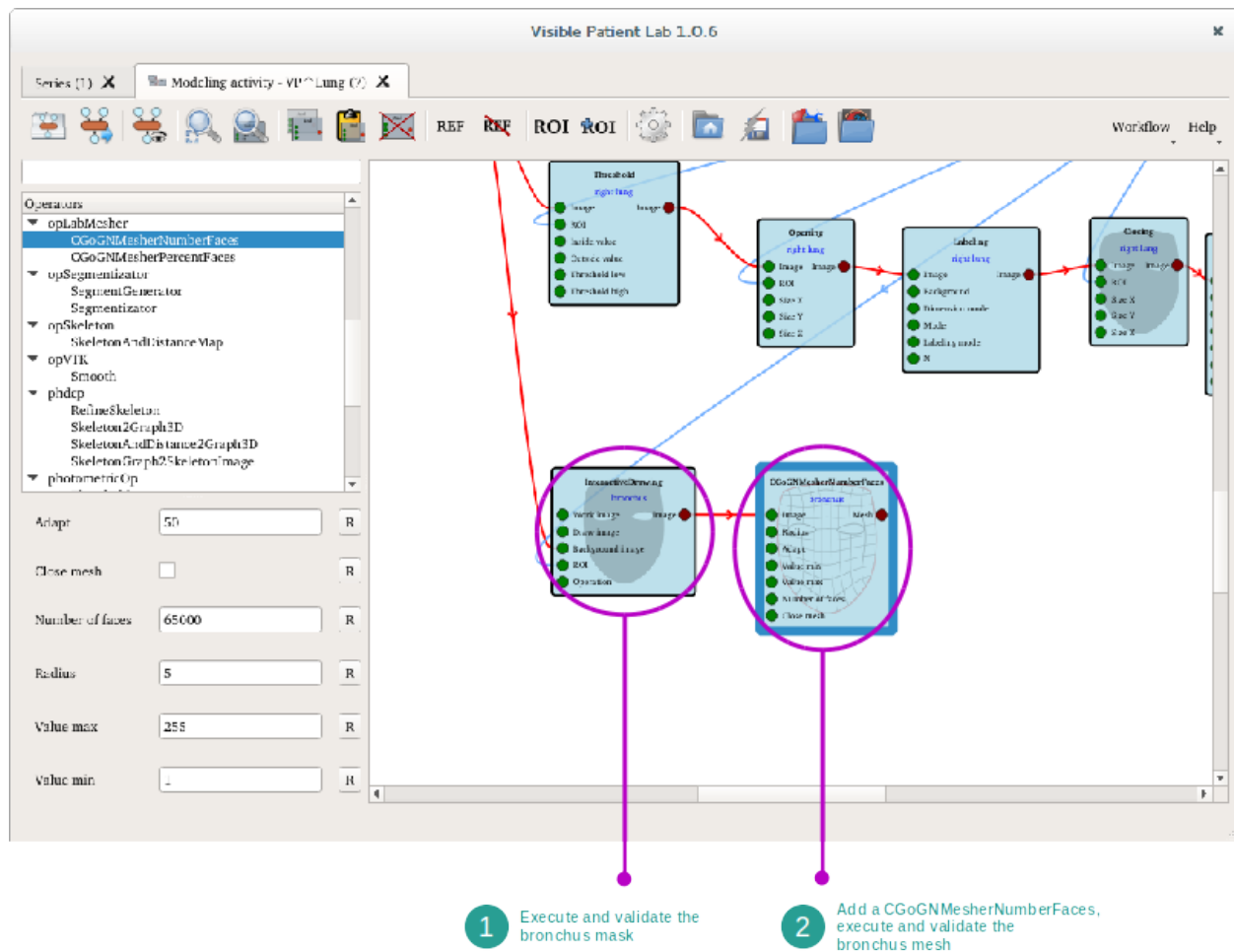


Finally, when the mesh has been generated, the final output can be visualized in the mesher's node viewer.

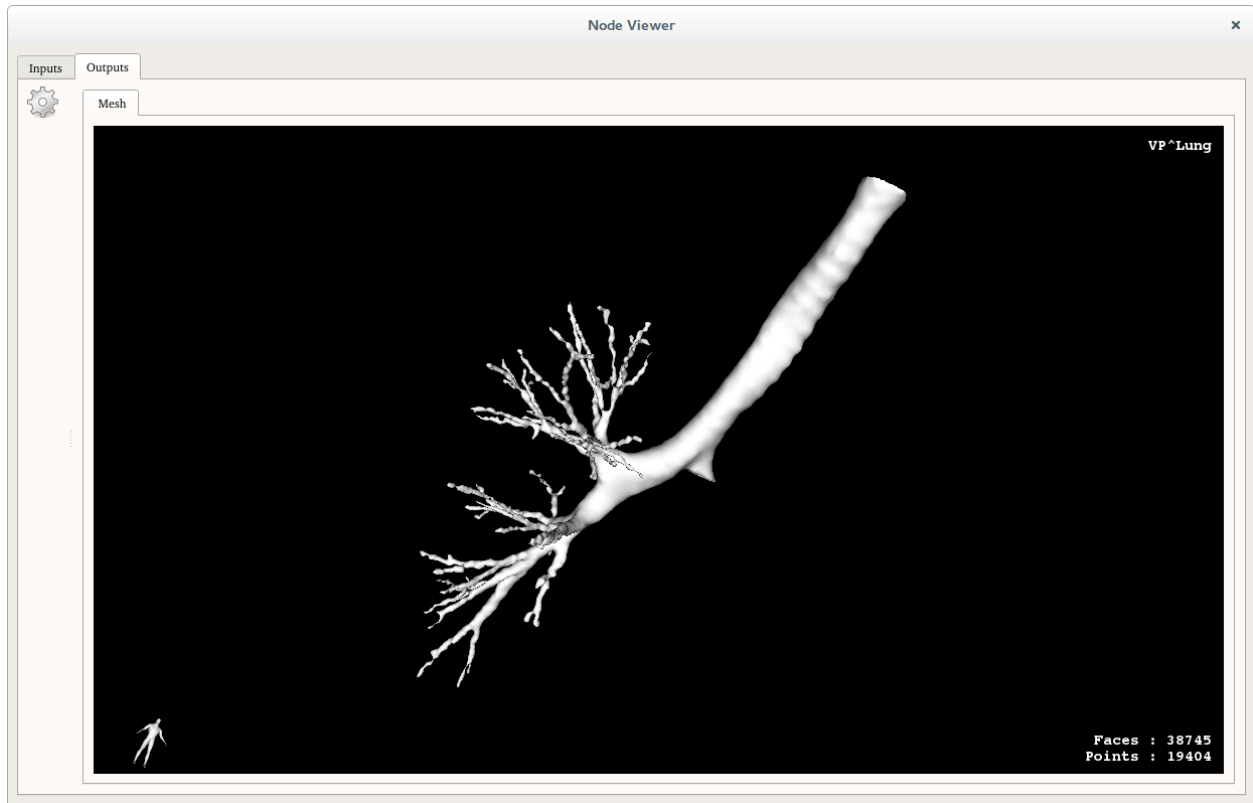

6.9.8 How to compute vascular and airway territories approximations

Vascular and airway territories approximations are used in the Clip Applying activity. The following steps explain how they are computed.


In the following example, we are going to compute an approximation of a right lung's airway territory. To do so, the computation will be based on the bronchus network. This technique also works on the liver using the portal vein, and on kidneys using the arterial network.

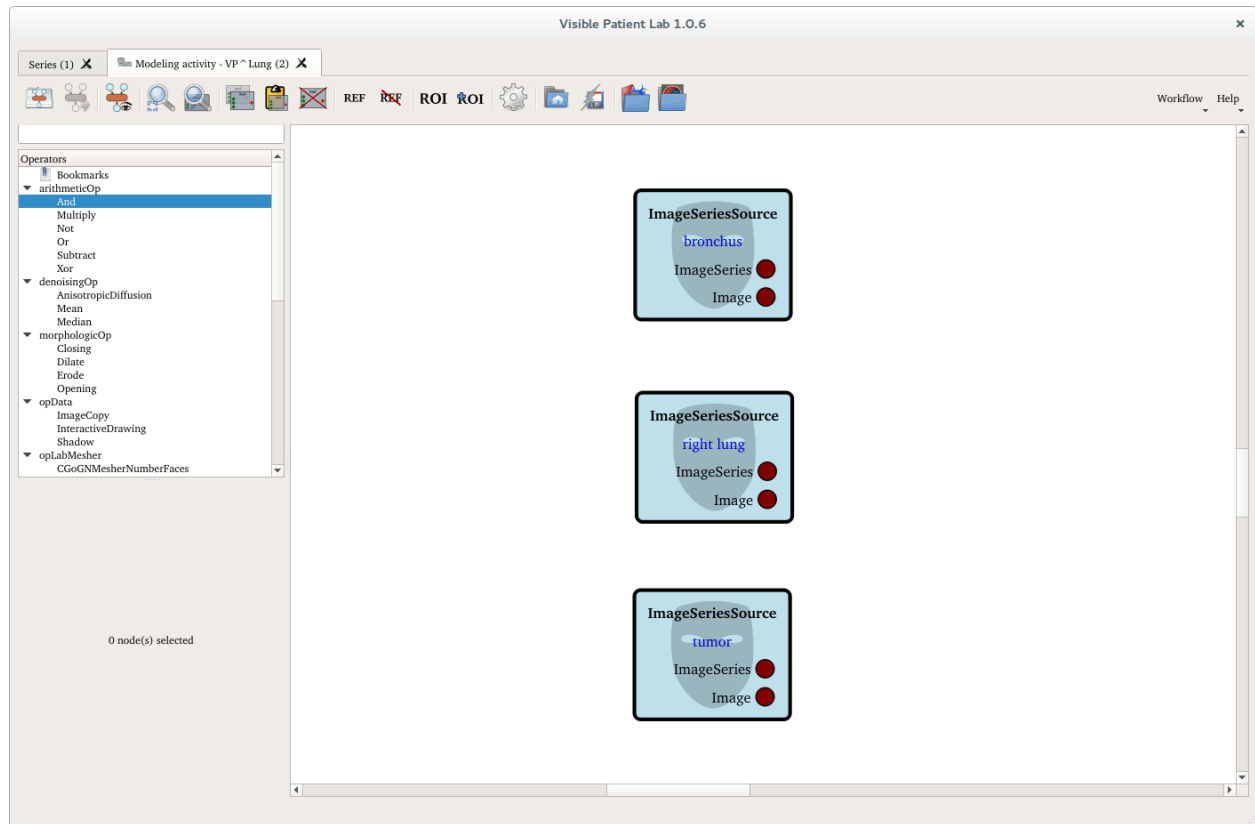

In order to perform this computation, the targeted organ and the network masks are needed. As the lung contains a tumor, the associated mask is also needed in order to compute the correct volumes.

Step 1 : Compute the network graph

In order to compute an approximation of the airway territory, the first step is to compute the associated network skeleton. To do so, the SkeletonAndDistanceMap operator is used. This operator uses the network mask to generate the central path of the network.

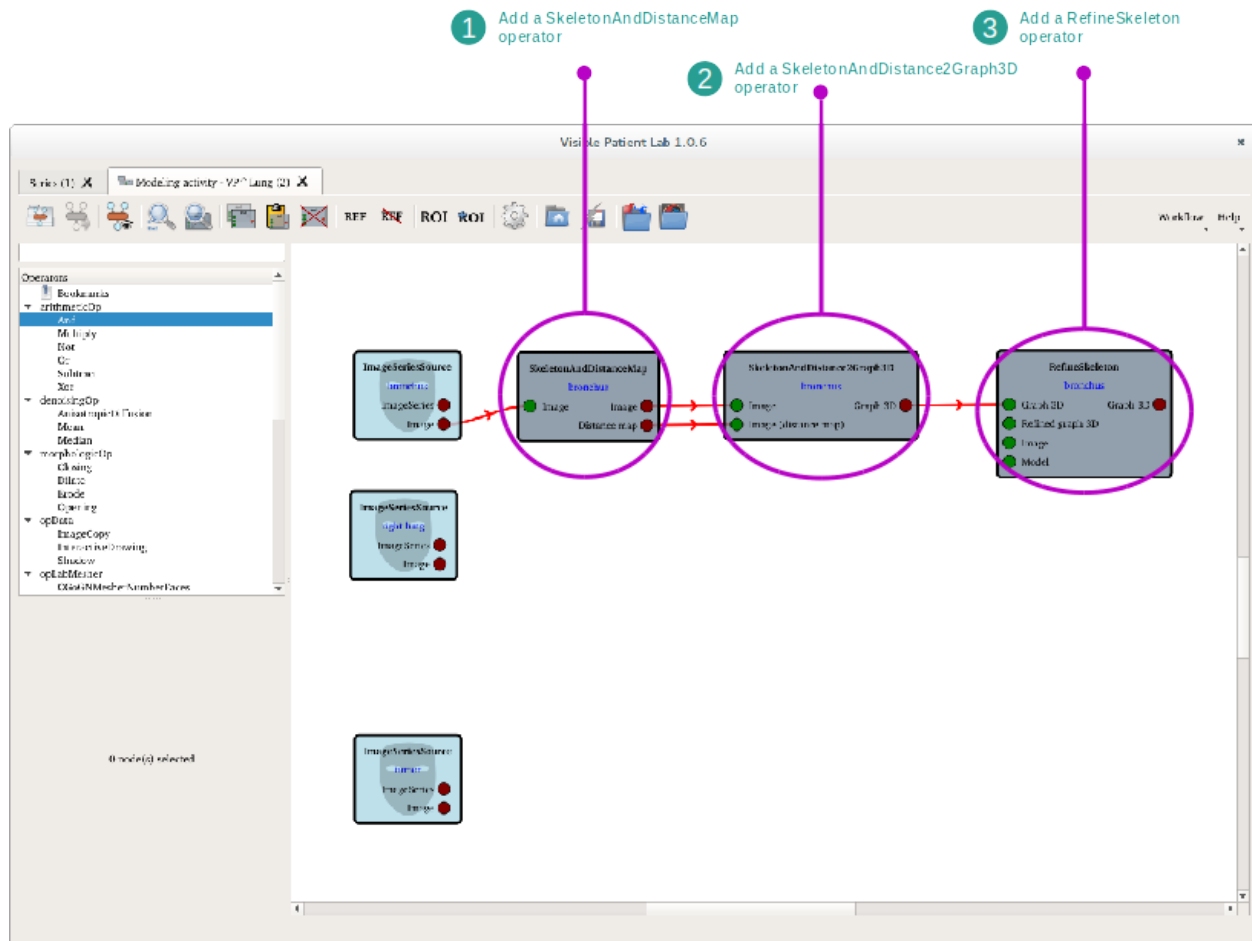


The next operator that must be added, is the `SkeletonAndDistance2Graph3D` operator. It takes the outputs of the previous operator and creates a 3D model of the network.


Finally, the RefineSkeleton operator provides an interactive tool to refine and label the network graph.

Step 2 : Refine and label the network graph

The RefineSkeleton operator includes multiple tools to improve the shape and simplify the network graph. It also provides tools to label it.

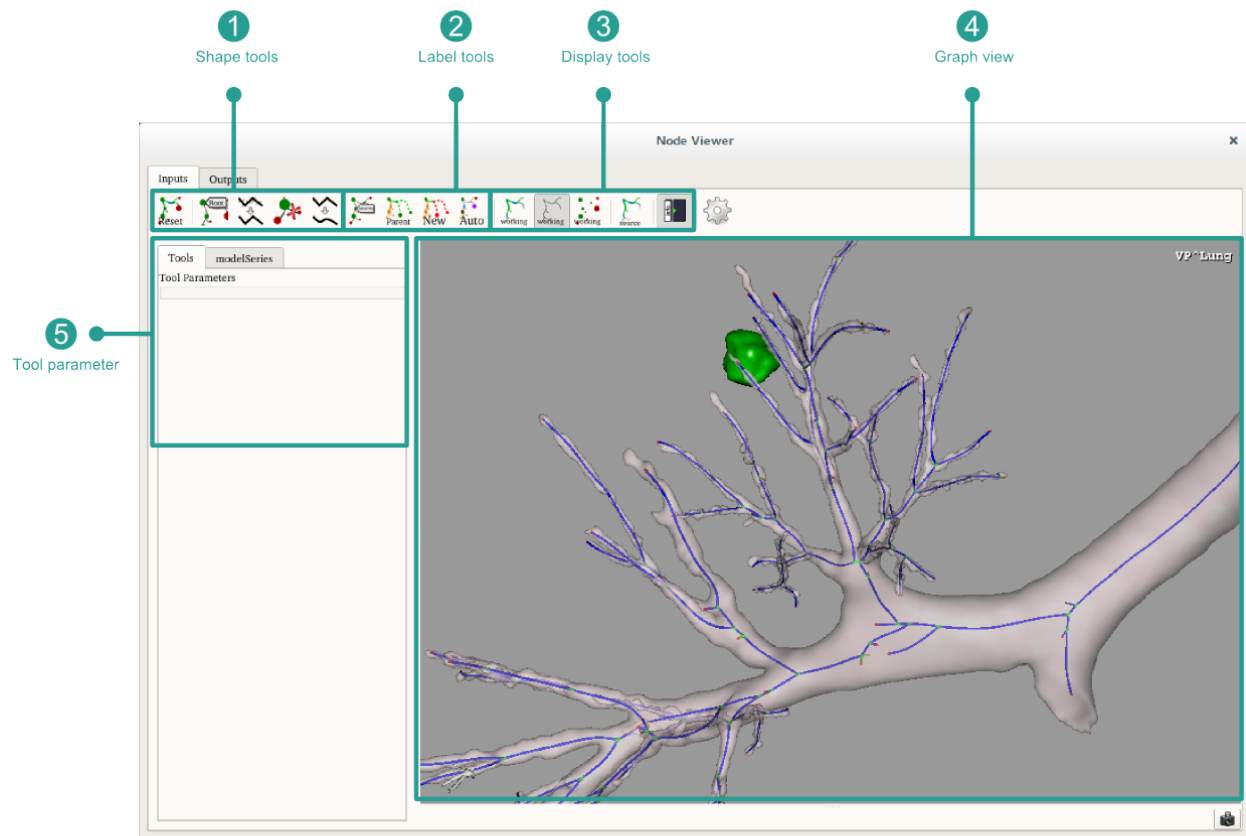


It is the labeling process that will determine the airway territories. Using the tools provided, the user must determine where the different network segments are located. Each segment has an associated color.

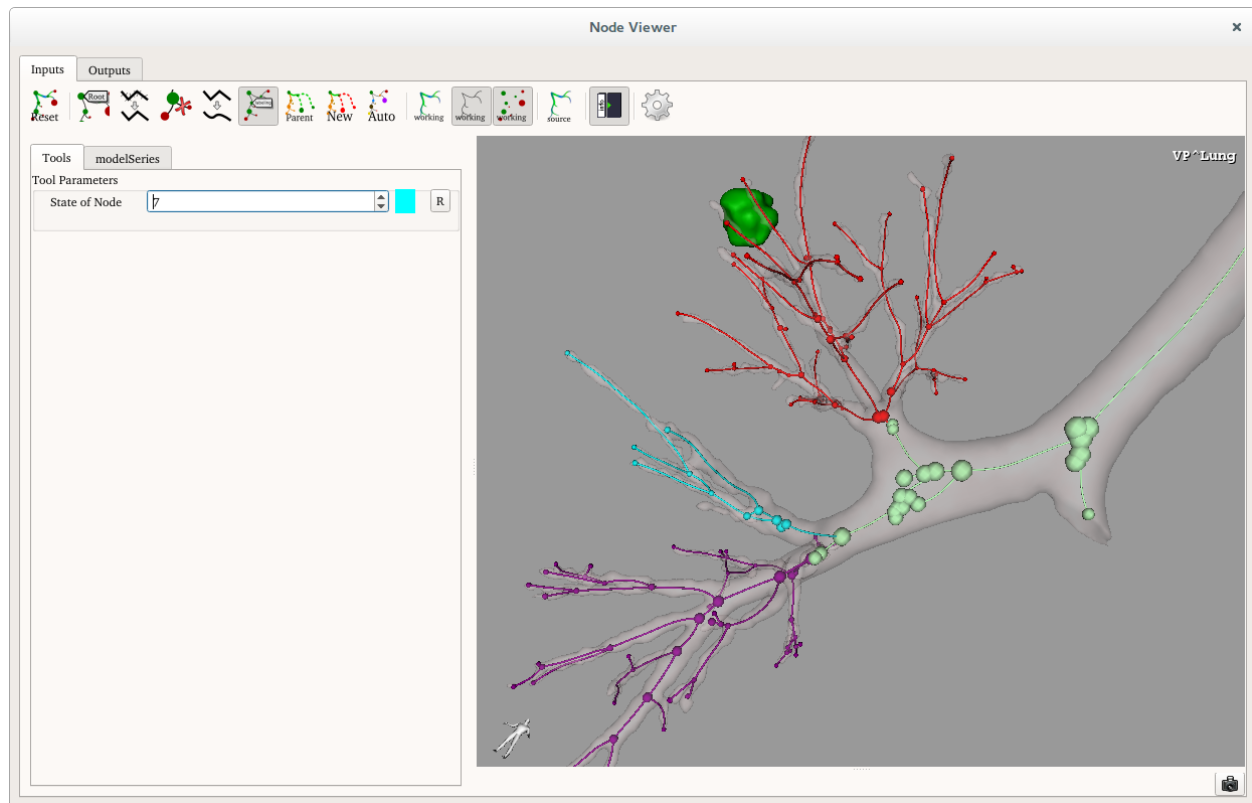


Step 3 : Generate the organ's segments

The next step consists in adding a Segmentizator operator to the process line. This operator uses the organ mask, and the labeled network graph in order to produce an approximation of the organ's segments.

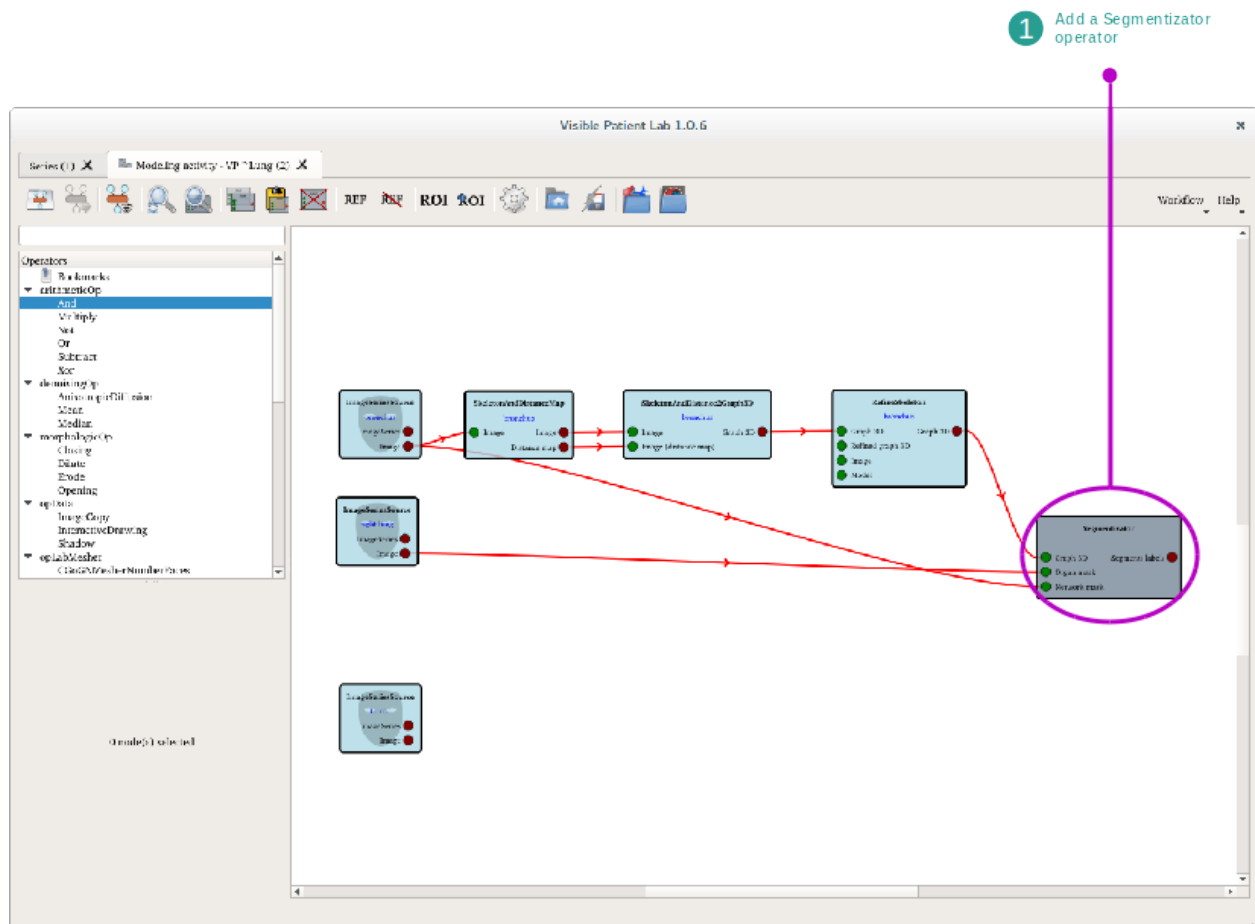


The following image displays the resulting organ's segments computed using the labeled network graph.

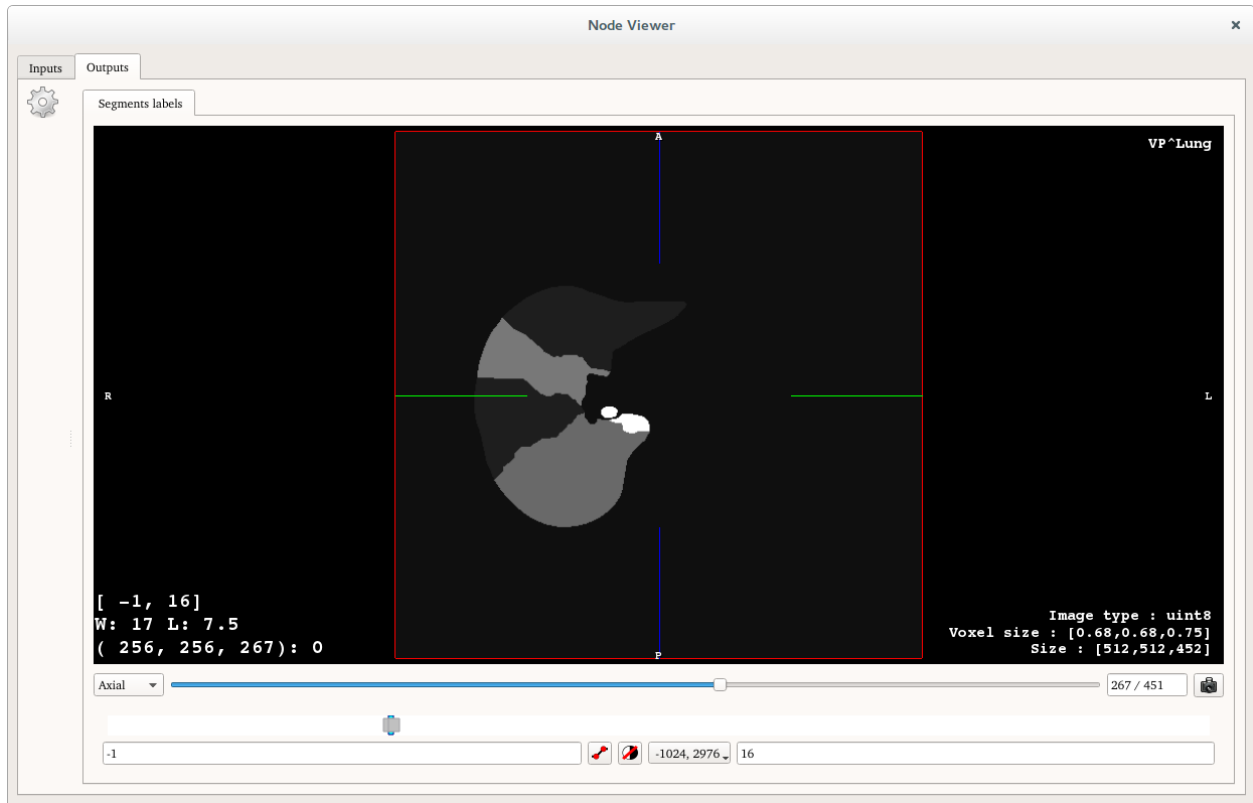


Step 4 : Generate the Clip Applying activity

The next step is to use the SegmentGenerator operator in order to generate the Clip Applying activity. This operator uses the network graph, the organ's segments, the organ mask, the network mask and the tumor masks to generate the activity.

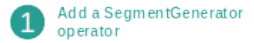


The final step is to export the Clip Applying activity. To do so, perform a right click on the SegmentGenerator operator output, and select the Export option.

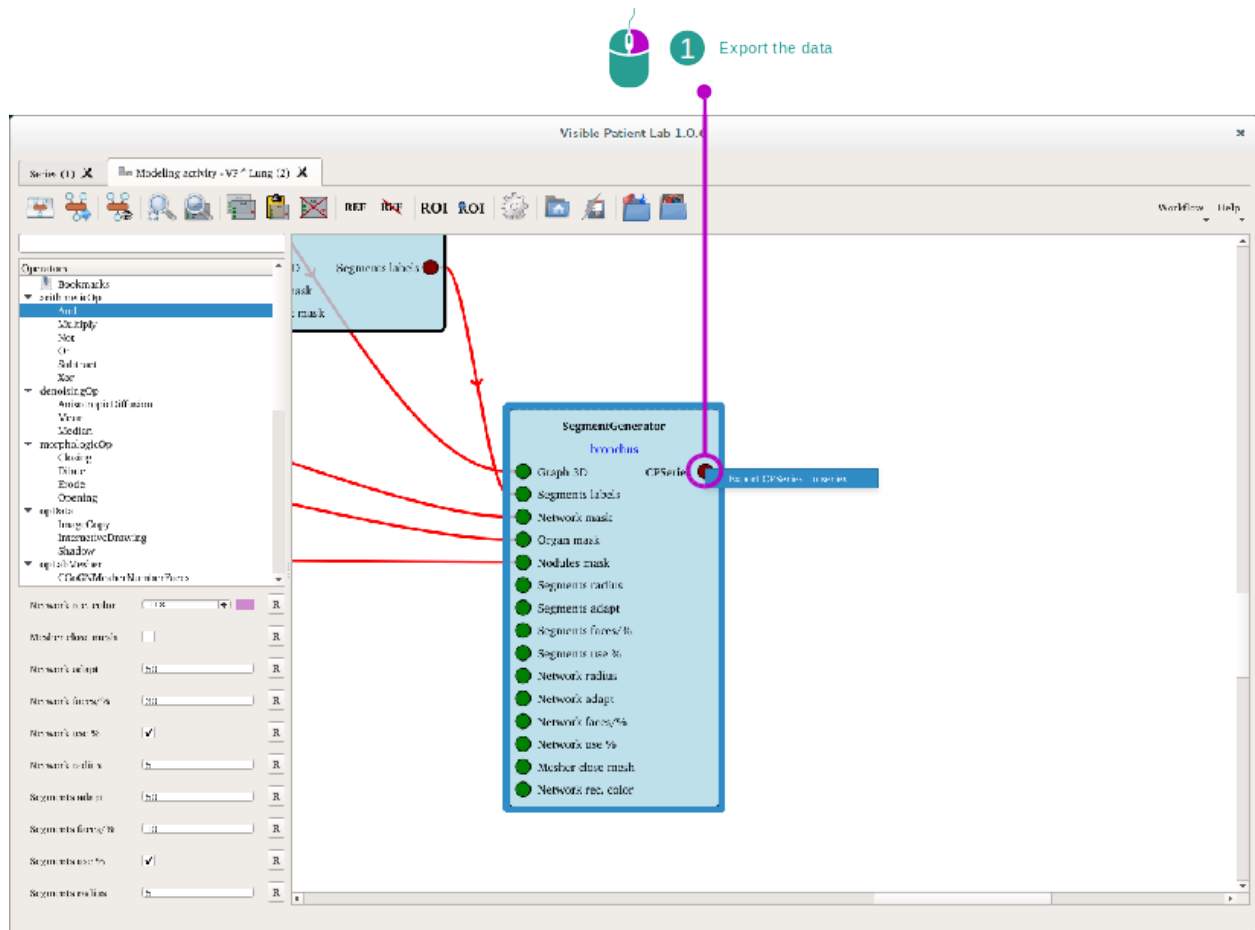

On the export window, select the study in which the Clip Applying activity will be added. You can then click on the Export Series button to export the series.

 1 Select the new series

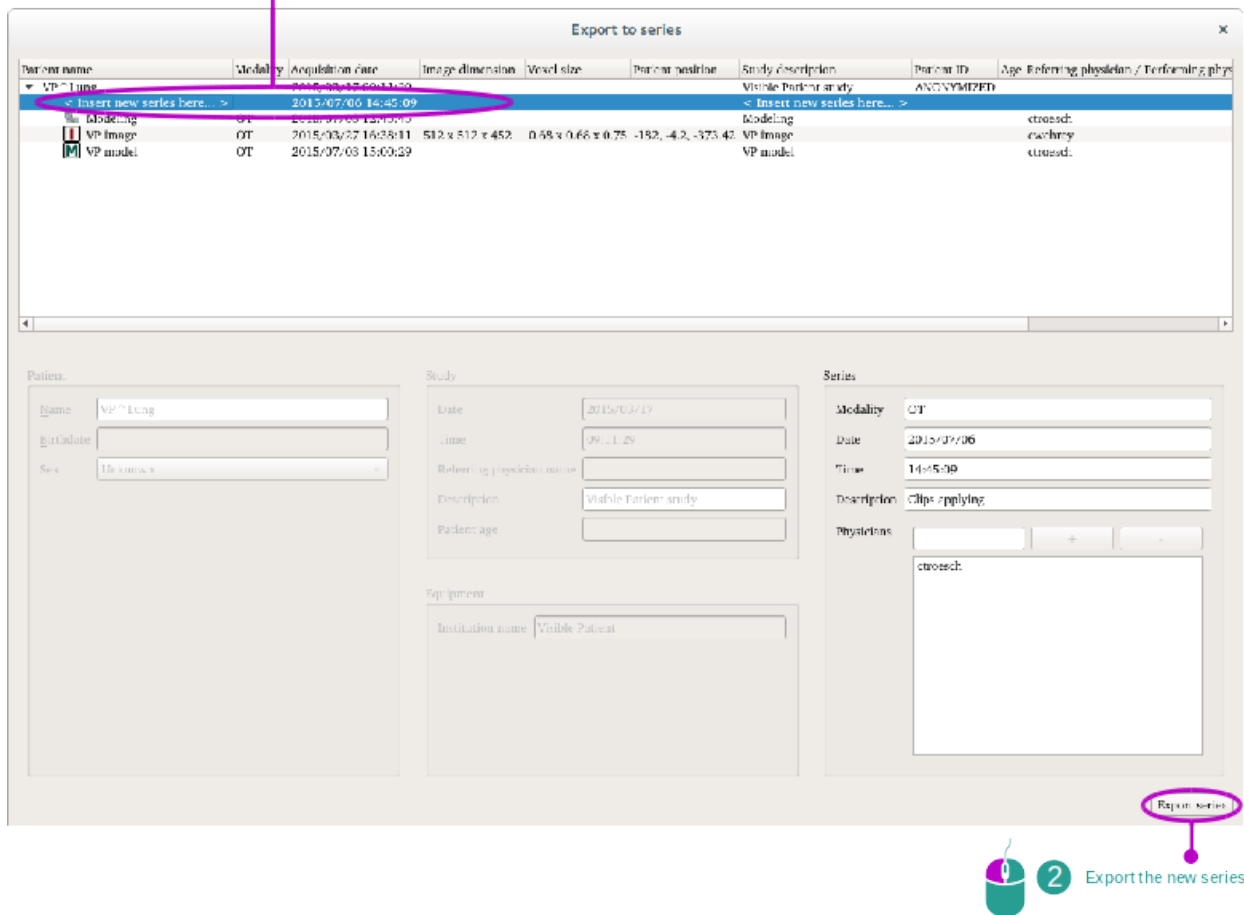

Export to series

Parent name	Modality	Acquisition date	Image dimension	Voxel size	Parent reslice	Study description	Parent ID	Age	Referring physician / Performing phys
VP-Clump		2015/07/06 14:45:09				Visible Patient study	ANONYMIZED		
> Insert new series here... >						> Insert new series here... >			
VP image	OT	2015/07/06 14:45:09	512 x 512 x 452	0.58 x 0.66 x 0.75	-182, -42, -375.42	Modeling			ctrosch.
VP model	OT	2015/07/06 14:45:09				VP image			ctrosch.
VP model	OT	2015/07/06 14:45:09				VP model			ctrosch.

Patient:

Name: VP-Clump

Birthdate:

Sex: Unknown

Study:

Date: 2015/07/06

Time: 14:45:09

Referring physician name:

Description: Visible Patient study

Patient age:

Series:

Modality: OT

Date: 2015/07/06

Time: 14:45:09

Description: Clips applying


Physicians:

ctrosch.

Export series

 2 Export the new series

For more information concerning the Clip Applying activity, please refer to the related section (see *Comment visualiser les segments*).

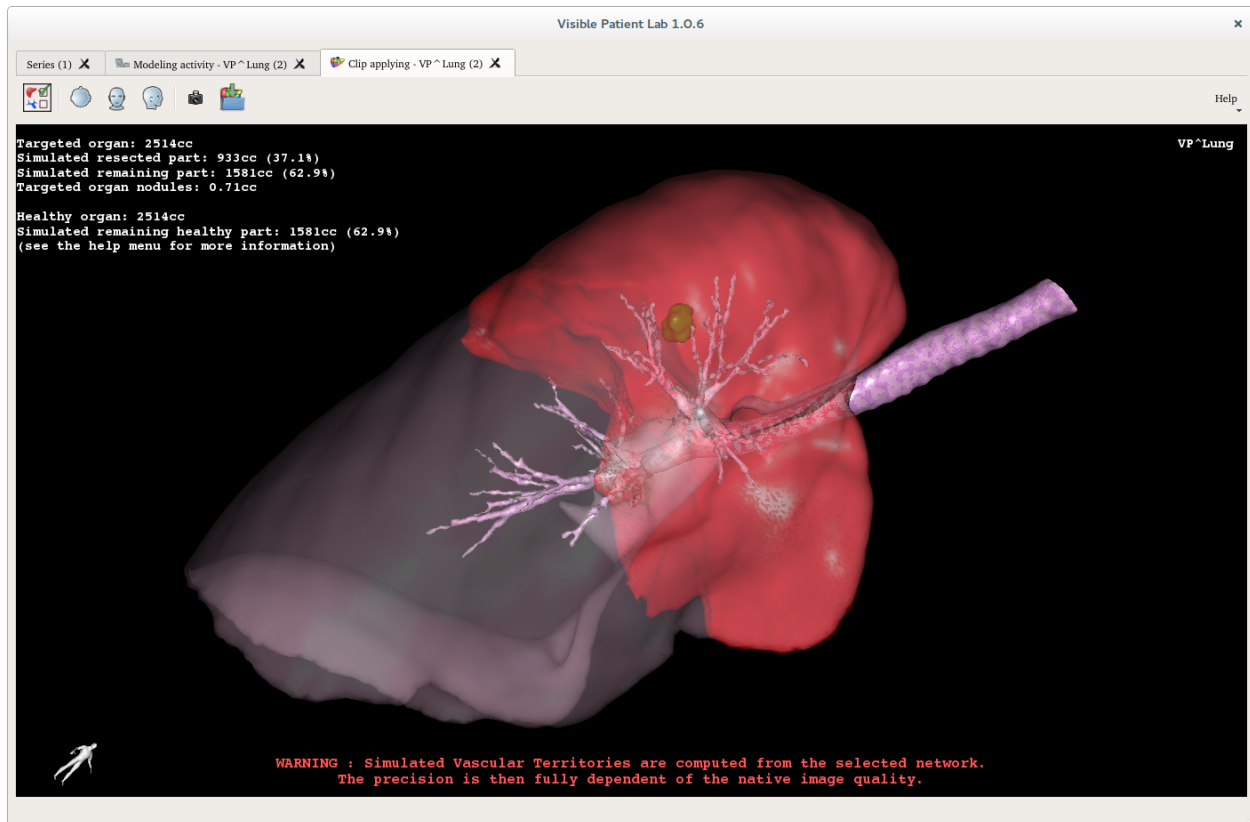


6.9.9 Informations complémentaires

Anatomical structure volume computation

Anatomical structure volumes are computed in the modeling activity during 3D model export or clip applying export. For more accuracy, volumes are directly computed from validated 3D masks and not from meshes. In consequence, there is no risk of introducing error in volume estimation during mesh creation and smoothing. The structure volume is obtained by multiplying the voxel unit volume by the number of voxels included in its associated 3D mask.

How to export the Modeling Activity

When Modeling activity opens, it is required to be exported in the Series activity :

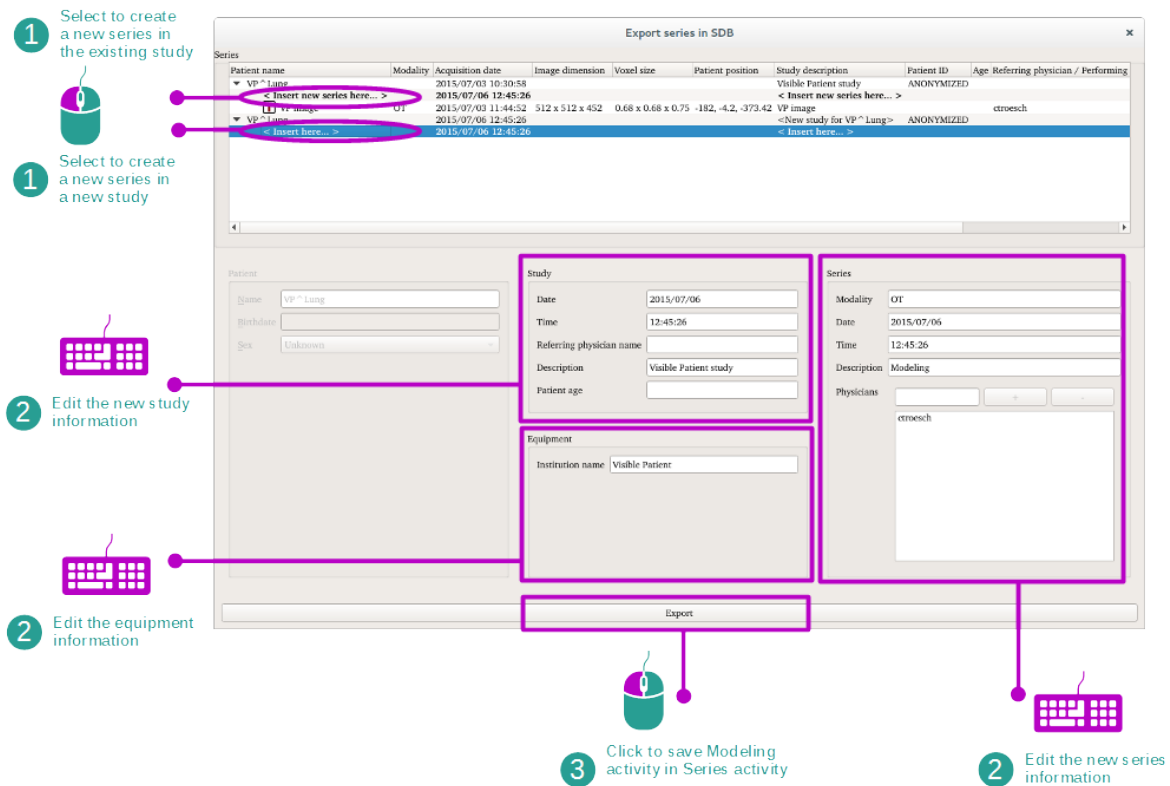


Placeholder series (named “Insert new series here”) shows in which study the Modeling activity can be exported. It can be exported into an existing study or in a new study. When selected, enter series information as well as study and equipment information (in case of a new study).

Then, click “Export” to export the Modeling activity.

How to set a reference image

The modeling activity provides a mechanism to set which image must be used as reference. The reference image is the one which is displayed in the background of the Anatomical Atlas activity. It can also be displayed in the node viewers in order to keep the reference when creating a mask. To set the reference image, select the image and click “Set Reference Image”.

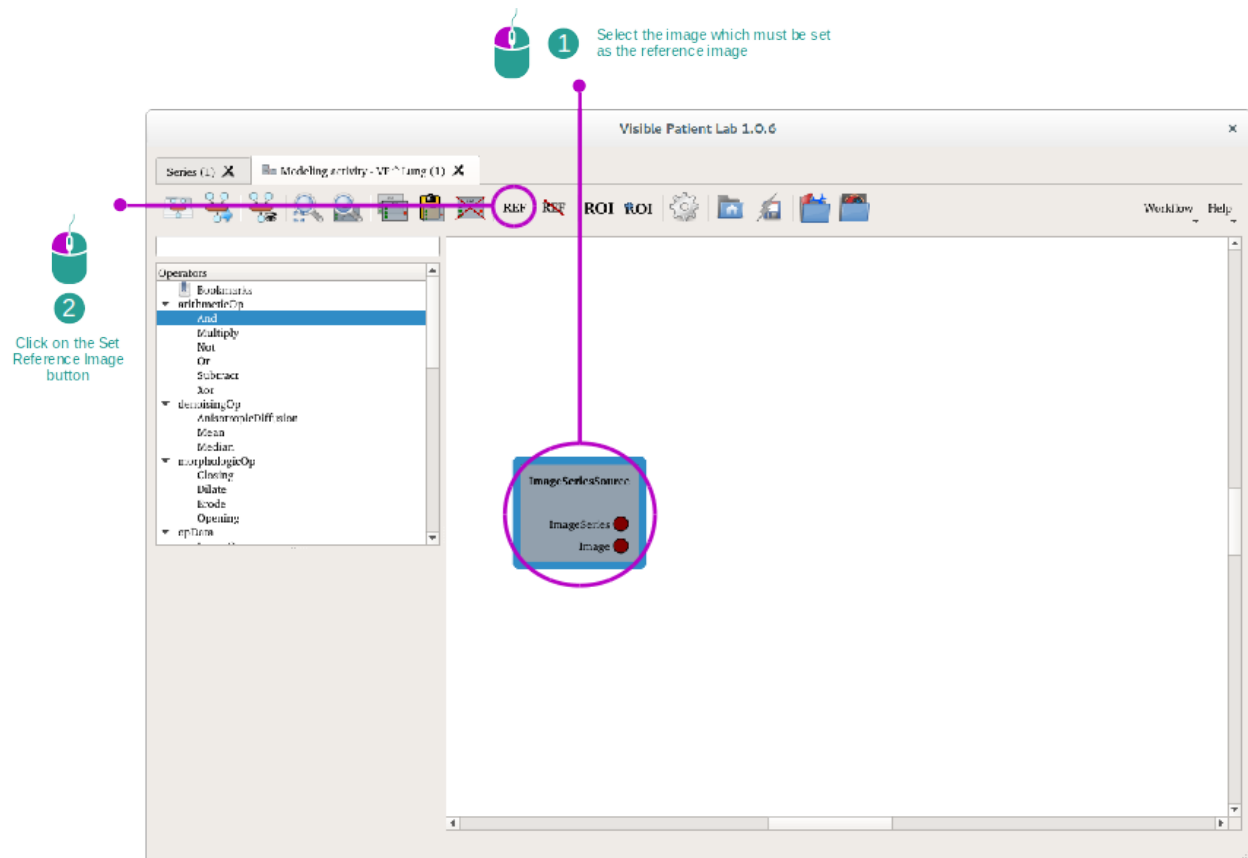

Operator descriptions

Arithmetic operators :

- **And** : AND logical operator pixel-wise between two images
- **Or** : OR logical operator pixel-wise between two images
- **Not** : NOT logical operator pixel-wise between an image
- **Xor** : XOR logical operator pixel-wise between two images
- **Subtract** : Pixel-wise subtraction of two images
- **Multiply** : Pixel-wise multiplication of two images

Morphologic operator :

- **Opening** : Morphologic opening on an image
- **Closing** : Morphologic closing on an image
- **Erode** : Morphologic erosion on an image
- **Dilate** : Morphologic dilatation on an image

Transform operators :

- **Cropping** : Crops the image
- **Convert to SignedShort** : Converts the image to signed short
- **Rotation** : Rotates the image around user specified axis

- **Subsampling** : Resamples an image
- **Flip** : Flips an image across user specified axis

Photometric operators :

- **Windowing** : Changes windowing of an image
- **Threshold** : Applies a threshold on an image according to user provided settings

Denoising operators :

- **Anisotropic diffusion** : Performs an anisotropic diffusion on an image
- **Median** : Applies median filter on the image
- **Mean** : Applies mean filter on the image

Topologic operators :

- **Fillhole2D** : Fills holes of connected components of an image
- **Labeling** : Labels the components of an image

Region growing operators :

- **ExtendLabel** : Extends components of an image

Graph & Segments

- **SkeletonAndDistanceMap** : Creates a distance map from an image
- **RefineSkeleton** : Allows the user to change a skeleton
- **Skeleton2Graph3D** : Creates a 3D graph from input skeleton image
- **SkeletonAndDistance2Graph3D** : Creates 3D graph from input skeleton image and distance map
- **SkeletonGraph2SkeletonImage** : Generates an image from a 3D graph and a information image (for spacing, size)
- **SegmentGenerator** : Generates meshes from a segmented image
- **Segmentizator** : Segments an image according to a network image

Meshers

- **CGoGNMesherPercentFaces** : Generates meshes from an image using face percentage settings
- **CGoGNMesherNumberFaces** : Generates meshes from an image using specified number of faces

Others :

- **Image Copy** : Copies the image
- **Smooth** : Smooths the mesh
- **Shadow** : Applies shadow filter on the image
- **InteractiveDrawing** : Allows the user to draw on an image

6.10 Comment anonymiser une image


Le logiciel Visible Patient Sender est dédié à l'anonymisation des données DICOM. Un rapport d'anonymisation sera également généré afin de pouvoir relier un numéro d'anonymisation aux informations patient.

6.10.1 Conditions préalables

Pour anonymiser une image, il faut utiliser le logiciel Visible Patient Sender.


6.10.2 Anonymiser une série DICOM

Commençons par une courte description de la structure de Visible Patient Sender.

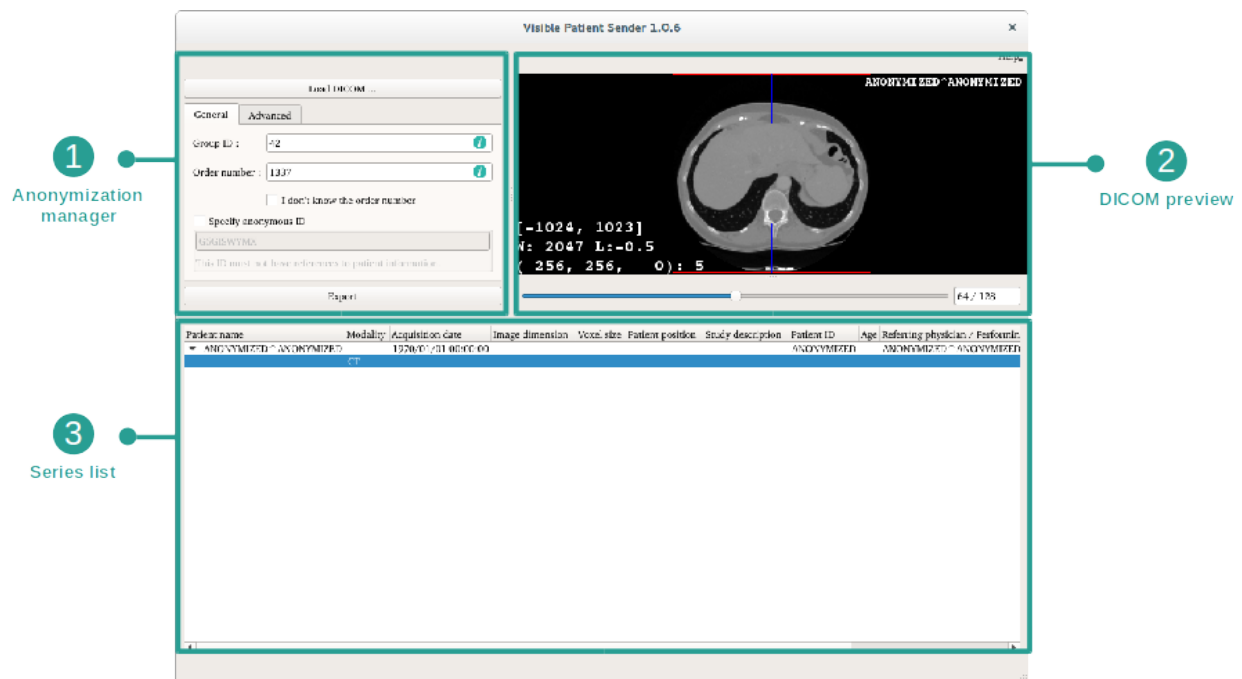

Ce logiciel se compose de trois parties principales. La première, située dans le coin supérieur gauche, est dédiée à la gestion du processus d'anonymisation. La deuxième, sur le côté droit, offre un aperçu des fichiers DICOM qui ont été chargés. La dernière, au bas de l'écran, représente la liste des séries chargées.

Etape 1 : ouvrir une série DICOM

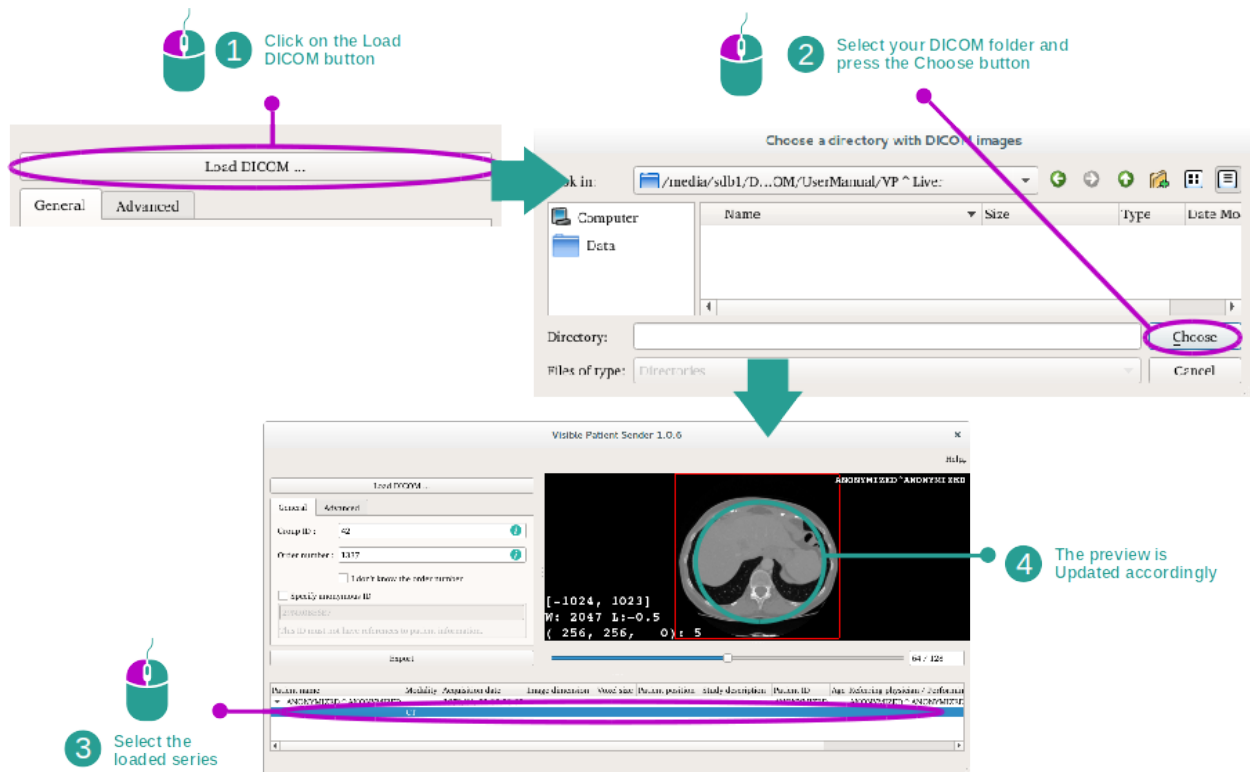

La première étape de l'anonymisation des données DICOM consiste à charger la série dans le logiciel Sender. Pour cela, cliquez sur "Load DICOM" ("Charger l'image DICOM"). Une fois chargée, la série s'affiche dans la liste au bas de l'écran. Vous pouvez avoir un aperçu de la série en la sélectionnant dans la liste.

Etape 2 : mise à jour des informations d'anonymisation et export d'une série anonymisée

The diagram illustrates the process of anonymizing and exporting a DICOM series using the Visible Patient Sender 1.0.6 software. It consists of two main windows: 'Load DICOM ...' and 'Visible Patient Sender 1.0.6'.

Step 1: Fill your VP Group ID. This is indicated by a keyboard icon and a red circle around the 'Group ID' field in the 'Load DICOM ...' window, which contains the value '42'.

Step 2: Fill your Order ID. This is indicated by a keyboard icon and a red circle around the 'Order number' field in the 'Load DICOM ...' window, which contains the value '1337'.

Step 3: If you don't know your Order ID, check this box. This is indicated by a mouse icon and a red circle around the 'I don't know the order number' checkbox in the 'Load DICOM ...' window. Below this, the 'Specify anonymous ID' checkbox is also shown, with a text box containing '25NRO336E7'.

Step 4: Press the export button to export your data and generate an anonymization report. This is indicated by a mouse icon and a red circle around the 'Export' button in the 'Load DICOM ...' window.

Step 5: If you have series that you do not want to send, select them and press the delete key. This is indicated by a mouse icon and a red circle around the 'Del' button in the 'Visible Patient Sender 1.0.6' window. The 'Visible Patient Sender 1.0.6' window shows a list of series with columns for 'Patient name', 'Modality', 'Acquisition date', 'Image sequence', 'Sequence', 'Patient position', 'Study description', 'Patient ID', 'Age', 'Referring physician / technician', 'Accession number', and 'Anonymization status'. The 'Anonymization status' column shows 'ANONYMIZED' for the selected series.

Une fois la série sélectionnée, des champs obligatoires doivent être complétés pour le processus d'anonymisation.

Une fois l'information fournie, le fichier DICOM anonymisé peut être exporté avec le bouton Export. Un fichier ZIP contenant la série sera généré, ainsi qu'un PDF. Ce PDF contient les informations permettant de faire le lien entre l'identifiant anonyme et les informations privées de votre patient.

CHAPITRE 7

Maintenance

Aucune maintenance n'est requise pour la Suite Visible Patient. Pour contrôler la distribution des logiciels, un système de licence est utilisé dans chaque logiciel de la Suite Visible Patient.

7.1 Planning

Le logiciel de planification est livré avec une licence intégrée qui est accordée pour 6 mois.

7.2 Mise à jour de la licence


60 jours avant expiration de la licence, une fenêtre pop-up apparaît à chaque démarrage du logiciel contenant des informations sur la date d'expiration.

Il est recommandé de vérifier si une nouvelle version du logiciel est disponible si la date d'expiration est inférieure à 30 jours. Si il n'y a pas de nouvelle version, veuillez contacter le support pour une nouvelle licence.

8.1 Problèmes généraux

8.1.1 Je ne peux pas ouvrir mon fichier DICOM

DICOM est une norme standard pour les données médicales. La mise en oeuvre de cette norme varie d'une structure à l'autre. Si le logiciel ne peut pas lire vos fichiers DICOM, vous trouverez plus d'informations à la fin du processus de lecture DICOM. Une fois le processus terminé, une fenêtre pop-up apparaît. Cliquez sur "Détails" pour voir les informations complémentaires :

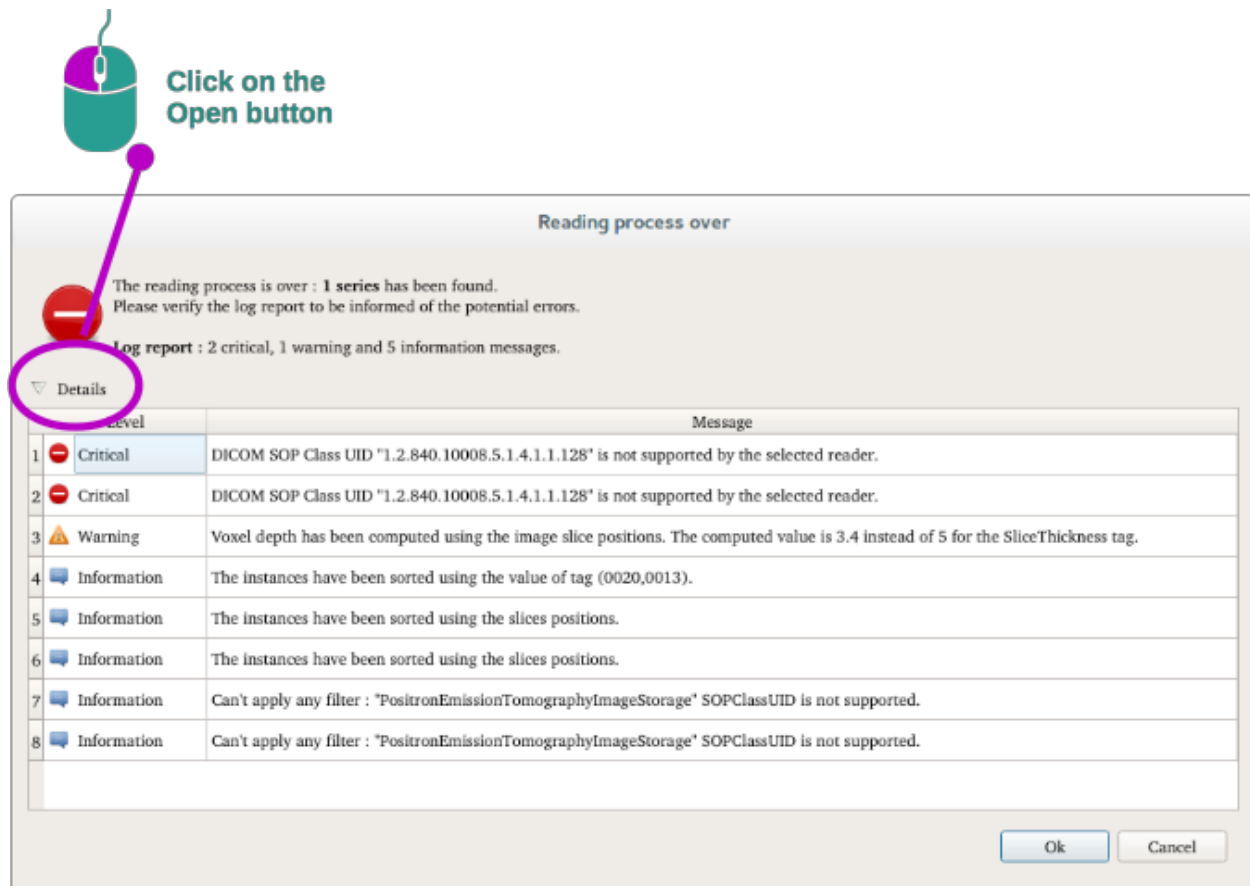

Vous pouvez voir plusieurs messages classés comme suit :

Icône	Signification	Conséquence
	Information	Information sur le processus de lecture
	Avertissement	Informations pouvant induire une mauvaise lecture
	Critique	Erreur critique, la série n'est pas du tout lue

Si vous rencontrez des problèmes avec la lecture DICOM, veuillez contacter le support de Visible Patient.

8.2 Problèmes de visualisation de segments

8.2.1 Aucun volume ne s'affiche

Si ce message s'affiche en haut à gauche :

Note : Incoherence detected during volume computation. Incohérence détectée pendant le calcul de volume

Le système a détecté une incohérence dans le calcul de volume. Par conséquent, le système affiche ce message afin de vous prévenir d'un problème dans le calcul des volumes de segments. Ce message est une mesure de contrôle des risques. Veuillez contacter le support de Visible Patient si vous rencontrez ce problème.

8.2.2 Je vois un avertissement concernant les territoires vasculaires simulés dans l'activité de pose de clip.

En démarrant l'activité de pose de clip (visualisation des segments d'organes), le message suivant s'affiche en rouge :

Note : Simulated Vascular Territories are computed from the selected network. The precision is then fully dependent of the native image quality. Les territoires vasculaires simulés sont calculés à partir d'un réseau sélectionné. La précision dépend alors entièrement de la qualité de l'image native.

Ce message est attendu et est un rappel du calcul des segments d'organes et du fait que la modélisation dépend de la qualité de l'image native. Les segments proposés sont donc une approximation de la réalité.